

ロゼッタ BM


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・本書に記載の使用目的以外で使用をしないこと。
- ・本品に対して、発疹・皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用をしないこと。

【形状、構造及び原理等】

1) 形状：

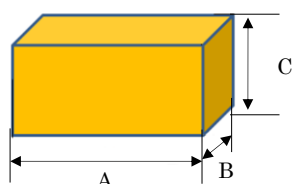

2) 寸法

シリーズ	A	B	C
C5 シリーズ	15.0mm	5.0mm	12.0mm
C8 シリーズ	15.0mm	8.0mm	8.0mm
C10 シリーズ	15.0mm	8.0mm	10.0mm
C12 シリーズ	15.0mm	10.0mm	12.0mm
C14 シリーズ	18.0mm	12.0mm	14.0mm

3) 色調

「C5 シリーズ」「C8 シリーズ」「C10 シリーズ」：

W1、W2、W3、A1、A2、A3、A3.5、A4、B1、B2、B3、
B4、C1、C2、C3、C4、D2、D3、D4

「C12 シリーズ」「C14 シリーズ」：

W1、W2、W3、A1、A2、A3、A3.5、A4、B1、B2、B3、
B4、C1、C2、C3、C4、D2、D3、D4、GA1、GA2、GA3、
GA3.5、GB1

4) 主な原材料

二酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化カリウム、
酸化ナトリウム

【使用目的又は効果】

本品は歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットとともに、歯科セラミックス製補綴物の作製に用いる。

【使用方法等】

＜使用前の準備＞

- 1) 歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット（以下 CAD/CAM 装置という）により、患者の口腔内模型をスキャニングする。

＜使用中の操作＞

- 1) 切削
CAD/CAM 装置に本品をセットし、スキャニングしたデータをもとに、本品を切削する。
- 2) 修復・調整
切削された本品を CAD/CAM 装置から取外し、必要に応じてダイヤモンドバー等を使用し表面を調整する。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- 1) 使用前に破損の有無を確認し、異常がある場合は使用しないこと。
- 2) CAD/CAM 装置に本品を取り付ける際、本品を損傷しないよう

うに注意すること。

- 3) CAD/CAM 装置で加工を行う際、指等を巻き込まれないように注意すること。
- 4) CAD/CAM 装置に正確に装着すること。
- 5) CAD/CAM 装置で切削する際は粉塵を吸引しないよう注意すること。
- 6) 製品を床に落とした場合は、破損の有無を確認すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 本品の使用により発疹・皮膚炎等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 1) 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避け乾燥した場所に保管すること。
温度：0℃～40℃
湿度：10%～90%
- 2) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- 3) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

 **SmartPractice**
株式会社スマートプラクティスジャパン
TEL 0120-415-418

＜製造業者＞

HASS CORPORATION
国名：大韓民国