

一般医療機器 眼鏡 JMDN コード： 35065000

アールエス・アイショップ リーディンググラス


状・構造及び原理等】

1)構成

本品は、フレーム及び1組のレンズで構成され、フレームデザイン、レンズの組み合わせにより、別紙1の全48モデルがある。

フレーム型番	レンズ度数
1034C1, 1034C5, 1060C1, 1060C3, 1110C1, 1115C1	+1.5
1115C5, 1120C1, 1123C2, 1130C4, 1133C1, 1141C3	+2.0
1145C1, 1148C1, 1153C2, 1155C2	+2.5
16 種	3 種

2) 形状及び構造

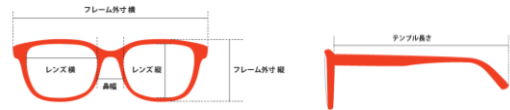

1034C1 レンズ H35×W43mm 鼻幅 18mm フレーム外寸 H43×W135mm テンプル長さ 140mm 重量 80g	1034C5 レンズ H35×W43mm 鼻幅 18mm フレーム外寸 H43×W135mm テンプル長さ 140mm 重量 80g
1060C1 レンズ H42×W45mm 鼻幅 18mm フレーム外寸 H46×W135mm テンプル長さ 140mm 重量 80g	1060C3 レンズ H42×W45mm 鼻幅 18mm フレーム外寸 H46×W135mm テンプル長さ 140mm 重量 80g
1110C1 レンズ H41×W46mm 鼻幅 20mm フレーム外寸 H50×W138mm テンプル長さ 140mm 重量 80g	1115C1 レンズ H40×W48mm 鼻幅 18mm フレーム外寸 H46×W137mm テンプル長さ 148mm 重量 80g
1115C5 レンズ H40×W48mm 鼻幅 18mm フレーム外寸 H46×W137mm テンプル長さ 148mm 重量 80g	1120C1 レンズ H38×W44mm 鼻幅 14mm フレーム外寸 H46×W140mm テンプル長さ 148mm 重量 80g
1123C2 レンズ H34×W48mm 鼻幅 14mm フレーム外寸 H39×W138mm テンプル長さ 143mm 重量 80g	1130C4 レンズ H42×W50mm 鼻幅 11mm フレーム外寸 H52×W140mm テンプル長さ 140mm 重量 80g
1133C1 レンズ H41×W46mm 鼻幅 14mm フレーム外寸 H51×W140mm テンプル長さ 148mm 重量 80g	1141C3 レンズ H41×W48mm 鼻幅 15mm フレーム外寸 H48×W137mm テンプル長さ 142mm 重量 80g
1145C1 レンズ H41×W51mm 鼻幅 14mm フレーム外寸 H46×W137mm テンプル長さ 140mm 重量 80g	1148C1 レンズ H41×W49mm 鼻幅 13mm フレーム外寸 H49×W140mm テンプル長さ 140mm 重量 80g

1153C2 レンズ H40×W48mm 鼻幅 18mm フレーム外寸 H46×W137mm テンプル長さ 140mm 重量 80g	1155C2 レンズ H35×W43mm 鼻幅 18mm フレーム外寸 H43×W135mm テンプル長さ 140mm 重量 80g
--	--

3) 原理

適切な度数のレンズを用いて網膜上に結像させることにより、視力を補正する。

【使用目的又は効果】

本品は、眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームからなる視力補正用眼鏡である。

【使用方法等】

1. 使用方法等

- ・手元の文字等を見る際に使用する。
- ・掛け外しの際には、両手でテンプルを持って行う。

2. 使用上の注意

- ・この眼鏡は、手元の文字を見やすくするための視力補正用眼鏡なので、かけたまま歩いたり、車の運転はしないでください。
- ・階段の昇り降り、段差のある所での使用は避けてください。
- ・直射日光が当たる場所、炎天下の自動車内には放置しないでください。レンズを使用しているため発火の恐れがあります。
- ・暑い所、温度の高いところでは保管しないでください。レンズが割れる恐れがあります。
- ・本品を使用したまま太陽などの強い光を見ないでください。目を痛める恐れがあります。
- ・本来の用途以外に使用しないでください。
- ・廃棄の際は各自治体の廃棄区分に従ってください。
- ・万一不良品の場合には購入店にてお取替えさせていただきます。
- ・本品の誤った利用により生じた損害や逸失利益、第三者のいかなる請求についても、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・視力或使用目的にあった正確な眼鏡を選ぶため、眼科医に相談して購入してください。

【保管方法等】

水濡れに注意し、直射日光、高温多湿及び衝撃等を避け、ケースに入れて保管すること。
商品に関するご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：スターデザイン株式会社
電話番号：03-6233-7416

販売元：株式会社 マークス
東京都世田谷区太子堂 1-4-24
電話番号：03-5779-7500