



ディスクドクター WG50 G2

【形状・構造及び原理等】

1. 種類・規格：本品は、損傷した身体部位を固定するために用いる器具であり、身体に合うように予め成形された空気注入副木と、エアポンプで構成される。空気注入副木はベルト状であり、腰に装着し、エアポンプで膨らませる。サイズにより6つの種類がある。

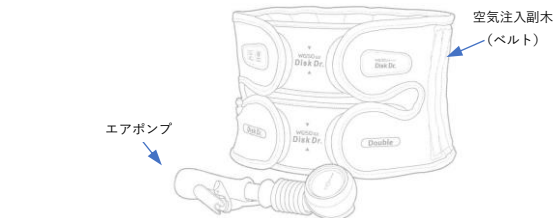

サイズ：空気注入副木（ベルト）



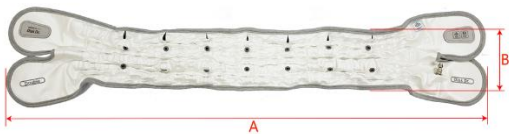


サイズ	寸法 (mm)：A x B	重量 (g)
S	730 × 115	280
M	825 × 125	340
L	935 × 135	400
XL	1,050 × 135	440
2XL	1,235 × 135	510
3XL	1,375 × 135	570

サイズ：空気注入副木（ベルト）



2. 構造と素材

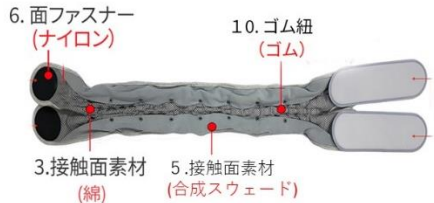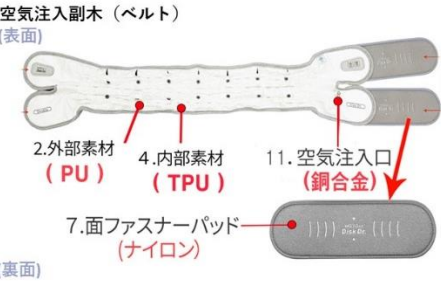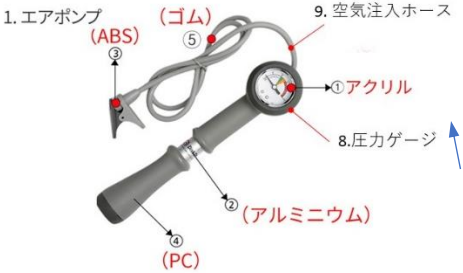

3. 原理

ポリエチレン製カラーを支持体とした本品を、空気で膨らませて腰部挫傷（捻挫）等の患部に沿わせることで、患部を固定する。


【使用目的又は効果】

腰部挫傷（捻挫）等の固定に用いられる。

【使用方法等】

装着方法

- 図のようにベルトに面ファスナーパッドを取り付けます。
- ベルトの両端を掴み、ベルトが骨盤に掛かるようにセットします。
- 体の中心を基準に、ベルトの両端部分が左右均一に位置するように調節します。
- 右手でベルトを固定しながら、左手を使って面ファスナーパッドを腹部の上に設置します。
- 下から順番に、右手で掴んでいるベルトを面ファスナーパッドに貼り付けます。
- ここでパッドが片寄っている場合は面ファスナーの付着位置を調節してください。
- エアポンプのクリップを押しながら、空気注入口に接続します。
- 図のようにポンプのハンドルを握り、ゲージを見る姿勢をとります。
- ポンプのハンドルを上下させて空気を注入します。（適正空気圧：10～14 psi）
- ※注入する空気力は14 psiを超えないようにしてください。
10. 空気注入後、ポンプのクリップを押して空気注入口からクリップを取り外せば、着用完了です（クリップを取り外す際、空気が抜ける音がありますが、これは正常な作用です）。

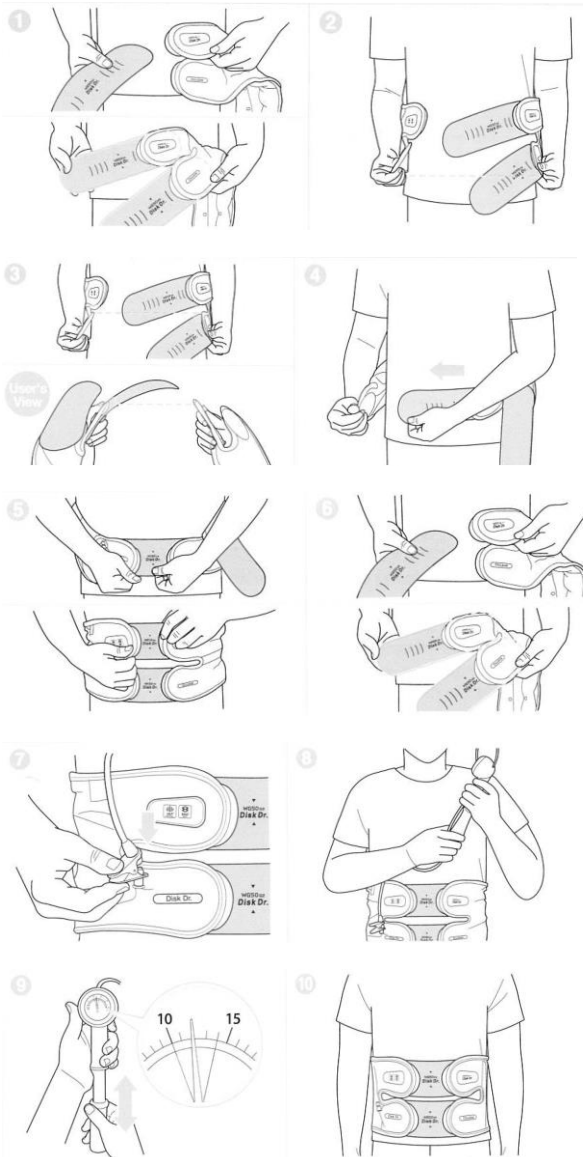

ディスクドクター WG50 G2

【使用上の注意】

1. 警告（誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される行為）
 - 下記のような方、またご使用に不安がある方は医師に相談してください。
 - 高血圧など血圧や血管に異常のある方 ・心臓疾患のある方
 - 脳血管に異常のある方 ・多汗症の方 ・妊娠中の方
 - ご使用中に体調の問題が発生した場合、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
 - 衛生のため、本製品を複数の人で使用しないでください。
 - 子供の手の届かないところに保管してください。
 - 本製品を本来の目的以外に使用しないでください。
 - 脊柱管狭窄症や椎間板ヘルニアの症状ある方は必ず医師とご相談の上ご使用下さい。
 - 本製品を分解・修理・改造しないでください。お客様の判断で製品に変更を加えた場合は、製品破損の恐れがあり、補償義務の対象外となります。
2. 注意（誤った場合、使用者が軽傷を負う、または物的損害の発生が想定される行為）
 - ポンプのゲージには空気圧がpsiで表示されています。空気注入の圧力は14psiを決して超えないようにしてください。
 - 過度に空気を注入すると、製品が破損し、大きな音がすることもあります。必ず適正な量の空気を注入してください。
 - 空気注入口ネジは時計回り(右)に軽く回すだけで締めることが可能です。無理な力を加えたり、空気注入口に異物を入れたりすると、製品が破損することがあります。
 - ベルトが鋭い物に当たらないようにご注意ください。
 - エアポンプを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
 - 本製品を着用したまま水中に入ったり、気圧の変化が激しい乗り物に乗ったりしないでください。
 - 肌に直接着用するのが最も効果的ですが、敏感肌などで難しい場合は薄い綿の上に着用してください。
 - 本製品を使用する際は、衛生状態を常に確認してください。
 - 重いものを乗せたり、強いショックや圧力を与えたりしないでください。
 - 製品内部に異物を入れて使用しないでください（オイル、パウダー等）。
 - 本製品に故障が発見された場合は使用を直ちに中止してください。

【保管方法】

- 使用しない時は空気注入口のネジを反時計回りに回すか、空気注入口の真ん中にあるピンを押して空気を排出してから正しく伸ばして保管してください。
- 高温になる場所や湿度の高い場所、直射日光の当たらない場所に保管してください。
- 重い物を載せたり、圧力を掛けたりしないでください。
- エアポンプ落としたり衝撃を与えたりしないでください。
- ベルトは先が尖った物やストーブなど高温の火気に触れないよう注意してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：スターデザイン株式会社

住所：東京都新宿区大久保1-3-14

電話番号：03-6233-74162

製造元：Disk Dr. Co., Ltd.

住所：C-402~407, (Pungsan-dong, Hanam technovalley U1 Center),
947, Hanam-daero, Hanam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea