

ディスクドクター NK30

【形状・構造及び原理等】

- 種類・規格：本品は、損傷した身体部位を固定するために用いる器具であり、身体に合うように予め成形された空気注入副木と、エアポンプで構成される。空気注入副木は膝に装着し、エアポンプで膨らませる。サイズにより3つの種類がある。



【空気注入式副木】

サイズ	長さ (mm)	上段周り (mm)	下段周り (mm)	重量 (g)
S	340	375	325	135
M	340	395	345	141
L	340	445	395	152

【エアポンプ】

	長さ(mm)	幅(mm)	重量(g)
ポンプ	82.5	50	30

2. 構造と素材

本品を構成する材料は以下の通りです。

空気注入副木

【表面】



【裏面】



3. 原理

ポリウレタン製空気柱を支持体とした本品を、空気で膨らませて膝の挫傷（捻挫）等の患部に沿わせることで、患部を固定する。


【使用目的又は効果】

膝の挫傷（捻挫）等の固定に用いられる。

【使用方法等】

装着方法

- 装着前、後面ストラップの面ファスナーを取り外してゆるく取り付けます。
- 椅子に腰掛けて製品を装着する足をまっすぐに伸ばします。
- 製品を両手で掴み、足を入れた後、センターホールが膝の中央部に位置するように引っ張って装着してください。
- 脚を伸ばした状態で製品の上段と下段を反対方向へ引っ張って身体に密着させます。
- 上下ストラップの面ファスナーを両手で同時に掴み、適切な力加減で引っ張って取り付けます。
- 製品下段部の空気注入口のボタンを押した状態でポンプを押して空気を注入します。

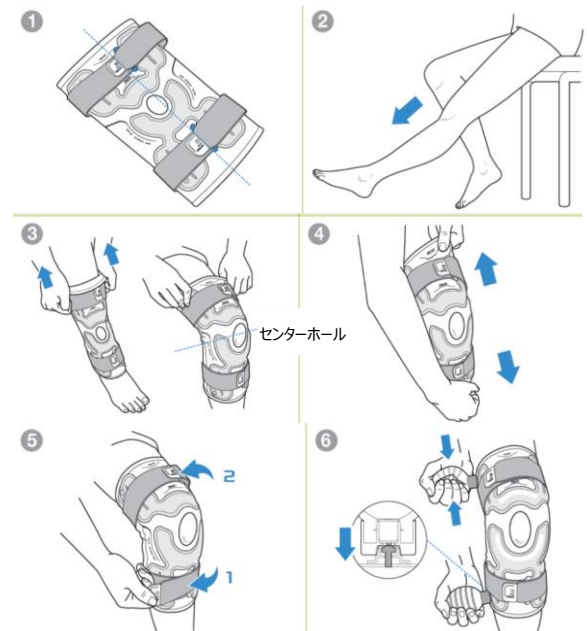

【使用上の注意】

警告

- 医師の治療を受けている方や身体の異常がある方、またご使用に不安のある方は医師に相談の上ご使用ください。
- ご使用中に体調の問題が発生した場合、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 製品を装着する際、締めすぎると血流を阻害する恐れがあります。
- 傷がある部位には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・改造しないでください。独自の判断による製品の変更は、製品破損の恐れがあります。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 本製品を本来の使用目的以外に使用しないでください。
- 本製品以外の製品を接続しないでください。
- 就寝時は使用しないでください。

注意

- 製品使用前と後に、膝や膝の周りに異常がないかご確認ください。
- ご使用中、体に不調が発生した場合、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 直射日光や高温を避けて風通しの良い場所に保存して下さい。
- 製品が鋭い物に当たらないようにご注意ください。
- 製品を装着したまま水中に入ったり、空気圧力の変化が激しい乗り物に乗らないでください。
- 重いものを乗せたり、強いショックを与えたり、圧力をかけないでください。
- 肌に直接装着するのが最も効果的ですが、敏感肌などで難しい場合は薄い綿の上に装着してください。

禁止

- 動きの制限と負傷を防ぐため、両方の膝に装着するのはご遠慮ください。
- 医療用シリコン、人工関節、医療用ネジ、補正器具などのような体内埋め込み形の医療用器具を使用している方は、装着をお避けください。
- 既往症のある方や医療機関で治療中の方は医師にご相談の上ご使用下さい。

ディスクドクター NK30

【次のような方は使用しない】

- アレルギー体質・アトピー性皮膚炎のある方・妊娠中の方・飲酒後や薬などを服用中の方
- 医師から本製品の使用を禁じられている方

【一般的な指示事項】

- 膝と膝の回りのみに使用し、その他の部位には使用しないでください。
- 手術を受けた部位・傷や熱傷の部位・炎症のある部位
- 糖尿病の方・痛覚・知覚障害のある部位
- 物理的刺激や化学的刺激による皮膚炎のある部位

【その他、禁止事項】

- ご使用中に体調の問題が発生した場合、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- ご使用中にかゆみ・発疹・発赤などの症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 他の機器や医薬品との併用は避け下さい。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 本製品を本来の目的以外に使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : スターデザイン株式会社

住所 : 東京都新宿区大久保1-3-14

電話番号 : 03-6233-74162

製造元 : Disk Dr. Co., Ltd.

住所 : C-402~407, (Pungsan-dong, Hanam technovalley U1 Center),
947, Hanam-daero, Hanam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

【保管方法】

- 保管する際には、上段・下段ストラップの面ファスナーを位置に合わせて取り付けます。
- 製品を使用した後、汚れがひどい場合を除いて、十分に乾燥だけさせてから保管してください。
- 直射日光や湿度の高い場所を避けて、風通しの良い場所に保存して下さい。
- 洗濯後、十分乾燥させた清潔な状態で保管してください。
- 本製品が、先の尖った物やストーブなど高温の火気に触れないよう注意してください。
- 無理に折りたたんだり、荷重を掛けたりしないでください。