

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 注射筒・針用アダプタ 35384000

3-D Matrix シリンジアダプタ

再使用禁止


※【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止
- ・注射針を含む血管内へ投与を意図するチューブ、コックには接続しないこと

※【形状、構造及び原理等】

本品は、ピュアスタート(製造販売承認番号：30200BZX00236000)に接続し、チューブ、コック、その他の構造へ接続する器具である。

外観図

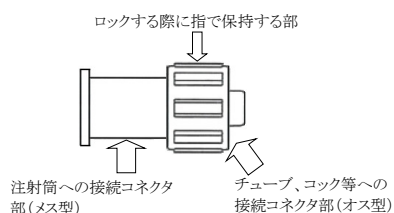

外形寸法：(長さ) 18.8mm × (外径) 10.25mm

形 状	材 質
ルアーロック付き	ポリプロピレン


【使用目的又は効果】

注射筒をチューブ、コック、その他の構造に接続するルアーロック付きの器具である。

※【使用方法等】

1. 使用方法

- (1) 包装を開封し、本品を取り出します。
- (2) ピュアスタートの注射筒のノズル(筒先)部分に、本品の「注射筒への接続コネクタ部」(メス型)をしっかりと接続します。
- (3) 注射筒に接続された本品の「チューブ、コック等への接続コネクタ部」(オス型)に、チューブ、コック、その他の構造をしっかりと接続します。

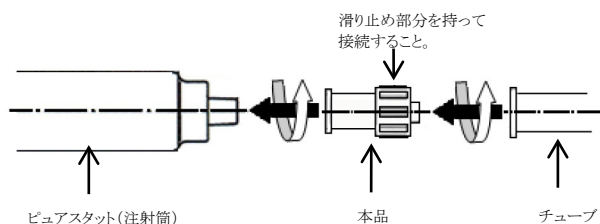

- (4) すべての接続部分の状態に異常がないことを確認し、注射筒内の溶液をチューブ、コック、その他の構造へ注入します。
- (5) チューブ、コック、その他の構造から注射筒若しくは本品を取り外す際は、本品の滑り止め部分をしっかりと持って、ルアーロックを解除し取り外します。
- (6) 使用後は注射筒とともに廃棄します。

2. 組み合わせて使用する医療機器

本品は弊社の販売名「ピュアスタート」(承認番号：30200BZX00236000)と組み合わせて使用する。

※【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は、ピュアスタートの専用シリンジアダプタである。本品を使用することにより、チューブ、コック、その他の構造に接続が可能となるが、注射筒内の溶液を誤って患者の血管へ注射しないためにも、注射針等の接続はしないこと。[ピュアスタートは、患者の血管への注射を意図しないため。]
- (2) 本品を、チューブ、コック、その他の構造に接続する又は取り外す際は、本品を曲げることなく、まっすぐに接続又は取り外すこと。[曲げた場合は、注射筒のノズル(筒先)との接触部分が緩み、溶液漏れ、エアの混入が生じる可能性がある。]
- (3) 使用する前に注射筒側及びチューブ、コック等側との嵌合を確認すること。

【保管方法及び有効期間等】最終照査用

1. 保管方法

- ・水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

- ・有効期間：製造後 3年(自己認証データによる)
- ・使用期限は包装の使用期限欄を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社スリー・ディー・マトリックス
電話：03-3511-3440