

医療用品(4)整形用品
高度管理医療機器 体内固定用大腿骨髄内釘 (JMDN コード:33187000)
(体内固定用脛骨髄内釘、体内固定用ネジ、体内固定用ナット)

トライジェン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 再使用禁止
2. 本品に曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造)をしないこと。
[折損等の原因となる。]

＜適用対象(患者)＞

1. 骨量と骨質が不十分である症例には使用しないこと。[十分な固定が得られない可能性がある。]
2. 骨の過大欠損及び病的骨基質、骨髄腔閉塞、感染の既往歴、十分な血流が確保されない等、骨癒合を遅延させる要因がある症例には使用しないこと。[癒合不全の可能性がある。]
3. 臨床的に顕著な感染がある症例には使用しないこと。[再置換の可能性がある。]
4. 過去に挿入した骨折固定用インプラントが現在存在している症例には使用しないこと。[異種金属による電氣的腐食を起こす可能性がある。]
5. 骨変形がみられる症例には使用しないこと。[十分な固定が得られない可能性がある。]
6. 循環血液量低下、低体温及び血液凝固異常のある症例には使用しないこと。[癒合不全の可能性がある。]
7. 治療に際して協力の得られない患者、精神障害の見られる患者等で、術後の治療方針に従う事が困難であると予想される患者には使用しないこと。[癒合不全の可能性がある。]
8. 骨端線が開放状態にある症例には使用しないこと。[成長不全の可能性がある。]
9. 金属や異物に対して重篤なアレルギーがある患者に使用しないこと。
[「不具合・有害事象」の項参照。]
10. 大腿骨の肉眼的変形、肥満、重度のO脚等のインプラントが十分固定できないか、又は治癒を遅らせる身体条件を有する症例には使用しないこと。[癒合不全の可能性がある。]
11. 小児の大腿骨頭すべり症には使用しないこと。[正常な骨の成長を妨げる可能性がある。]

＜併用医療機器＞

1. 当社が指定する以外のインプラント及び他社製インプラントを組み合わせ使用しないこと。[「相互作用」の項参照。]
2. 当社が指定する以外の手術器械と組み合わせ使用しないこと。
[「相互作用」の項参照。]
3. 当社が指定する以外の材質の異なるインプラントと組み合わせ使用しないこと。[「相互作用」の項参照。]


【形状・構造及び原理等】

本品は、ネイル、スクリュー等から構成されており、それぞれ近位部と遠位部にスクリューが通るホールが開けられている。各部品には様々な形状、サイズの製品がある。髄内横止め釘には、スクリュー固定位置の異なるものがあるので、手術方法(順行性または逆行性)によって適切な製品を選択することが出来る。また、スクリューを使用することによって、肢長の短縮や癒合部位の回転を最小限に抑える様にデザインされている。

適応症例により、大腿骨用、脛骨用、大腿骨頸部用、リコンストラクション用として使用可能である。

通常は、骨折部を展開せず、外骨膜が温存され、髄内から強固な固定が得られ、骨癒合に有利に働く副子である。又、横止めスクリューは回旋不安定性を防ぎ、さらに骨折部の短縮も防止する製品である。

＜接続時の形状例＞

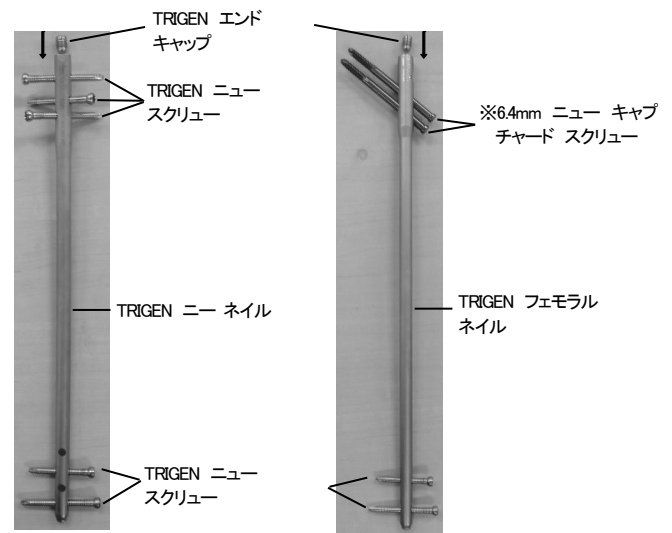

※本品には含まれていない。

＜組成、形状及び構造＞

	構成品名	形状	組成
(1)	TRIGEN ニー ネイル		チタン合金
(2)	TRIGEN ニー ネイル ショート		チタン合金
(3)	TRIGEN ペディアトリック ネイル		チタン合金
(4)	TRIGEN フェモラルネイル		チタン合金
(5)	TRIGEN ディスタルティピアルネイル		チタン合金
(6)	TRIGEN ニュー スクリュー		チタン合金
(7)	TRIGEN ステープルロック ナット		チタン合金、 超高分子量 ポリエチレン
	ワッシャー		チタン合金
(8)	TRIGEN エンドキャップ		チタン合金

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

本品は、転子下骨折、大腿骨骨幹部骨折および頸部骨折等の治療の目的で使用し、大腿骨及び脛骨髄腔内に挿入して骨折部を固定する目的で使用するインプラントである。

2. 使用目的又は効果に関連する使用上の注意

本品は以下のものが適応となる。

＜大腿骨用、脛骨用＞

螺旋骨折、斜骨折、横骨折、蝶型骨折、節状骨折等

＜リコンストラクション用＞

大腿骨転子間骨折、小転子の骨折を伴う大腿骨転子下骨折、大腿骨頸部骨折等

＜大腿骨頸部用＞

大腿骨頸上骨折、大腿骨頸関節内骨折、大腿骨頸部骨折等

【使用方法等】

＜標準的な操作方法＞

適応部位に応じ、適切な製品を選択する。骨折部を整復し、ガイドロッドを近位端（あるいは遠位端）より挿入し、専用ジグを使用し、ネイルの長さを決定する。次に髓腔を適度なサイズまでリーミングし、リーミングしたサイズより細めのネイルを挿入する。

選択したネイルに応じ、適切なスクリューを選択する。製品に応じた専用のジグを使用し、ドリリングを行い、適切な長さのスクリューを挿入する。必要に応じてネイルキャップを使用する。抜去が適切と判断される場合は、骨癒合後に抜去を行う。

本品は以下の製品と併用する場合がある。

販売名	承認番号
トライジェン タンネイル	21300BZY00648000
トライジェン スクリュー	21600BZY00325000
アジアン IMHS	21600BZY00479000
トライジェン メタネイル	22100BZX00094000
トライジェン メタネイル（ティピアル）	22100BZX00093000

本品の使用にあたっては、スミス・アンド・ネフュー株式会社から提供されている取扱説明書を参照すること。

＊【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- 骨折線がスクリューホールから5cm以内にある場合は、ネイルを貫通するスクリューホールの部分に過大なストレスがかかるので、特に術後の注意が必要となる。
- 骨粗鬆症が発生、進行することによってインプラントの緩み、沈み込み、移動が発生する可能性があるため、このような患者は、術後定期的にインプラントの状態をX線検査等で確認すること。
- 重度の粉碎骨折、転位、その他処置の困難な骨折の場合、インプラントが適切に機能しないおそれがあるため慎重に適用すること。

＊2. 重要な基本的注意

＊本品については、試験によるMR安全性評価を実施していない。

●術前

- 本品は滅菌済製品である。使用する前に、滅菌包装に破れ等の破損がないことを確認し、破損等が発見された場合には使用しないこと。また、使用前に製品包装に記載されている使用の期限を確認の上、使用すること。
- インプラントはパッケージ上のラベルとインプラント上の刻印でサイズ等が一致しているのを確認すること。
- 患者の骨のサイズ、性質、一般的な体調、また埋植中の患者の活動レベル、職業その他の一般的な運動を考慮して、適切なサイズのインプラントを選択すること。
- 術前に、本品の効果・危険性について患者に十分な説明を行い、同意を取得した上で使用すること。また、患者が低年齢等の理由のため適切な説明・同意取得を本人に行い得ない場合には、親権者またはそれに代わり得る適切な者の同意を取得すること。
- 本品の取扱いや保管には十分な注意を払うこと。インプラントの切断、折り曲げ、穿孔、表面に傷を付ける等の改ざん行為は、インプラントの強度、疲労耐久性を大幅に低下させインプラントに破損をもたらす原因になるので止めること。
- 手術器械を繰り返し何度も使用したり、力を加えすぎたりすると、破損しやすくなるので、手術器械に摩耗や損傷がないか術前に確認すること。
- 原材料に対するアレルギーまたはその他の過敏症が疑われる患者にはアレルギー反応に関する調査を術前に行い、必要な場合にはテストを行い、当該事象が発生しないように注意すること。
- 治癒の遅延または妨害となるような変性疾患や進行性疾患があり、結果的にインプラントの寿命が低下する疑いがある場合は注意すること。

- インプラントを抜去する可能性及び抜去に際して再手術が必要となることを患者に知らせておく必要がある。
- 術者は、術前に取扱説明書をあらかじめ習熟の上、本品を使用すること。
- 本システムは治癒の補助具であり、正常で無傷の組織または骨の代替品ではない。

●術中

- 患者に対して適切な形態及びサイズのインプラントを選択すること。サイズや挿入位置が不適切である場合、インプラント及び骨の緩み、曲がり、ひび割れ、破損等の原因となる。
- 十分な強度と適合性を得るために、横止めスクリューの使用が必要である。また、ネイルに対して適正なサイズのスクリューを選択する為に、取扱説明書及びカタログを熟読すること。
- 横止めスクリュー挿入時は、スクリューヘッドが骨皮質の適切な位置に達していることをCアーム等で確認しながら挿入すること。
- ネイルキャップ及びスクリューを挿入/抜去するときは、ドライバーでしっかりと把持し真直ぐに挿入/抜去すること。
- 大腿骨頸部骨折の場合、骨折部に圧迫を掛けるためプロキシマルスクリューのネジ山が骨折線に触れないように注意すること。
- 小児の場合、成長が停止するおそれがあるため、骨端線をスクリューで傷つけないこと。
- ガイドロッドは再使用しないこと。

●術後

- 術後の患者指導と適切な看護体制は非常に重要である。術後、極端に早期のうちから荷重をかけると、インプラントへの負担が増し、緩み、曲がり及び破損の危険性が増加する。術後早期に荷重をかけてよいのは、骨折部の骨同士の接触が十分にある安定骨折の場合に限る。肥満もしくは指示を守らない患者、あるいは骨癒合が遅延している場合、癒合不全に陥っている患者に対しては、支持装具の使用が必要になる。場合によっては軟部組織の損傷管理の後、より大きくて強度の高いネイルに交換する必要がある。
- 本品は、たとえ短時間であっても、患者の全体重を支える設計はなされていない。また、想定される荷重であっても、長期に支える設計にはなっていない。荷重の時期と方法に関しては、X線写真等で骨癒合の状態を観察し、慎重に判断すること。
- 術後、歩行もしくは物を持ち上げる際には、他者に支えてもらうか、もしくは支持となるものを利用すること。
- 転子下骨折及び骨切り術後では、筋力力が不均衡であるためにインプラントに極度の力がかかり、インプラント部品の湾曲または破損が起る可能性がある。X線写真でしっかりと骨の結合が確認されるまで骨折部位の安定性を高め、インプラント及び折れた骨に対する内部ストレスを最小限にするために追加の対策及び内部または外部支持具を利用することを推奨する。
- 骨癒合が確認された後でも、インプラントが挿入されている間、また抜去直後の髓内に出来た空洞が完全に骨組織で充填されるまでの間は、再骨折の可能性があることを患者に知らせておく必要がある。
- インプラントの抜去が可能であるか否かの決定を下す際には、十分な骨癒合が確認された時点で行うこと。若くて活動的な患者には勧められるが、高齢者や、衰弱患者の抜去は、滑液包が認められない場合や疼痛がある場合には、避けること。
- 骨や軟部組織の増殖により抜去が困難になる場合がある。抜去する場合は、その時期について慎重に判断すること。
- 抜去時には、侵入している骨を取り除くために十分リーミングを行い、抜去の妨げになる骨がないことを確認した後、抜去すること。抜去ボルトは真直ぐに挿入し、ねじ山をしっかりと噛み合わせる。

3. 相互作用

併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外のインプラント及び他社製インプラント	髓内釘システムとして正しく作動しないおそれがある。	開発コンセプトが異なるため正確に作動しない。
当社が指定する以外の手術器械	手術器械の破損や不適切な設置による術後成績不良が発生するおそれがある。	開発コンセプトが異なるため適切な設置が行えない。
当社が指定する以外の材質の異なるインプラント	腐食による不具合が発生するおそれがある。	異種金属による電気化学的腐食がおきる。

O-O017-003

4. 不具合・有害事象

本品を使用することにより、下記のような不具合、有害事象が発生する可能性がある。

(1) 重大な不具合

- ・術中/術後の本品の緩み、曲がり、ひび割れ、折損、もしくは破損等
- ・骨質や軟部組織等の接触によるネイル、スクリュー、ネイルキャップの挿入困難

(2) 重大な有害事象

- ・癒合不全、偽関節、回転やねじれを伴う変形癒合等による肢長の短縮あるいは解剖的位置からの偏移
- ・本品に由来すると思われるアレルギー反応や金属過敏性反応
- ・深部もしくは表層部の感染
- ・虚血性壊死
- ・ネイル、スクリュー挿入時及び抜去時の骨折
- ・皮膚障害、治癒の遅延
- ・インプラント隣接部のマクロファージを含む組織反応や異物反応
- ・血管、神経、腱及び軟部組織の損傷
- ・手術中の傷、またはスクリュー等の不適当な位置及び長さによる骨の損傷
- ・ガイドピン、スクリューによる骨盤貫通
- ・レトログレードネイルによる顆上骨折
- ・スクリューによる大腿骨骨頭の切り傷、関節貫通
- ・脚長差及びそれによる跛行
- ・手術及びそれに付随する内部固定用装置の使用に起因する血栓性静脈炎、肺塞栓症、創傷血腫及び大腿骨頭の血管壊死等の血管障害
- ・インピンジメント症候群を含む軟部組織の炎症
- ・手術損傷による不顕性神経損傷を含む軟部組織の炎症

5. 高齢者への適用

- ・高齢者は一般に骨量・骨質が十分でないことが多いので、慎重に使用すること。
- ・高齢者は、腎機能、肝機能等の生理機能が低下している場合が多いため、術前、術中、術後の全身管理に特に気をつけること。

6. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

上記の患者に対して、安全性は確立されていないため、治療上の有益性が危険性を上回っている時のみ使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法
高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
2. 使用の期限（自己認証による）
製品包装に記載
3. 有害ガス又は塩分の多い環境での保管は避けること。

※【主要文献及び文献請求先】

スミス・アンド・ネフュー株式会社
電話番号：03-5403-8001

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
スミス・アンド・ネフュー株式会社
電話番号：03-5403-8001
製造業者
Smith & Nephew, Inc. (United States)