

機械器具（30）結紮器及び縫合器
管理医療機器 単回使用縫合糸パサール JMDN 37839002

トランスポーター


再使用禁止

【禁忌・禁止】
【使用方法】
・再使用禁止
・縫合糸を操作する以外の目的で使用しないこと。
【不具合の原因となる。】

【形状・構造及び原理等】

本品は以下の製品リストのいずれかに該当し、梱包されている製品については直接の容器・被包に記載してある。

カタログ番号	製品名
014617	トランスポーター
形状	

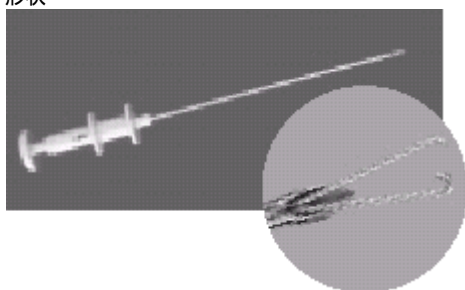

- ・原材料：ステンレス鋼、ナイロン
- ・原理：ハンドル部分のボタンを押すことで先端部を広げ、縫合糸を通し、ボタンを離すことで縫合糸を把持する。

【使用目的又は効果】

トランスポーター：
関節内で断裂した軟組織に縫合糸を通すために使用する。

【使用方法等】

ハンドル部分のボタンを押すことで先端部分が広がり、ボタンを離すことで先端部が閉じる。ハンドル部分のボタンを押した状態で先端部分を広げ、その中に縫合糸を通す。縫合糸が先端部分に完全に通ったことを確認したらボタンを離し、先端部分を閉じ縫合糸を把持し操作する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 専門医の監視指導下でのみ使用すること。
- (2) 本品は滅菌済製品であり、開封は使用直前に包装が破損していないか確認を行うと同時に、無菌的に取り扱うこと。破損がある場合は使用しないこと。
- (3) 本品はディスポーザブルのため一回限りの使用で再滅菌・再使用はしないこと。
- (4) 開封後未使用のものを再滅菌して使用しないこと。使用しなかった場合でも廃棄すること。
- (5) 使用前に滅菌包装に記載されている滅菌期限を必ず確認すること。
- (6) 使用前に、破損・変形が無いか、また適切に機能するか

どうかを確認すること。破損等が確認された場合は使用しないこと。

- (7) 【使用目的又は効果】欄の記載内容以外の用途で使用しないこと。
- (8) 破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の力を加えないこと。使用後は、直ちに破損・折損がなかったかを点検すること。
- (9) 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

2. 不具合・有害事象

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。

- (1) 不具合
 - ・ 過大な力を加えたことによる製品の破損
- (2) 有害事象
 - ・ 神経、血管及び組織の損傷
 - ・ 感染症や壊死
 - ・ 金属への過敏反応

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- ・ 滅菌保証期限は外箱に表示してある。
(自己認証による)

*【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

スミス・アンド・ネフュー株式会社
電話番号：03-5403-8671
(外国製造業者)

Smith & Nephew Inc., Endoscopy Division, Mansfield MA
United States