

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科矯正用バンドプッシャー
JMDN コード：31801000

ixion™ バンドプッシャー


【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞

1. ニッケル及びクロムに対し発疹や皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 原材料：ステンレススチール
2. 形状：代表的なものを下図に示す。

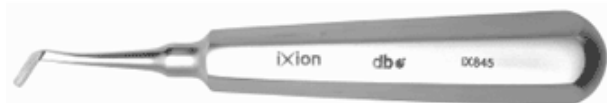

【使用目的又は効果】

金属帯環を歯の位置に合わせ、適合させるために用いる。

【使用方法等】

1. 使用前に滅菌済みであることを確認する。
2. 本品の先端部を金属帯環にあてがい、歯の位置に合わせて適合させる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 本品にはニッケル及びクロムが含まれる。ごく少数ではあるが、これらの成分に対してアレルギー反応を起こす場合がある。アレルギー反応が生じた場合は、患者に医師の診断を受けるように指示すること。
2. その他の注意
 - 1) 未滅菌の状態で納品されるので、使用前に必ず滅菌すること。
 - 2) 使用前に必ず洗浄・滅菌（【保守・点検に係る事項】参照）をすること。
 - 4) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液に浸漬すること。
 - 5) 破損、欠け、脱落、曲がりの原因となるため、使用時に必要以上の力を加えないこと。
 - 6) 頻繁に使用する場合は、6 ヶ月ごとに点検整備すること。
 - 7) 【保管方法及び有効期間等】に記載されていない保管方法による製品の劣化、又は不具合の発生は、全て術者の責任となる。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

1. 貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥後、乾いた場所に保管すること。
2. 洗浄・滅菌済みの本品を貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐために清潔な場所に保管をすること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり等に異常がないか点検をすること。
2. 使用後は、直ちに洗浄液に浸漬して血液、体液、組織等の付着物を除去し、感染防止のために洗浄・滅菌すること。
3. 汚染除去に用いる洗浄液は、pH が中性の洗剤もしくは溶液を、適正な濃度で使用すること。

〔洗浄〕

4. 洗浄前に、余分な油分は使い捨てのペーパータオルでふき取ること。
5. 洗浄は中性洗剤もしくは溶液を用いてブラシをかけ、本品の表面および接合部を十分行うこと。
6. 洗浄後は清潔な流水で3分間すすぎ洗いし、腐食防止のために、直ちに乾燥すること。
7. 自動洗浄機を使用する場合は、医療用器具等に適した洗浄機を使用すること。
8. 自動洗浄後、本品に損傷もしくは腐食がないか確認すること。

〔滅菌〕

9. 複数の本品等の金属製品を滅菌する場合には、損傷の原因になることもあるので、互いに接触しないように注意すること。
10. 温度は160℃を超えないようにすること。
11. 滅菌器メーカーの指示に従って、滅菌器内に本品を配置すること。

〔その他〕

12. 超音波洗浄器を使用する場合は、洗浄器メーカーや洗剤メーカーの使用説明書に従って使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：ソルベントマイノベーション株式会社

TEL：0120-296-303（カスタマーコールセンター）

ixion は DB Orthodontics Ltd の商標です。