

エコーメイト

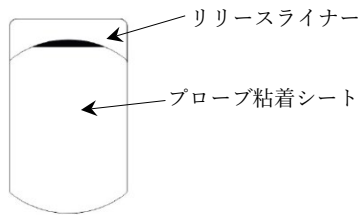
再使用禁止

【禁忌・禁止】

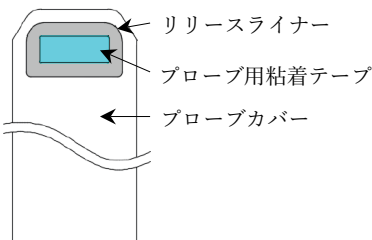
＜使用方法＞
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】**＜構造図＞****a.粘着シートタイプ**

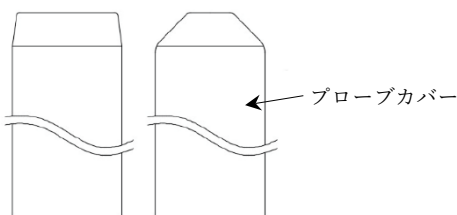
未滅菌製品(a-1)と滅菌製品(a-2)がある。

**b.粘着カバータイプ**

固定用テープ、弾性バンド、ゲルを同梱、滅菌した製品である。

**c.3D カバータイプ**

固定用テープ、弾性バンド、ゲルを同梱、滅菌した製品である。

**【使用目的又は効果】****＜使用目的＞**

本品は、体表面で使用する場合、超音波プローブに装着し、体液、汚れ等から保護するために用いる。

【使用方法等】**＜準備＞**

1. パッケージの破損等がないことを確認して使用します。
2. 本品の機能性及び外観に異常がないことを確認して使用します。

＜使用方法＞**a.粘着シートタイプ**

1. プローブ粘着シートを取り出します。
2. プローブ粘着シートのリリースライナーをはがし、粘着面が汚染されないように注意します。
3. 片手でプローブをしっかり保持し、もう片方の手で粘着シートをプローブ先端面に位置を合わせます。
4. プローブに接着していない部分をしっかりと巻き付け、全体を覆うようにします。
5. 気泡やしわをなめらかに伸ばし、密着させます。
6. プローブ先端面にゲルを塗布し、スキャンを開始します。

b.粘着カバータイプ

1. プローブカバーを取り出します。
2. プローブカバーの接着面が外側になるように開放し、リリースライナーをはがし、粘着面を露出させます。
3. プローブの先端面にプローブ粘着テープ部分を密着させます。
4. 気泡やしわをなめらかに伸ばします。
5. プローブカバーを固定用テープもしくは弾性バンドで固定します。
6. プローブ先端面にゲルを塗布し、スキャンを開始します。

c.3D カバータイプ

1. プローブカバーを取り出します。
2. プローブの先端面にゲルを充填し、プローブカバーで覆い、密着させます。
3. プローブカバーを固定用テープもしくは弾性バンドで固定します。
4. ゲルを塗布し、スキャンを開始します。

【使用上の注意】**＜重要な基本的注意＞**

1. 包装が開封、破損、汚損等の異常が認められるものや使用期限を過ぎたものは使用しないこと。
2. 固定用テープや弾性バンドは、ずれ等が生じないようにしっかりと固定すること。

＜不具合＞

- ・接着面のはがれ、ずれ
- ・プローブカバーの穴や傷、外れ、緩み

【保管方法及び有効期間等】**＜保管方法＞**

- ・水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避け保管すること（運搬時を含む）。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する所を避けて保管すること。

＜有効期間＞

包装ラベル表示を参照すること(自己認証による)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 ストラタジェム合同会社

TEL：050-3647-1133

外国製造業者 Shenzhen Rising Medical Co., Ltd.

(中華人民共和国)