

* 2026 年 10 月改訂 (第 2 版)
2023 年 12 月作成 (第 1 版)

機械器具 24 知覚検査又は運動機能検査用器具
一般医療機器 体表面電気刺激装置用電極 34374001

スティムポッド EMG 電極

再使用禁止

【禁忌・禁止】

併用医療機器

1. 磁気共鳴画像診断装置 (MRI 装置) と併用しないこと。[相互作用の項参照]


使用方法

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状又は構造

図 1：EMG 電極

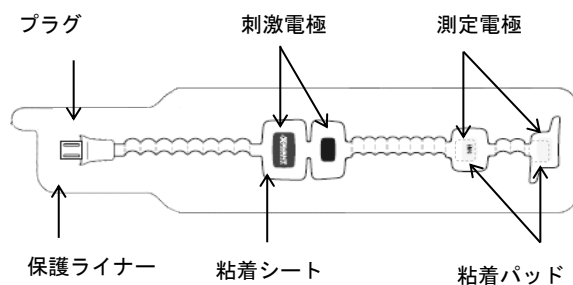

2. 原材料

ハイドロゲル、医療用粘着剤

【使用目的又は効果】

神経組織に電流を流すため体表面に用いる導体である。陽極と陰極の両方を備えている。

【使用方法等】

1. 使用前に患者の測定部位を清拭し、十分に乾燥させる。
2. 個包装の切込みから包装を開け、電極を取り出す。
3. 電極から保護ライナーを剥がす。
4. 測定部位に電極を貼付し、粘着シート部分を上から軽く押さえ皮膚に密着させる。
5. プラグをモニターケーブルに接続する。

使用方法等に関連する使用上の注意

1. 電極を貼付する前に患部を清拭し、電極と皮膚の接触に悪影響を与える可能性のある要素（例：汚れ、髪、油等）を取り除くこと。
2. 損傷した電極を使用した場合、電流密度が大きくなり火傷等を引き起こすおそれがある。

【使用上の注意】

相互作用（他の医薬品、医療機器等との併用に関すること）
併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置 (MRI 装置)	併用不可	MRI 装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こるおそれがある。

妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

1. 妊娠中の患者には医師の判断により安全と判断された場合のみ使用すること。[妊婦に対する安全性と有効性は確立していない]

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

保管温度：10～30℃

有効期間

包装に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

泉工医科工業株式会社

製造業者

* メドカー メディカル エレクトロニック テック (シンセン) 社
(Medker Medical Electronic Tech (Shenzhen) Co., Ltd)

* 国名：中国

お問い合わせ先

泉工医科工業株式会社 商品企画本部

* TEL 03-4283-1005

* URL <https://www.mera.co.jp/>