

**2017年9月（第10版）

*2016年9月（第9版）

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル 70306000

フルーテッド ラウンド スパイラル ドレーン

再使用禁止

【警告】

- 本品の体液採取部（溝がついた部分）は必ず完全に皮下に留置し、体表上に出さないこと。[吸引不良の原因になり治癒遅延や感染を引き起こすおそれがある。]
- ドレーンチューブに穴を追加する等の加工を施さないこと。
- トロッカー針穿刺の際は、血管や組織の損傷に注意すること。[針が鋭利なため、血管や組織に損傷を与えるおそれがある。]
- 皮膚等に固定する際は、針や鋭利な器具でドレーンチューブを傷つけないこと。
- 本品の留置の際は、ドレーンチューブ引き出し経路の周囲の気密性を確保するため、皮下及び筋層を這わせること。[皮下の這わせが不十分であると挿入部からのリーク及び感染の危険性がある。]
- 固定の糸を過度に固く締めすぎないこと。[ドレーンチューブを傷つけたり、狭窄、破断の原因になるため。]
- 患者に複数のドレーンチューブを挿入している場合は、刺入部と接続部をたどって確認すること。[間違ったドレーンチューブへの接続を防ぐため。]
- ドレーンチューブを過度に曲げないこと。[キンクすると、挿入部からのリークや吸引不良の危険性がある。]
- 血腫を形成させないために十分な吸引を行うこと。[治癒遅延や感染を引き起こすおそれがある。]
- ミルキングを行う際には、酒精綿（アルコール綿）を使用しないこと。[アルコール等との接触により強度が低下して破断するおそれがあるため。]
- ドレーンチューブの抜去は吸引を中止してから、必ず手で行うこと。[鉗子等の使用はドレーンチューブを破損するおそれがある。]
- ドレーンチューブを抜去した時に、本品に欠損がないことを確認すること。[体内に破片等が残留している可能性がないことを確認するため。]
- 低圧持続吸引器具に接続するときは適切なコネクタを利用し、必要場合はバンディングやテーピング等を加えリークがない事を確認すること。[吸引不良の原因になり治癒遅延や感染を引き起こすおそれがある。]
- ドレーンチューブが閉塞しない様、常に回路内を観察すること。

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止
- 本品は気道・気管・腎ろう・膀胱ろう・尿路用カテーテルに適用しない。
- 吸引圧は 80kPa 以下にすること。
- ドレーンチューブと有機溶剤を接触させないこと。[アルコールを含む消毒剤や有機溶剤に接触すると、強度が低下して破断するおそれがある。]


*【形状・構造及び原理等】

<構成品>

- スパイラルドレーン




体液採取部断面図

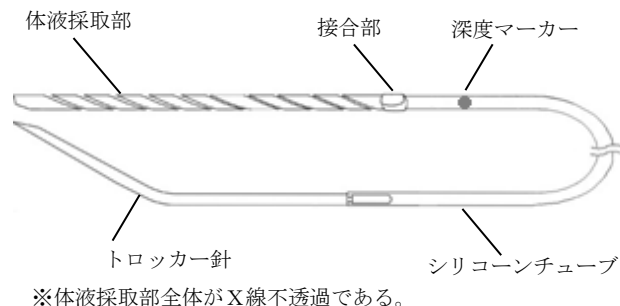


・スマートドレーン



体液採取部断面図

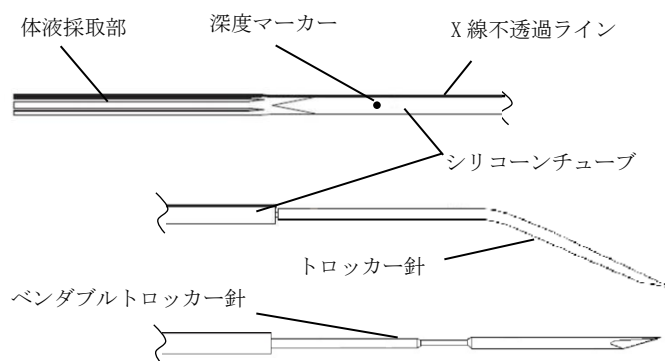


**・コアクシャル

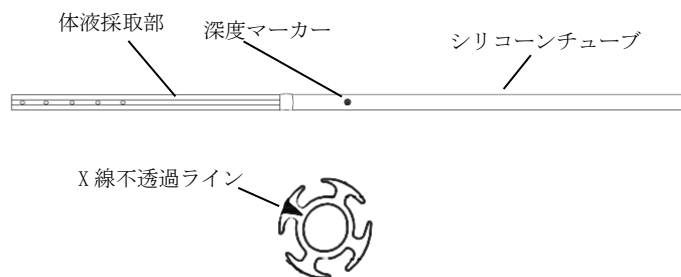

体液採取部断面図

<付属品>

・コネクタ

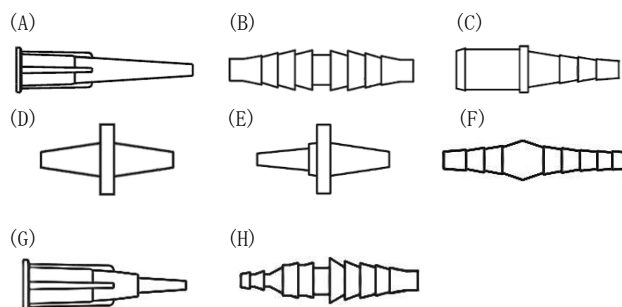

取扱説明書を必ずご参照下さい

<作動原理>

体液採取部及びチューブの一部を体内に留置、体外側のチューブ端に陰圧を加えることにより、体液採取部から体液を採取し、体外へ排出する。

【使用目的又は効果】

体内に留置し、陰圧により、体内の液体又は気体を体外に排出する。

【使用方法等】

1. 使用の準備

- (1) ドレーンチューブを留置する前に、必要となる種類、部位及び適切なサイズを選択すること。
- (2) 無菌的操作により、ドレーンチューブを包装より慎重に取り出すこと。
- (3) 販売名「シリコン リザーバー」(届出番号: 13B1X00078090005)等の低圧持続吸引器具を用意すること。尚、使用前には必ず低圧持続吸引器具の添付文書を熟読すること。

2. 使用中

- (1) 生理食塩水で創部を洗浄し、組織片や凝血塊を吸引する。
- (2) 無菌的操作により創部にドレーンチューブを挿入、針付の場合はトロッカー針(キャップは使用前に外し、使用後は直ちにキャップをはめる)、針なしの場合は剥離鉗子を使用して手術創部近傍の皮下側から体表側へ貫通させ体外へ引き出す。ベンダブルトロッカーにより穿刺する場合は、あらかじめ針先にキャップの付いた状態で適当な角度に曲げを調節する。1度ベンダブルトロッカーの角度調整が決まったら、繰り返しベンダブルトロッカーを曲げないこと。
- (3) 本品の留置の際は、ドレーンチューブ引き出し経路の周囲の気密性を確保するため、皮下及び筋層を這わせること。
- (4) 針付の場合はトロッカー針とドレーンチューブを切り離した後、深度マーカを目安としてドレーンチューブを創部の適切な位置に留置する。
- (5) 必要に応じてドレーンチューブを適切な長さに切除する。
- (6) 縫合、又はテーピングにより、ドレーンチューブを固定する。この時、固定の糸を過度に固く締めすぎないこと。
- (7) 販売名「シリコン リザーバー」(届出番号: 13B1X00078090005)等の低圧持続吸引器具に接続し、ドレナージを開始する。
- (8) 販売名「シリコン リザーバー」(届出番号: 13B1X00078090005)は創部よりも低い位置に設置すること。

3. 使用後

- (1) 抜去時は吸引を中止した後に、必ず手でゆっくりと抜去すること。
- (2) 抜去後、適切な創傷被覆材・保護材により、ドレナージをしていた体表面の創部を保護すること。
- (3) 本品は単回使用製品であるため、使用後は直ちに廃棄すること。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 本品は一回限りの使用で再使用しないこと。また滅菌袋を開封した未使用の本品を再滅菌して使用しないこと。
2. 全ての構成品が封入されていることを確認すること。
3. ドレーンチューブ挿入前に、挿入部位を確認し適切なサイズを選択すること。
4. コネクタを使用する際は付属品もしくは販売名「ドレーンコネクターY」(届出番号: 13B1X00078090034)、販売名「メラコネクター付接続管」(届出番号: 11B1X00016000002)、販売名「メラドレーンコネクター及び接続管」(届出番号: 11B1X00016000227)を使用すること。
5. 本品は厳格な無菌的操作の下で使用すること。

6. 留置中は本品の折れ、潰れ、ねじれ等のないことを適宜確認すること。ドレナージ不良となる可能性がある。
7. ドレーンチューブの留置期間は28日を限度とする。
8. ドレーンチューブを長期間留置した場合、抜きし難い場合があるので注意すること。
9. 手術創の排液が十分排出されずに血腫が形成されるおそれを回避するために、適切な吸引を行うこと。
10. 接続部からの漏出に注意すること。
11. ドレーンチューブを留置する際は、臓器及びドレーンチューブに過度の負担がかからないようにすること。
12. ドレーンチューブの破損や断裂を避けるため、下記の点に注意すること。
 - ー ドレーンチューブに縫合針を刺し通し、縫合しないこと。
 - ー 排液の流れが妨げられないように、刺入部から外のドレーンチューブをキンクさせないように固定すること。
 - ー ドレーンチューブを留置する際は、スムーズに抜去できる事を考慮して留置すること。
 - ー ドレーンチューブを抜去する際は、先の尖った鋭利な器具等の使用は避け、手で優しく抜去すること。
13. 患者からの排液でドレーンチューブが閉塞していないか定期的に観察し、ミルキング等を行い閉塞がないようにすること。
14. ミルキングを行う際には、金属製のローラー鉗子などで過度にしごかない等慎重に行うこと。シリコンドレーン専用の販売名「ミルキングローラー」(届出番号: 11B1X00016000231)を使用するか、オリーブ油等の潤滑剤を塗布し、手動的に慎重に行うことで、より安全にかつ効果的にミルキングすることができる。
15. ドレーンチューブは、アルコール等との接触により強度が低下して破断するおそれがあるため、酒精綿(アルコール綿)等を使用したミルキングは行わないこと。
16. ドレーンチューブを留置する際は、臓器や血管を圧迫する位置には留置しないこと。[留置したドレーンチューブが臓器や血管を圧迫し続けることにより、臓器損傷又は血管損傷を引き起こす可能性があるため。]
17. 本品に関して不明な点は【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】の「お問合せ先」まで問い合わせること。

【保管方法及び有効期間等】

*<保管の条件>

直射日光、高温多湿、殺菌灯等の紫外線及び水濡れを避け、室温にて保管すること。

<使用期限>

包装に記載の使用期限を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】 泉工医科貿易株式会社

【製造元】 REDAX S.p.A.
レダックス エスピーエー社
イタリア

【お問合せ先】 泉工医科工業株式会社 商品企画
TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011