

機械器具 (32) 医療用吸引器
一般医療機器 吸引器用ボトル 38476000

セパレート吸引瓶

【禁忌・禁止】

- ・医療用吸引以外の用途には使用しないこと。
- ・改造を行わないこと。


【操作方法又は使用方法等】

1.使用する時は、瓶内に少量の薬液又は水を入れる。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・使用する前にホースやアダプターが確実に接続されている事を確認すること。

【形状・構造及び原理等】

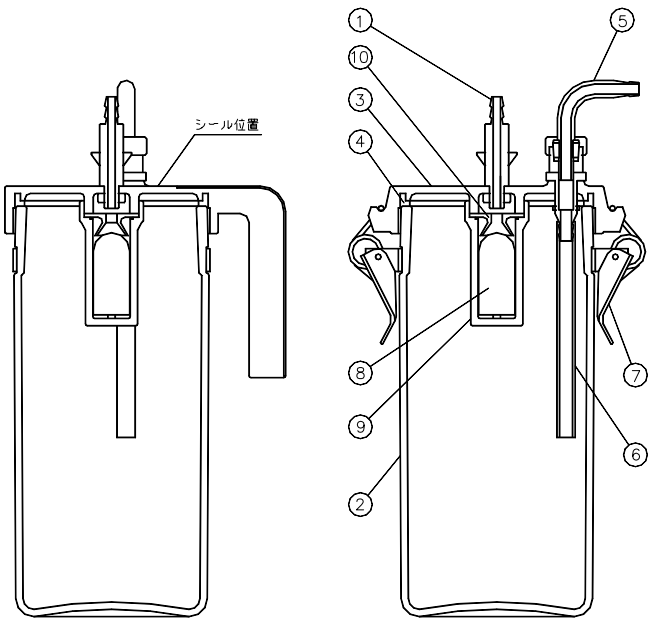

【使用上の注意】

- ・吸引ホースの先に、適正なカテーテルを取付けて使用すること。
- ・使用する前に、吸引ホース等が適切に接続されていることを確認すること。
- ・瓶内のフロートはオーバーフロー防止であるので、常時清潔にすること。
- ・瓶内の汚物は、充満しないうちに捨てること。
- ・キャップには、必ずホースを接続すること。接続せずに使用すると、汚物がフロートに付着して機能なくなり、配管に流入するおそれがある。
- ・ベッドの頭部付近にセットする場合、患者さんが瓶等に当たらない様に注意すること。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法：貯蔵に当っては、常温、常湿にて直射日光を避けて貯蔵のこと。保管するときは、必ず消毒を行い、乾燥させてからビニール袋に入れる等、ごみ、ほこりが付かない様にして保管すること。


有効期限・使用の期限：製造月から5年【自己認証】

ただし、Oリング、パッキン等のシール部品は劣化するので、随時交換の必要がある。

尚、本期限は、標準的耐久期間であり、保証の期間ではない。

製造年月は本体シールに記載（上位二桁で表される）

シール表示例

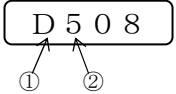

2008年5月製造

①年表示 アルファベットにて、製造年を表す。
(但し、IとOは使用しない)

例 D 2008年
E 2009年
F 2010年
G 2011年

②月表示 1～9,X,Y,Zにて、1～12の製造月を表す。

例 9 9月
X 10月
Y 11月
Z 12月

1	ホース口	6	ホース
2	瓶	7	クランプ金具
3	キャップ	8	フロート
4	パッキン	9	フロート受け
5	吸引ホース接続口	10	逆止ストッパー

原理

ホース口に接続された陰圧源により吸引された汚物を瓶内に貯留し、汚物が充満するとフロートが押し上げられ、空気の流れを塞ぎ吸引をストップする。

【使用目的、効能又は効果】

ガラス又はプラスチック製で、トップ又はふたによって密閉でき、体液の回収のために吸引器とともに使用する用具をいう。

【品目使用等】

性能

瓶容量 1200 ml

【保守・点検に係る事項】

- ・洗浄、消毒をする場合、高温・高圧を加えないこと。
 - ・洗浄・消毒を行うときは、樹脂製の部分が洗剤や消毒液の種類によって劣化・損傷するおそれがあるので注意すること。
- 〔使用者による保守点検事項〕
- ・日常点検で以下の事を点検すること。
 1. 瓶の上縁、キャップのパッキンに傷、亀裂はないか、脱着はよいか。
 2. フロートの上昇による汚物逆流防止のストッパー機能は正常か。
 3. 瓶は清潔か。
 4. 正規の瓶を使用しているか。
- 〔業者による保守点検事項〕＊
- ・定期点検で以下の事を点検すること。（1年点検）
 1. 気密検査
 - 10・・20・・30kPa の 3 点に合わせ気密試験を行い、洩れが無いことを確認する。
 2. 逆流防止機能の検査
 - フロートがフロート受け面に密着したときに洩れが無いことを確認する。
 - ・検査設備・装置
 1. 気密試験装置
 2. 吸引供給設備
 3. 基準圧力計

【包装】

- ・1台／箱
同梱付属品：バスケット×1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社 セントラル ユニ
北九州市小倉南区舞ヶ丘 5 丁目 1-1
TEL (093) 963-8390

製造業者：株式会社 セントラルユニ 小倉工場