

機械器具（２４）知覚検査又は運動機能検査用器具
一般医療機器 体表面筋電計電極 11441001

ディスプレイブルアース電極

（品名・品番：ディスプレイブルアース電極 45400-SK）

【再使用禁止】

【禁忌・禁止】

- 本電極はディスプレイブル製品（単回使用）であり、再使用禁止。
- 磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）と併用しないこと。[誘電起電力による局所的な発熱で被験者が火傷を負う恐れがあるため。]
- 本電極使用前に必ず包装及び製品の外観の点検を行い、汚損、破損、変形等の異常があった場合は使用禁止。


【形状・構造及び原理等】

1. 外観図・構造図及び外形寸法

外観図

表面図

側面図

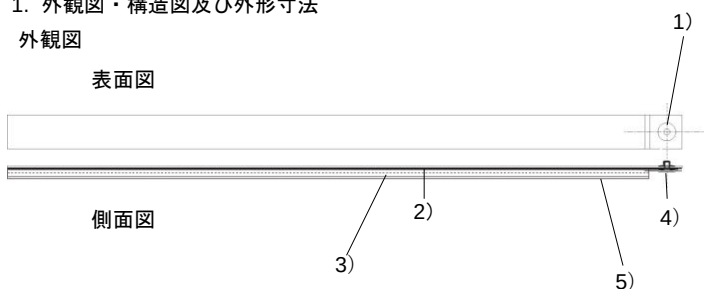

電極寸法：長さ 400mm×幅 20mm

- 1) 電極端子部（ステンレスナット／銀コーティング 素子）
- 2) 銀/塩化銀コーティングフィルム（ポリエステル）
- 3) 導電性ゲル（皮膚接触側）
- 4) マスキングテープ（ポリエチレン不織布粘着材）
- 5) 保護フィルム

製品コード	個数	梱包
45400-SK	5 本	5 本／1 シート、5 本／1 袋

【使用目的又は効果】

体表面において、筋肉又は神経組織内の生体電気信号を検知する導体をいう。本品によって感知された電気活動を記録する一般的な装置は、筋電計（EMG）である。

【使用方法等】

1. 本品を接続して使用する装置の取扱説明書などを参照して、本電極の装着部位を決定します。
2. 貼付部位を酒精綿で清浄にしてください。体毛が多い場合は、剃ってください。又、汗や水分が残っているときは電極を良く貼り付けることが出来ませんので、乾いたガーゼ、脱脂綿などで充分に拭き取ります。
3. アルミ包装を開封し、本品を取り出してください。
4. 電極端子部をつまみ、電極 1 本を取り出します。
5. ゲル部分の透明な保護フィルムを剥がして使用ください。
6. 前処理をした貼付部位に電極を貼付し、本品の上からおさえつけて皮膚に密着させます。
7. 被験者に電極を貼付後電極端子部にコードを接続してください。
8. 電極を剥がす際は、皮膚の損傷を最小限に抑える為に、皮膚を下に押さえ電極の端からゆっくりと剥がしてください。

【使用上の注意】

1. 相互作用

- 1) 磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）と併用しないでください。
[MRI 装置に吸引されるおそれがあります。また、誘電起電力による局所的な発熱で被験者が火傷を負う恐れがあります。]
- 2) 他の型式の電極と一緒に使用すると、安定した波形を得られないことがあります。

2. その他の注意

- 1) 皮膚疾患や、創傷のある部位には貼付しないでください。
- 2) 腹臥位で使用する場合は、圧迫のかからない部位に貼付してください。
- 3) 本電極を無理に曲げたり折ったり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしないでください。
- 4) 開封したアルミ袋は袋の端を折り曲げ、未使用の電極が劣化しない様に注意し、早めに使用してください。
- 5) 皮膚に、発赤などの症状が現れるような場合には使用を中止してください。営業担当員にご連絡ください。
- 6) 当社指定以外の装置に起因する故障等は、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 7) 本製品は、滅菌できません。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 1) 直射日光、高温、高湿を避け涼しい場所に保管してください。
- 2) 極端な低温下、または温度変化の激しい場所での保管は避けてください。
- 3) ほこりの多い場所に保管することは避けてください。
- 4) 薬品の蒸気の発散している空気中や、薬品にふれる場所に保管することは避けてください。

2. 有効期間・使用の期限

- 1) 有効期間は製造年月日より 1 年間で、GS 1-128 ラベルに記載しています。
ただし、未開封、未使用の場合でも、保管状況により差異が生じることがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：積水化成工業株式会社

住所 : 〒300-0421 茨城県稲敷郡美浦村大字木原 1876-22
TEL : 029-885-1251

販売元業者名：GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

本社住所 : 〒191-8503
東京都日野市旭が丘 4 丁目 7 番地の 127

お問い合わせ先 : 消耗品受注センター

TEL 0120-187-855
FAX 042-582-6923