

*2020 年 11 月改訂(第 2 版)
2018 年 8 月作成(第 1 版)

届出番号:13B1X00089011001

機械器具(30) 結紮器及び縫合器
一般医療機器 縫合糸ガイド JMDN コード:36129000

Surge スーチャーガイド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者:センチュリーメディカル株式会社


〒141-8588 東京都品川区大崎一丁目 11 番 2 号

電話 番 号:03-3491-1095

ファックス番号:03-3491-1157

【形状・構造及び原理等】

スーチャーガイド

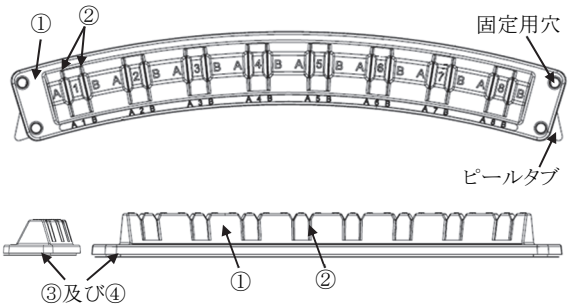

	名称	機能
①	ベース	本体
②	糸挿入部	縫合糸を把持するスリット
③	接着シール	本品を開放創周辺に固定するシール
④	ライナー紙	ピールタブを有し、使用前まで接着シールの接着成分を保護する

【使用目的又は効果】

本品は、外科医の縫合の位置決めを容易にするために開放創の上に配置する器具であり、縫合糸を整理し把持する。

【使用方法等】

- 滅菌包装を開封し、本品を清潔域に取り出す。
- 本品の両端にある固定用穴に布鉗子等を差し入れるか、もしくは本品の接着シールを用いて本品を開放創周辺等に固定する。
- 本品に表示の英数字をガイドとして、縫合糸等を糸挿入部で一時的に把持する。

【使用上の注意】

- 不具合・有害事象
重大な不具合
破損

【保管方法及び有効期間等】

- 保管の条件
高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて保管すること。
- 有効期間
本品の外箱の表示ラベルに記載。