

医療用品 (04) 整形用品  
管理医療機器 自家植皮拡張器 JMDN コード:70443002

## Humeca メッシャー用キャリア


再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。

### 【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等(代表例)

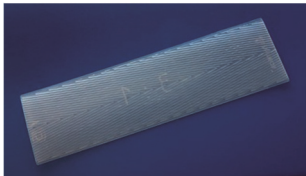

原材料:ポリプロピレン

2. 原理

本品は皮膚移植組織を載せた状態で併用するメッシャーに取り付けて使用することで皮膚移植組織にメッシュ状の切り込みを入れることができる。本品の形状により皮膚移植組織への切り込みの長さや位置が選択可能であり、メッシュ拡張率を調節できる。

### 【使用目的又は効果】

皮膚移植組織にメッシュ状の切り込みを入れ拡張するために使用する。

### 【使用方法等】

＜使用方法＞

- (1) 移植皮膚組織を本品の凸面に広げる。

**【注意】** 厚さ 1mm 以上の皮膚移植組織は本品に使用しないこと。

- (2) 移植皮膚組織を載せた面を上向きにして本品をメッシャーに設置し、移植皮膚組織にメッシュ状の切り込みを入れる。
- (3) メッシャーから本品を取り出す。
- (4) 鉗子等で本品から網目状に拡大された皮膚移植組織を静かに取り出し、創傷に適用する。

＜組み合わせて使用する医療機器＞

| 販売名          | 届出番号             |
|--------------|------------------|
| Humeca メッシャー | 13B1X00089041001 |

### 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 機器が故障するおそれがあるため本品は弊社が指定した製品以外に装着し使用しないこと。(【使用方法等】の＜組み合わせて使用する医療機器＞の項参照)

2. 不具合・有害事象

- (1) その他の不具合  
・破損

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

高温、多湿、水濡れ、及び直射日光を避けて保管すること。

2. 有効期間

本品の外箱の表示ラベルに記載。[自己認証による。]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: センチュリーメディカル株式会社

電話番号: 03-3491-2064

FAX 番号: 03-3491-1857

製 造 業 者: ヒューメカ社

Humeca B.V.

国名: オランダ