

機械器具(21) 内臓機能検査用器具  
一般医療機器 再使用可能な心電用電極 42489000

## エクストレース

### 【禁忌・禁止】\*\*

#### <使用方法>

1. エクスゲルパッドは単回使用です。再使用しないで下さい。
2. 蒸気滅菌や放射線滅菌及びエチレンオキサイトガス滅菌は、絶対に行なわないで下さい。

#### <併用医療機器> 「相互作用の項参照」

1. 磁気共鳴画像診断装置（MRI）環境下では、使用しないで下さい。


### 【形状・構造及び原理等】\*

型式：EXG-C10（EX-150/4、EX-150/6、エクスゲルパッド）

※上記標準規格以外の組み合わせをする場合もあります。


| エクスセンサー  | ケーブル長 [mm] |      |      |      |      |      |
|----------|------------|------|------|------|------|------|
|          | 赤          | 黄    | 緑    | 黒    | 茶    | 紫    |
| EX-150/4 | 1500       | 1500 | 1500 | 1500 | —    | —    |
| EX-150/6 | 1500       | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

EX-150/6

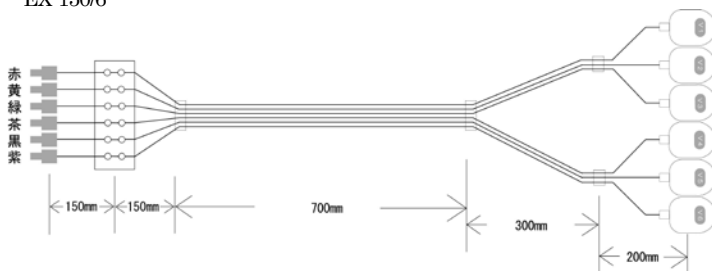

1.5mmDINコネクタ：ABS樹脂 カarbonリード線：カーボン 被覆：PVC  
電極部：銀・塩化銀塗布カーボンフィルム

### エクスゲルパッド(電極パッド)

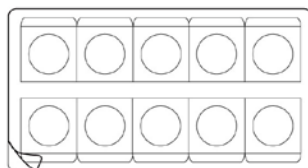

ゲル：アクリル系樹脂架橋体、添加剤、  
多価アルコール、電解質中性塩類  
バックিং：PET フィルム  
ライナー（ゲル側）：PET フィルム  
ライナー（バック側）：PE フィルム

### 適用機種

1.5mmDINコネクタが接続できる装置に使用して下さい。電極パッドはエクスゲルパッドのみ使用できます。

### 【使用目的又は効果】

体表に設置する導体です。（通常、ベルトで固定し、コンタクトゲルを使用する）。体表の電気信号を処理装置（心臓の電気活動をグラフで表示する）に伝達します。この電気活動を記録する一般的な装置は、心電計（ECG）です。本品は再使用可能です。

### 【使用方法等】

1. エクスセンサーを袋から取り出し破損等がないか確認してください。
2. エクスゲルパッドの中央ゲル面に、エクスセンサーを貼り付けます。
3. リード線が絡まっていないことを確認します。
4. 1.5mmDINコネクタを相互性のあるモニタに接続します。

### 【使用上の注意】\*\*

#### 重要な基本的注意

- ・ リード線を強く引っ張ったり曲げたりしないで下さい。断線の原因となります。
- ・ 使用中患者さんの過度な動きによってデータに影響が出る場合があります。
- ・ エクスゲルパッドのライナー（バック側）を剥がす際、中央のゲル面には触れないで下さい。接着力の低下やノイズの原因となります。
- ・ 装着部位に発赤・膨張などの過敏症状が稀に現れることがあります。このような場合は、使用を中止して下さい。

### 相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

#### 1. 併用禁忌（併用しないこと）

| 医療機器の名称等           | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子                |
|--------------------|-----------|------------------------|
| 磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置） | 使用禁止      | 誘導起電力による発熱で熱傷を負うことがある。 |

#### 2. 併用注意（併用に注意すること）

除細動を行う際は、患者の胸部に装着した電極からなるべく離して通電して下さい。接触の恐れがある場合は、電極を取り除いてください。  
※除細動のパドルがゲルパッドやリード線に触れると、熱傷を生じる可能性があります。

### 【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて保管して下さい。

使用期限：エクスゲルパッドは、製造日より2年間有効[自己認証（当社データ）により設定]

耐用期間：エクスセンサーは消耗品です。断線した場合は、新しい製品と交換してください。エクスゲルパッドは単回使用です。

### 【保守点検に係る事項】

- ・ 本品の消毒を行なう際は必ずモニタから取り外して下さい。
- ・ 本品は、蒸気・エチレンオキサイトガス滅菌や放射線滅菌はしないでください。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】\*\*

製造販売業者及び製造業者：株式会社センステック

TEL 04-7128-6023