

カルテット

(条件付 MRI 対応)

再使用禁止

【警告】

＜MRI 検査について＞

1. MRI 検査の実施にあたっては、本品と接続される条件付 MRI 対応除細動機能付き植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ等の添付文書の【使用方法等】「MRI 検査を行うための条件」を満たす場合のみ、実施可能である。[患者への重篤な健康被害、又は本システムの損傷を引き起こす可能性がある。]

2. MRI 検査は、関連学会の定める施設基準を満たす施設で、実施条件を満たす場合に実施可能である。

3. MRI 検査を行うための条件について、患者に対する教育を徹底すること。

*＜使用方法＞

- 植込み中及び試験中は、電池駆動器具を使用するよう推奨する。[交流電流によって細動が誘発される可能性がある。]
- 交流電源を使用している装置を患者の至近距離で使用するときは、適切な接地を行うこと。[患者が感電する可能性がある。]
- 交流電源を使用している装置を患者の至近距離で使用するときは、コネクタピンを絶縁すること。[患者が感電する可能性がある。]
- リードの試験は不測の事態に備え慎重に行うこと。
- 交流電源を使用している装置(プログラマ、ペーシングシステムアナライザ、除細動器等)を患者の至近距離で使用しなければならないときは、接続したすべての装置、患者に接続されているケーブル類及び患者との間に漏れ電流が生じないようにすること。[マイクロショックにより心室細動を引き起こすおそれがある。]
- 本品の植込み等に際しては、以下の点に注意すること。[操作手技によっては、心穿孔、心タンポナーデ、気胸、血胸、冠状静脈解離などが起こる可能性がある。]
 - 冠状静脈への無理な挿入は避けること。
 - 一度留置された本体に不用意な外力をかけないこと。
- 本体は、心室壁の厚みのない部位に留置する場合は注意すること。[患者の心室壁及び冠状静脈の状態によっては、術後に、心穿孔、心タンポナーデ、気胸、血胸、冠状静脈解離などが起こる可能性がある。]

【禁忌・禁止】

*＜適用対象(患者)＞

- 三尖弁に疾患を持つ患者。[弁機能に悪影響を与える可能性がある。]
- 三尖弁を機械弁に置換した患者。[本体及び弁機能に障害をもたらす可能性がある。]
- 重篤な梗塞のある患者。[心穿孔あるいは重篤な不整脈を引き起こす可能性がある。]
- 1 回量 1mg のリン酸デキサメタゾンナトリウム投与に対して過敏症が予測される患者。[リン酸デキサメタゾンナトリウムに対する副作用が発生する可能性がある。]
- 緊急開胸術を受けることができない患者。[緊急時に外科的手術を受ける可能性がある。]
- 静脈造影所見により、冠状静脈の血管構造が本体の留置に不適切とされる患者。[本体の固定が不十分になる可能性がある。]

*＜併用医療機器＞

(【使用上の注意】＜相互作用＞1.併用禁忌の項参照)

1. MRI 検査を行うための条件を満たさない場合の磁気共鳴システム (MRI)。[本体の損傷、心筋損傷、ペーシングの抑制、不適切な治療、治療機能の喪失、不整脈の誘発等を引き起こす可能性がある。]

2. マイクロ波治療器(ジアテルミー)。[発生する熱により、

重篤な外傷又は本体の恒久的な損傷が生じるおそれがある。]

3. 滅電極低周波治療器(電気利用の滅治療)。[オーバーセンシングによりペーシングが抑制される可能性がある。]

4. 高周波/低周波治療機器。[ペーシングの抑制、あるいは PG のモードが非同期モードに移行する可能性がある。エネルギーが高いと PG が破損したり、電極が接触する心筋組織を焼灼する可能性がある。]

5. 経皮的電気刺激装置：TENS。[ペーシングの抑制、あるいは、PG のモードが非同期モードに移行する可能性がある。]

6. 超音波治療器。[超音波による機械的振動によってペースメーカーシステムが故障(物理的損傷)する場合がある。]

＜使用方法＞

- 再使用禁止。
- 再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は心不全の治療を目的に除細動機能付植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ又は除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ(以下、PG)と接続して使用される植込み型除細動器・ペースメーカーリード及びその付属品である。

本品は左心室のペーシングを行う際に使用する。

本品は 4 つの電極を有し、S カーブにより左心室(冠状静脈内)に固定される経静脈リードである。また、通常用いられるスタイレット法だけでなく、オーバー・ザ・ワイヤ法でも留置することができる。

本品はステロイド溶出機構、電極のチッ化チタン表面処理及び被覆チューブ表面のコーティングを備えている。

2. 構成

本体	リード	1 本
付属品	スーチャースリーブ	1 個
	ペインピック	1 個
	IS4 用フラッシングツール	2 個
	スタイレット	4 本
	IS4/DF4 コネクタスリーブ*	1 個
	IS4/DF4 コネクタ用ピンブラグ*	1 個

*付属されない場合がある。

** 3. 寸法等


特性		
固定方法		S カーブ
形状(遠位部を除く)		ストレート
遠位チップ1からの各電極間距離(mm、±2.5)		20、30、47
呼び寸法(cm)		75、86、92
電極表面積(mm ²)	遠位チップ1	4.9
	Mid2、Mid3、近位4	7.4
原材料 ^{※1} (付属品を含む)		シリコーンゴム、シリコーンポリウレタン共重合体、ポリビニルピロリドン、ニッケル合金、チッ化チタン、ステロイド、硫酸バリウム、アセタール樹脂、ABS 樹脂、ステンレス鋼、ポリテトラフルオロエチレン/ポリエーテルサルホン、PEEK 樹脂

※1：血液・体液に接触する原材料のみ記載

取扱説明書を必ずご参照下さい。


4. 外観図

(1) 本体

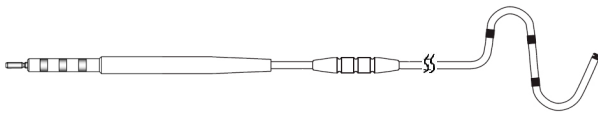

(2) 付属品

1) スーチャースリーブ

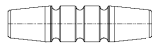

2) ペインピック




3) IS4 用フラッシングツール



4) スタイレット



5) IS4/DF4 コネクタスリーブ

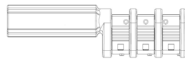

6) IS4/DF4 コネクタ用ピンプラグ



5. 併用医療機器

本体は国際規格 ISO 27186 に準拠した IS4-LLLL コネクタを有する除細動機能付植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ又は除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータと接続可能である。

【使用目的又は効果】

**＜使用目的＞

本品は、心不全症状を改善するために心室の収縮を同期化する心臓再同期療法(CRT:Cardiac Resynchronization Therapy)を行うときに、左心室の心筋に長時間連続して規則的に弱い電気刺激を与えるため、除細動機能付植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ又は除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータと接続して使用する導線及びその付属品である。なお、本体は、特定の使用条件下で MRI スキャンを実施できる MR Conditional リードである。

【使用方法等】

1. 本品は1回限りの使用で再使用できない。

*2. PG 植込み手技に準じた手順の一般的な例を以下に示す(システム概略図参照)。

(1) 本品、PG、シース、プログラマ、ペーシングシステムアナライザ(以下、PSA)等の用意

本体、PG、シース、プログラマ、PSA、X 線透視装置、心電図モニター、体外式除細動器及び手術器材等(本申請には含まれない。)を用意する。PG 等を要さず、リードを交換する場合もある。

本体※



PG



プログラマ



PSA



※: 本品の滅菌包装に損傷、汚染等がないことを確認する(滅菌包装に損傷、汚染等がある場合は使用しないこと)。

(2) 本体の挿入

取扱いは開封も含め手術室等の清潔野において行い、挿入は透視下にて行う。身体表面を切開し、植え込むための皮下ポケットを作る。

1) スタイレット法

皮下ポケットから静脈を穿刺し、シース等のカテーテルデリバリーシステムを挿入する。シースの遠位端を冠状静脈洞入口部に位置するよう配置した後、スタイレットを完全に挿入した本体をシース内に挿入する。本体を経静脈的に心臓内に挿入し、冠状静脈洞を経て左心室(冠状静脈)内に本体及びスタイレットを操作しながら固定する。PG を交換する場合は、本体を傷付けない様切開し、六角レンチ等で PG から取り外す。



冠状静脈洞

2) オーバー・ザ・ワイヤ法

ガイドワイヤ挿入時及び入れ替えを行う場合はその都度、本体のワイヤルーメンを IS4 用フラッシングツールを用いてフラッシングする。また、挿入、抜去時は透視下で慎重に操作を行う。

a. スタイレット法によるガイドワイヤの使用

最終的な位置決めの際、ガイドワイヤを用いてもよい。

b. オーバー・ザ・ワイヤ法による本体の留置(バックローディング法又はプレローディング法)

(a) ガイドワイヤを本体の中ほどまで挿入する。

(b) 本体をシースに挿入し、冠状静脈洞、冠状静脈に進める。

(c) 本体をこれ以上容易に進ませることができなくなったら、ガイドワイヤを遠位チップ1を越えて冠状静脈の適切な部位へ到達するまで進める。

(d) ガイドワイヤが目的部位に到達したら、ガイドワイヤに沿わせて本体を進める。

c. オーバー・ザ・ワイヤ法による本体の留置(フロントローディング法)

(a) ガイドワイヤをシースに挿入し、冠状静脈洞、さらに冠状静脈の目的部位まで進める。

(b) ガイドワイヤに沿わせて、本体を挿入する。

(3) ペーシング及びセンシング閾値等の測定

本体挿入後は本体の IS4-LLLL コネクタと PSA を清潔なケーブルを用いて極性を正しく接続し、刺激閾値、心内波高値、リードインピーダンス等を測定し、室房逆伝導や最大刺激電圧による筋攣縮の有無等を確認する。

(4) 本体の固定

付属のスーチャースリーブを用いて静脈入口部あるいは周辺組織に固定する。


(5) PG と本体の接続

本体のコネクタが汚れていない事を確認し、PG の適切なポートの奥まで差し込み、PG 付属の専用トルクレンチを使用して固定ネジを締め、本体と PG を固定する。プログラマのテレメトリーワンド、RF アンテナもしくは BLE アンテナを用いて PG と交信し、本体の接続等が適正である事を確認する。そして、PSA により得られた情報を参考に、安全域を考慮して、ペーシング出力、センシング設定等のプログラミングを行う。



- (6) PG 及び本体の皮下への植込み
皮下ポケットに PG 及び本体を挿入し、位置が移動しない様にスーチャーホールを使用し周囲組織に縫着し、皮膚を縫合する。
- (7) プログラミング
システムが正常に動いている事を確認し、調整が必要な場合は最終的なプログラミングを行う。
- (8) 最終確認
センシング及びペーシングを確認し、PG で設定した機能が設定どおりであることを確認する。

システム概略図

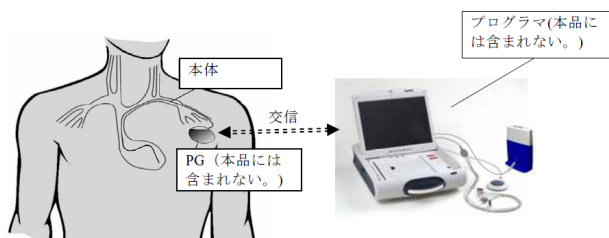

3. MRI 検査を行う際の手順及び MRI 検査を行うための条件
本体と接続する条件付き MRI 対応 PG の【使用方法等】欄に記載されている「MRI 検査を行う際の手順」及び「MRI 検査を行うための条件」に従うこと。

*4.併用可能な条件付き MRI 対応植込み機器

下表に示す条件付き MRI 対応植込み機器と併用した場合にのみ、MRI 検査が可能である。

販売名	承認番号	製造販売業者
クアドラ アシュラ	22500BZX00326000	アボット メディカル ジャパン 合同会社
クアドラ+ エクセリス	22500BZX00326A01	
クアドラ アループ MRI	22800BZX00440000	
クアドラ リリーブ MRI	22800BZX00440A01	
クアドラ アシュラ MP	22900BZX00069000	
クアドラ+ エクセリス MP	22900BZX00069A01	
クアドラ アループ MP	22900BZX00168000	
クアドラ リリーブ MP	22900BZX00168A01	
ギャラン HF	30200BZX00246000	
ニュートリノ NxT HF	30200BZX00246A01	

5. 使用方法等に関連する使用上の注意

*(1)植込み前の注意

- 1) 本品を含むあらゆる血管系内操作機器は、連続的な透視下でのみ操作すること。
- 2) 電気機器を使用する場合は、患者を漏洩電流の危険から保護するため、電氣的絶縁を確認すること。
- 3) 内側パッケージのインジケータが紫色でないことを確認すること。紫色の場合滅菌されていない可能性があるため使用しないこと。
- 4) 本体とシース、および本体と PG の適合性を事前に確認すること。
- 5) 本体をトレイから取り出す時には、コネクタピンに負荷がかからないようにできる限り垂直に取り出すこと。コネクタピンに負荷がかかると曲がる可能性がある。
- 6) ペインピックは、静脈切開手術中に静脈を刺したり組織を切開したりすることに使用するものではない。ペインピックが本体を傷つけないよう注意すること。体液が本体内部に浸入し、適切な機能を妨げる可能性がある。
- 7) 電極を汚染させないこと。粉末や繊維等が電極面に付着すると電極の性能がさまたげられる。
- 8) 本体損傷あるいは本体離脱を防ぐため、過度の力を加えたり、外科器具を使用して操作しないこと。本体を留置するときに引張り過ぎないようスーチャースリーブを使用すること。
- 9) 電極先端に圧力をかけないこと。
- 10) リードの絶縁被覆を汚染から保護すること。絶縁被覆は、静電的に粒子状物質を吸引する性質があるので、植込み前に

表面が汚れないように保護する。特に糸くず、埃、その他同様のものに近づけないこと。またパウダつき手袋などを使用するときは注意すること。

- 11) コイル状に巻かれた導線は弾力があり、力が加えられても原形に戻るが、構造的に導線を脆弱化するので極端にリードを曲げないように注意すること。通常の曲げの範囲においては、本体は可撓性を維持することができる。
- 12) 本品は、滅菌生理食塩水又は注射可能な液体以外の、ミネラルオイルやシリコンオイルなど、あらゆる液体に浸さないこと。
- 13) 植込み前に遠位チップ 1 を、いかなる液体にも浸さないこと。遠位チップ 1 を液体に浸すと、植込み前に少量のステロイドが溶出する可能性がある。
- 14) 植込み前に、スーチャースリーブが自由に動くことを慎重に確認すること。滑りが良くない時は慎重にひねるか、生理食塩水をつけて絶縁被覆の表面を湿らせること。電極先端部は湿らせないこと。
- 15) 除細動器は常に手元に置き、植込み手術中は直ちに使用できるようにすること。
- 16) 止血弁付きのシースを使用するときは、本体及びシースに損傷を与えることなく本体が適切に止血弁を通過することを確認すること。
- 17) スタイレットを使用するときは、本品に同梱又は添付の付属品キットに含まれる、先端形状が球型の製品を使用すること。
- 18) 本品と併用するガイドワイヤは、直径 0.36mm(0.014 インチ)以下、かつ全長が 180cm 以上のものを使用すること。本品は当該仕様を有するガイドワイヤとの併用を想定して設計されているため、仕様外のガイドワイヤとの併用により、不具合や有害事象が発生する可能性がある。
- 19) 本体の内腔を滅菌生理食塩水又は滅菌水以外の液体でフラッシュしないこと。
- 20) 本体の初回フラッシングは本体が体外にある場合にのみ行うこと。
- 21) 血栓形成等を防ぐために、ガイドワイヤの挿入前には、ヘパリン溶液にてフラッシュすること。
- 22) MRI スキャンにより植え込まれた PG 又は本体の磁性物質が物理的な力、振動や回転作用を及ぼす場合があるので留意すること。
- 23) MRI スキャンにより生じる傾斜磁場や RF 磁場により、心臓に対して意図しない刺激を生じる場合があるので留意すること。
- 24) MRI スキャンにより生じる RF 磁場は、植え込まれた本体に電圧を誘発させることがあり、このためリード電極の発熱を生じる場合があるので留意すること。
- 25) PG 及び本体により MRI 画像にアーチファクトが発生する可能性があるため、画像診断時には十分留意すること。
- 26) MRI スキャン中は患者に異常がないことを監視するため、話しかける等の確認を行うこと。
- 27) MRI スキャン中に測定されたリードインピーダンスは、MRI 装置の磁場の影響により不正確な値を示す可能性があるため留意すること。

*(2)植込み中の注意

- 1) スタイレットを本体に挿入した状態で曲げないこと。本体が損傷する可能性がある。
- 2) 鎖骨下静脈穿刺法により本体を挿入する場合は、鎖骨を 3 分割した正中側 3 分の 1 より内側から本体を挿入してはならない。この方法で本体を挿入すると本体に損傷を生じる可能性が高くなる。鎖骨下静脈から挿入する場合は、必ず第一肋骨外側端付近から穿刺し、鎖骨下筋を貫通しないようにする。鎖骨と第一肋骨間における本体損傷を避ける上で重要である。本体損傷は鎖骨下筋肉や肋骨烏口靱帯、あるいは肋骨鎖骨靱帯等の軟組織内に本体が挟まれて挿入されることによって生じることが文献で明らかにされている^{s3}。また、第一肋骨・鎖骨間の解剖学的異常を有する患者における過度のリード圧迫も報告されている^{s4}。
- 3) 鎖骨下穿刺法により本体を挿入する場合、スーチャースリーブと静脈挿入部位との間で本体を緩ませること。こうすることにより、鎖骨と第一肋骨付近でのスーチャースリーブとの相互の無理な動きを少なくすることができる。
- 4) 鎖骨下穿刺法で本体を挿入する場合は、遠位端固定部位と静

- 脈への挿入部との間に適度の緩みを作っておくと、鎖骨及び第一肋骨付近でのスーチャースリーブとの相互の無理な動きを少なくすることができる。
- 5) 本体を血管及び心腔内に挿入するときおよび挿入後のリード操作は慎重に行うこと。操作中に抵抗感を感じた場合には操作を中止し、その原因を確認して適切な処置を行うこと。そのまま操作を続けると、血管や本体に損傷を与えることがある。
 - 6) 本体の移動を防ぐために、スーチャースリーブを使用して静脈入口部あるいは周辺組織に結紮すること。
 - 7) 他のリードを含めリードをもつれさせたり、捻じったり、結んだりしてはならない。絶縁被覆の損傷の原因となる。
 - 8) 本体は必ずスーチャースリーブを介して結紮し、本体を直接強く縛らないこと。本体が損傷することがある。また、本体を固定しているときに電極先端が離脱しないように注意すること。
 - 9) 本体からスーチャースリーブを外したり切断してはならない。本体損傷の原因となる。
 - 10) PSA 等と本体を接続するときはコネクタの金属部をクリップし、絶縁被覆を傷つけないこと。
 - 11) 本リードには、専用の PSA 接続ケーブルを使用すること。他のケーブルを使用すると隣接し合う電極に接触し、ショートを起こす可能性がある。
 - 12) 単極での閾値等測定の際は、ポケット内の皮下組織に不閉電極を設置し、陽極側の PSA 接続ケーブルを接続して行うこと。
 - 13) PSA 等を用いる場合、組織に直接つなぐための不閉電極としてワニクリップを使用しないこと。組織に外傷を与え、閾値電圧やインピーダンスの測定値が不正確になる可能性がある。
 - 14) 使用しないリードを留置する場合は、コネクタにキャップをして絶縁しておくこと。本体を途中で切断した場合は、その端を絶縁して周囲の組織に固定し、血管内にリードの断端が入り込まないようにすること。
 - 15) 余分な本体部分は PG の動きを考慮して適当な緩みをもたせて、緩やかなコイル状にして植え込むこと。
 - 16) スーチャースリーブは腕の動きなどが本体に伝わらない位置に固定すること。適切な位置に固定されない場合は、スーチャースリーブの付近で本体に損傷(断線等)が発生する可能性がある。
 - 17) 固定の際は、付属のスーチャースリーブを使用すること。静脈入口部あるいは周辺組織を結紮した糸を用いて、近位側の溝でスーチャーをしっかりと巻き付け固定すること。その際、本体が移動しないように、スリーブの遠位側を静脈に進入させ、最も遠位側の溝を使用し静脈を包むようにして結紮すること。
 - 18) 本体がポケット内で PG と接触して絶縁被覆が損傷する可能性がある。本体は PG との接触が最小限になるよう緩く巻き、植え込むこと。
 - 19) スタイレットが本体内に残存していることがあってはならない。本体内に残存していると、絶縁被覆の穿孔又は心筋の穿孔の原因となり得る。
 - 20) 植込み中は患者に異常のないことを絶えずモニタし、異常が発見された場合、患者に安全な状態で本品の使用を止める等、適切な処置を行うこと。
 - 21) 本体は細心の注意を払って取り扱うこと。極端な曲げ、ねじれ、引っ張り、手術器具による取扱い、スタイレット挿入又はガイドワイヤ操作時に過度の力が加わること等により、本体に損傷を与える可能性がある。万一損傷した場合には、本体は使用しないこと。
 - 22) 胸郭出口症候群 (thoracic outlet syndrome) の症状が見られる場合は、物理的なストレスのかかるような位置に本体を植え込まないこと。
 - 23) スタイレット又はガイドワイヤを取扱うときは、手術手袋についた血液をよく拭き取ること。スタイレット又はガイドワイヤに血液がつくと、ワイヤルーメンへの挿入または抜去が困難となる。
 - 24) スタイレット又はガイドワイヤを清潔器機台に置くときは、跳ねたり、落ちたりしないように十分気をつけること。付属のポリエチレンチューブに挿入しておくことと良い。
 - 25) スタイレット又はガイドワイヤを本体に挿入するときは、短

- いストロークで少しずつ挿入する。曲がった状態や長いストロークで挿入すると、スタイレット又はガイドワイヤが折れ曲がる可能性がある。
- 26) ガイドワイヤ上へのリードの挿入を容易にするために、リードの S 字カーブをまっすぐにし、ガイドワイヤ上を進める際にはリード本体部をできるだけまっすぐに保つこと。
 - 27) スタイレット又はガイドワイヤは過分な力で本体に挿入したり、押し進めたりしないようにする。本体のコイルを損傷したり、スタイレット又はガイドワイヤが絶縁被覆を突き破る可能性がある。
 - 28) スタイレットの遠位部にカーブをつける際には鋭利なものを使用しないこと。
 - 29) スタイレット又はガイドワイヤ挿入時及び交換を行う場合はその都度、IS4 用フラッシングツールをコネクタピンに差し込み、適切なシリンジを使用してワイヤルーメンを滅菌生理食塩水又は滅菌水でフラッシングすること。
 - 30) 本体の先端が目的部位に達したら、スタイレットを引き戻すこと。心穿孔を引き起こす可能性がある。
 - 31) スタイレットを本体に途中まで挿入した状態で、血管内に本体を押し進めないこと。本体の導線および絶縁被覆に損傷を与えたり、導線の絶縁被覆を穿孔することがある。
 - 32) 本体のコネクタ部や PG のコネクタ内部に血液、体液その他異物等が付着していないことを確認すること。
 - 33) 本体が PG に確実に接続されていることを確かめること。本体のコネクタ部を保持し、本体に損傷を与えないようゆっくりと注意深く引っ張り、本体がしっかりと固定されていることを確認する。強く引っ張ると、本体が損傷することがあるので注意すること。また心電図等で電氣的に接続されていることを確認すること。
 - 34) 本体が鋭く曲がったり、引っ張られたりする位置に留置しないこと。
 - 35) スタイレット又はガイドワイヤを抜くときはコネクタ部で本体を保持し、まっすぐ引き抜くこと。
 - 36) 植込み手技中に、少量の血液がワイヤルーメン内に見られることがある。
 - 37) 本体は、もっとも健康で留置可能である心筋組織上に留置するよう注意を払うこと。
 - 38) 植込み術中は、即座に使用できるように体外式除細動器を近くに置くこと。
 - 39) 植込み手技中は、心臓エコー検査用機器を利用できる状態にしておくこと。
 - 40) 植込み術中の刺激閾値が高く、心内電位が低い場合は遠位チップ 1 の留置位置を変える必要が生じる可能性がある。
 - 41) 冠状静脈に本体を挿入するときは、慎重にゆっくりと操作を行うこと。
 - 42) PG との接続時にコネクタピンに対して遠い位置で本体を保持したり、またコネクタを斜めに挿入したりしないこと。
 - 43) 本体のコネクタとコネクタ被覆へのストレスを避けるために、本体が PG のヘッダに鋭角に取り付けられた状態で PG を植え込まないこと。
 - 44) 本体を PG に接続する前に、透視下で本体の位置を再検討し、心内波の振幅及びペーシング閾値の測定を繰り返し、本体が離脱、移動又は損傷していないことを確認すること。

* (3) 植込み後の注意

- 1) 植込み後に異常が疑われる場合には、胸部 X 線撮影、PG チェック等によるリードインピーダンスの測定、心電図検査、心エコー等により確認し、適切な処置を行うこと。導線の断線や PG との接続不良が発生するとリード抵抗値が上昇し、また、絶縁材の損傷や導線の短絡が発生するとリード抵抗値が低下することがある。本品の異常が疑われる場合は、速やかに製造販売業者に連絡すること。
- 2) 心内膜リードは植込み時間の経過とともに線維組織が形成されるので、再固定、抜去が困難になる。無理に引き抜くと血管が剥離したり、リード先端の接合部が離れて遠位チップ 1 と露出した導線が心内又は血管内に残されてしまう可能性がある。万一、本体を抜去したり再固定をする場合は、細心の注意を払って行うこと。
- 3) PG の交換術を行う際、長期間の使用等により PG から本体が取り外しにくくなる可能性がある。PG から本体を取り外す際に

- は、PG の固定システム（固定ネジ等）を確実に緩めてからリードコネクタ部を保持し、本体が損傷しないようゆっくりと注意深く引っ張ること。本体が容易に取り外せない場合は、無理に力を入れて引っ張らないこと。無理に引っ張ると本体が損傷し、その結果追加の本体の植込みが必要となる場合がある。
- 4) 本体を留置した状態で使用を中止する場合は、コネクタにキャップをして絶縁しておくこと。留置した本体を切断することは勧められないが、止むを得ず途中で切断した場合は、その端を絶縁して周囲の組織に固定し、血管内に断端が入り込まないようにすること。
- 5) リード抜去は臨床上の危険を伴う。本体を取り除かなければならない場合は、十分な注意を払うこと。
- (4) PG 交換時の注意
- 1) PG のみを交換し、本体を継続使用する場合は、本体に損傷を与えないよう注意すること。
 - 2) 本体を新しい PG に接続する場合は、コネクタ部の付着物をきれいに拭き取ること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本体は必ず透視下でモニタしながら植え込むこと。
 2. 術後は、定期的に胸部 X 線撮影、心電図検査、心エコー、CT スキャン等により心穿孔、心タンポナーデ、気胸、血胸などの発症がないかフォローアップすること。
- *3. その他患者への指導事項
- (1) 本品を植込んだ患者に次の注意を促すこと。
 - ① PG や本体に損傷を与えたり、植込み位置が移動してしまう可能性があるため、植込み部位を圧迫したり、叩いたり、むやみにいじったりしないこと。
 - ② 腹部に PG が植込まれている患者に対し鉄棒運動等、腹部を圧迫する運動を避けること。腹部にある本体が損傷することがある。
 - ③ 腕を激しく使う運動または仕事をする場合、担当医に相談すること。ぶら下がり健康器の使用およびザイルを使用する登山は避けること。運動の種類、程度によっては本体が損傷することがある。

＜相互作用＞

1. 併用禁忌(併用しないこと)

*医療機器の名称等	*臨床症状・措置方法	*機序・危険因子
磁気共鳴システム (MRI) (条件を満たさない場合)	PG 交換	強い磁場の影響により PG が故障する可能性がある。
	リード交換、プログラマによる再設定	電磁波により電極周囲が熱せられて心筋組織を損傷させる可能性がある。電磁干渉により PG のモードが非同期モードに移行したり、ペーシングが抑制されたり、あるいはペーシングレートが上昇する可能性がある。
鍼電極低周波治療器(電気利用の鍼治療)	治療器の使用中止	オーバーセンシングによりペーシングが抑制される可能性がある。
高周波／低周波治療器	高周波/低周波治療器の使用中止	電磁干渉により非同期ペーシングに移行する、又はペーシングが抑制される可能性がある。
経皮的電気刺激装置 : TENS	治療器の使用中止	ペーシング出力が抑制されたり、非同期ペーシングに移行する可能性がある。
マイクロ波治療器 (ジアテ)	治療器の使用中止、体外式除細動	電磁干渉による非同期ペーシングによって心

ルミー)		室細動を誘発する可能性がある。
	治療器の使用中止	リードが使用されているか否かにかかわらず、短波及びマイクロ波により、電極周囲が熱せられて心臓組織を損傷させる可能性がある。
超音波治療器	併用不可	本体は超音波による機械的振動によってペースメーカーシステムが故障（物理的損傷）する場合がある。

2. 併用注意(併用に注意すること)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
一般電気手術器 (電気メス) ※1	治療器の使用中止、体外式除細動	心室細動が誘発される可能性がある。
除細動器※2	リード交換	電極遠位端の心筋焼灼が生じる可能性がある。
	プログラマによる再設定又は体外式ペースメーカーの使用	体外式除細動器により、一時的なペーシング閾値の上昇を招く可能性がある。

* (1) 併用注意の相互作用の低減方法

※1 電気メスを使用する場合、ペースメーカー依存等の患者は除細動機能を Off にし、必要に応じて PG のモードを非同期モードにプログラムすること。電気メスとその不調電極との電流経路を PG 及びリードから出来る限り遠ざけること。電気メスによる影響の度合いは、電気メスの種類、止血電流と切開電流、電流経路及び PG とリードの状態によって変わるが、電気メスの出力は必要最小限に止め、短期間に、間欠的に、不規則パルスで行うこと。可能な限り双極型電気メスを使用すること。体外式ペースメーカー及び体外式除細動器を使用できるようにしておくこと。ポリウレタンまたはポリウレタン・シリコン共重合体を被覆に用いたリードは電気メス使用時の温熱障害での損傷が文献にて報告されている。⁸⁵

※2 除細動器を使用する場合、PG や心筋の損傷の危険性を減らすため、パドルの位置は PG から十分離し、パドルとパドルを結ぶ軸が PG とリード先端を結ぶ軸に直角になるようあてること。

＜不具合・有害事象＞

＜重大な不具合＞

1. ペーシング不全及びセンシング不全：断線、絶縁不良等によりペーシング不全およびセンシング不全が発生し、適切な治療ができなくなることがある。[植込み後はフォローアップを行うこと。]
2. 過剰センシング又はセンシングの喪失：断続的又は連続的なセンシングの喪失により不整脈が検出されない、又は過剰センシングにより PG から不適切な治療が行われる又は適切な治療ができなくなる可能性がある。[適切な設定を行い、植込み後はフォローアップを行うこと。]
3. ペーシング不全、センシング不全、不適切治療：MRI 検査に伴う本体発熱により心筋の損傷が生じることでペーシング不全及びセンシング不全が発生し、適切な治療ができなくなる可能性がある。また MRI 検査による本体の損傷によっても不整脈の検出や治療機能を損なう可能性がある。

＜その他の不具合＞

1. リードインピーダンス値の異常：断線、PG との接続不良等により、リードインピーダンス値が異常に上昇する可能性がある。また絶縁被覆の損傷等により、リードインピーダンス値が異常に下降する可能性がある。[植込み後はフォローアップを行うこと。]
2. 刺激（またはペーシング）閾値上昇：断線、PG との接続不良、離脱、移動により、閾値が上昇する可能性がある。

又、併用している薬物の影響、或いは植込まれた心筋の状態によっても閾値が上昇する可能性がある。[植込み後はフォローアップを行うこと。]

- ガイドワイヤの操作難渋：ワイヤルーメンのフラッシングが足りないと、ガイドワイヤの操作に難渋したり、リード本体から抜去できなくなる可能性がある。
- ノイズの発生：本体の損傷、PG との接続不良、電磁干渉の影響等によりノイズが発生する可能性がある。

*5. 離脱(ディスロジ)、移動等

<重大な有害事象>

- 死亡：ペーシング不全又はノイズのセンシング等により心停止状態が持続や、持続的なノイズのセンシングによる非同期ペーシングに移行し、心室細動を誘発するようなセンシング不全により死亡につながる可能性がある。
- アダムス・ストークス発作：ペーシング不全又はノイズのセンシング等により心停止状態が数秒間以上持続するために卒倒する可能性がある。卒倒が原因になり2次的な被害が発生する可能性がある。
- 連続したキャプチャー、心室頻拍/心室細動、循環虚脱：MRI 検査によりリード本体に誘導電流が生じることにより発生する可能性がある。

**<その他の有害事象>

心臓弁の損傷や機能不全(三尖弁機能不全等)、不整脈(心室期外収縮、上室性頻拍・心室性頻脈性不整脈、伝導障害等)、空気塞栓、心筋損傷、心破裂、筋肉や神経等への刺激(横隔神経刺激、横隔膜刺激等)、血栓による閉鎖不全や塞栓(静脈血栓による閉鎖不全や塞栓、血栓崩壊性塞栓症等)、気胸、皮膚瘻・突出、感染、静脈穿孔、出血、血腫/漿液腫、近接組織の拒絶反応、アレルギー反応、/ケロイド形成、組織の壊死、血管損傷、心内膜炎、心嚢液貯留、心膜滲出液、心膜摩擦音、肺浮腫、進出ブロック、鎖骨下静脈の裂傷、動静脈の瘻孔、神経損傷、胸管損傷、脱血、収縮性喪失、皮膚侵食、術後心不全、ショック後の徐脈又は上室性不整脈、外部の除細動エネルギーの増加及び/又は必要とされるパドルの再ポジショニング、心臓の慢性的機械的刺激、心臓/冠状静脈洞の解離、局所的組織反応(線維組織の形成)、透視用X線の長期被爆、冠状静脈造影に用いた造影剤による腎不全、他の血管へのカニューレション、MRI 検査による本体の移動や振動、ポケット組織の損傷、不快感、心穿孔、心タンポナーデ、体内遺残、閾値の上昇、気胸、血管迷走神経反応、ディスロジ等による閾値上昇にともなうペーシング不全。

【臨床成績】

米国において、本品を含む CRT-D システムを評価することを目的として、Promote Q CRT-D 及び Quartet 左室リード IDE 臨床試験を実施した。被験機器の適応を有する患者 178 例を登録し、177 例に CRT-D システムを植込んだ。

1. 有効性評価結果

左室ペーシングに対するレスポンス率(規定のベクトルでキャプチャー閾値 < 2.5 であること)について、客観的評価基準 75%に基づき評価した。

解析手法	結果
統計解析計画書に規定した解析	79.7% (97.5%信頼下限：73.0%)
完全データ症例解析	83.9% (97.5%信頼下限：77.2%)
植込み不成功 5 例を解析除外	82.0% (97.5%信頼下限：75.4%)

統計解析計画書に規定した解析(植込み不成功例をノンレスポンス率として扱う)の結果は客観的評価基準を上回らなかったものの、3ヶ月時のデータが得られた症例を対象とした解析、及び植込み不成功例を除外した解析では客観的評価基準を上回った。さらにレスポンス率の定義を実際の臨床における状況に即するよう調整して解析を実施したところ、すべての解析で客観的評価基準を上回った。

解析手法	結果
ベクトル 1 及び非標準ベクトル	81.9% (97.5%信頼下限：)

のうち 1 つ以上で閾値 ≤ 2.5 V	75.4%)
標準ベクトルのうち 1 つ以上、及び非標準ベクトルのうち 1 つ以上で閾値 < 2.5 V	85.3% (97.5%信頼下限：79.2%)
10 ベクトルのうち 1 つ以上で閾値 < 2.5V、植込み不成功 5 例を除外	93.0% (97.5%信頼下限：88.1%)
設定可能な 10 ベクトルのうち 1 つ以上で閾値 < 2.5V	90.4% (97.5%信頼下限：85.1%)

2. 安全性評価結果

主要評価項目結果 (N=178)

項目	客観的評価基準	結果
左室リード関連合併症非発生率	85%	96% (97.5%信頼下限：93%)
システム関連合併症非発生率	75%	92% (97.5%信頼下限：88%)

10 例の死亡が報告されたが、被験機器との関連はなかった。予期しない有害事象の発現はなかった。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- 15℃から 30℃の環境で保管すること。
- 水のかからない場所に保管すること。
- 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン分を含んだ空気等による悪影響のおそれのない場所に保管すること。
- 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)等安定状態に注意すること。
- 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所には保管しないこと。

<有効期間>

ラベルに表示された使用期限内に使用すること。[使用期限は自己認証による。]

【承認条件】

- 関連学会と連携の上、実施施設基準及び実施者基準を設け、安全性を確保できる施設及び本品に関する十分な知識を有する医療従事者により本品の使用及び MRI 検査が行われるよう、適切な措置を講ずること。
- MRI 検査を行うための条件について、医療従事者に対する研修及び患者に対する教育を徹底し、十分なサポート体制を構築し、安全性の確保に努めること。
- 心不全治療を目的とした心臓再同期療法、冠静脈用リードの挿入手技、植込み型除細動器による治療などに関する適切な教育プログラムを受講し、本品の有効性及び安全性に関する情報を理解した上で、本品の適切な取扱いに習熟した医師のみが使用するように、必要な措置を講ずること。
- 本品に関連する手術及び検査を実施する体制を備えた医療機関において使用されるように、必要な措置を講ずること。

【主要文献及び文献請求先】

<主要文献>

- * §1：MRI 薬生機審発 0801 第 1 号、薬生安発 0801 第 4 号 令和元年 8 月 1 日 植込み型医療機器等の MR 安全性にかかる対応について
- §2：Magney JE, et al, Anatomical mechanisms explaining damage to pacemaker leads, defibrillator leads, and failure of central venous catheters adjacent to the sternoclavicular joint., PACE. 1993;16:445～457
- §3：Suzuki Y, Fujimori S, Sakai M, et al, A case of pacemaker lead fracture associated with thoracic outlet syndrome. PACE.,1998;11:326～330
- §4：Magney JE, et al. A new approach to percutaneous subclavian vein puncture to avoid lead fracture or central venous catheter occlusion. PACE., 1993;16:2133～2142

* §5 : LIM KK, et al.Effect of Electrocautery on Transvenous Lead Insulation Materials., Journal of Cardiovascular Electrophysiology, 2009;20:429～435

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アボットメディカルジャパン合同会社
03-6255-6370 （文献請求先も同じ）

製造業者（国名）：ペースセッター社
（アメリカ合衆国）
Pacesetter, Inc.