

機械器具 (O6) 呼吸補助器  
一般医療機器 酸素テント (JMDN コード : 12893000)  
特定保守管理医療機器

## ディスポーザ フード

### 再使用禁止

#### 【警告】

酸素投与は医師の指示の元行うこと。

#### 【禁忌・禁止】


1. 同じフードを別の患者への使用は、感染の恐れがあるため使用禁止
2. 再使用禁止(フードのみ)
3. 再滅菌禁止
4. 本来の用途以外の目的には使用しないこと

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 概要

本品は新生児、乳幼児用の酸素投与フードである。患者の頭部を覆う軟性の透明カバーである。サイズは、小、中、大、大(首幅大)、特大の5種類がある。また、それぞれのサイズのカバーを固定するためのカラーで構成されている。カバーとカラーがセットのものもある。本品は未滅菌品である。

[ディスポーザ フード全体図]

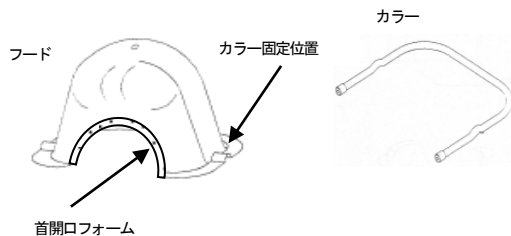

##### 2. 原材料又は構成

フード : 熱可塑性ポリエチレン樹脂  
首開口フォーム : ポリエチレン  
カラー : ポリ塩化ビニルが鉄を覆っている

##### 3. 寸法

| 全体サイズ     |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 小、中       | 17.8cm (長さ) × 17.8cm (幅) × 13.7cm (高さ) |
| 大、大 (首幅大) | 20.3cm (長さ) × 21.1cm (幅) × 17.5cm (高さ) |
| 特大        | 33.0cm (長さ) × 26.4cm (幅) × 21.6cm (高さ) |

| 開口部サイズ  |                          |
|---------|--------------------------|
| 小       | 6.4cm (幅) × 4.6cm (高さ)   |
| 中       | 9.9cm (幅) × 6.4cm (高さ)   |
| 大       | 12.7cm (幅) × 9.9cm (高さ)  |
| 大 (首幅大) | 12.7cm (幅) × 7.4cm (高さ)  |
| 特大      | 16.0cm (幅) × 12.7cm (高さ) |

#### 【使用目的又は効果】

本品は酸素分圧を高めることを目的とした、ベッド上部用又はヘッド

用の軟性の囲いである。加湿及び温度制御下で用いるものもある。鼻ブロング(鼻腔カニューレ)又はフェースマスクを容認できない患者に用いるよう作成されている。

#### 【使用方法】

- ・本品はディスポーザブル製品であるので、1 回限りの使用のみで再使用できない(フードのみ)。又、使用期限のきれたものは使用できない。
- ・開封前に包装が開封又は破損していないか、構成品が破損・変形等異常がないか確認すること。

##### <使用方法例>

1. 新生児・乳幼児の頭部サイズに合わせたサイズのフードを選択して被せる。
2. カラーをフード周囲のカラー固定位置にのせる。
3. 酸素吸入器の呼吸ホースと入力部をつなぎ、酸素投与をはじめる。
4. 酸素投与の終了後は、フードを取り外す。

#### 【保管方法及び有効期間】

##### 貯蔵・保管方法

直射日光を避け、乾燥した涼しい場所で保管すること。

#### 【使用上の注意】

1. フードが軟性素材で作られているため、破損等にご注意すること。
2. 一度包装を開けたものや包装に穴のあいたものは、使用しないこと。
3. カラーの内素材が鉄であるため、患者への落下等にご注意を払うこと。
4. カラーは再使用可能であるが、使用前に表面の汚れ・破損・亀裂等目視で確認し、不具合が認められた場合は破棄すること。

#### 【包装】

小サイズ : 6 個/箱  
中サイズ : 12 個/箱 6 個/箱  
大・首幅大サイズ : 8 個/箱 1 個/袋  
特大サイズ : 6 個/箱  
カラー : 2 個/箱 1 個/袋  
スターターキット 1 セット/箱

#### \* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

・製造販売業者 : ソルブ株式会社  
神奈川県横浜市金沢区富岡東 2-2-2 横浜食用流通センタービル  
問い合わせ先 : 045-773-7787

・製造業者:ユタメディカル プロダクツ インコーポレーション  
(Utah Medical Products Ltd.)  
国名 : アメリカ合衆国