

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 注射筒・針用アダプタ 35384000

SS アダプター

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止[単回使用品のため]
- ・ 本品に異常がある場合は使用しないこと[本品の意図する使用目的を達成できないため]
- ・ 注射筒との接続の際は、必要以上にねじ込まないこと[本体が破損し、嵌合異常が発生するため]

【形状・構造及び原理等】

<構成>

本品は、キャップと本体からなる。
本品は、ポリプロピレンを使用している。

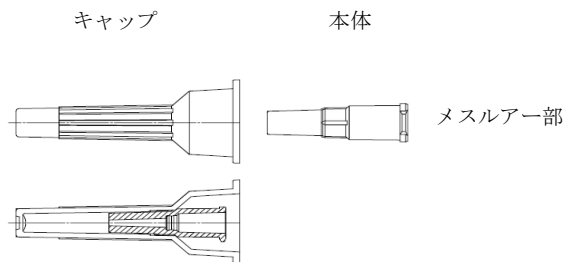

【使用目的又は効果】

本品は、筒先がルアーロック形状の注射筒に接続して使用するコネクタである。

【使用方法等】

本品は、株式会社三和化学研究所製シリンジ製剤（以下、専用シリンジという。）に接続して使用する。

1. 必要に応じて手袋を着用しておく。
2. 使用期限内であることを確認し、本品の汚染に注意して包装を開封し、本品を取り出す。
3. キャップを保持し、メスルアー部にルアーロック形状の専用シリンジを接続する。
4. キャップを取り外し、使用する。
5. 使用後は接続を外さず、専用シリンジと共に、そのまま廃棄する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- ・ 接続部に緩みのないことを確認してから使用すること。
- ・ 本品に衝撃を与えないこと。[破損のおそれがある。]
- ・ 接続部に薬液や血液等が付着すると、接続部に緩み等が生じるおそれがあるので注意すること。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・ 本品を使用する際は、必ず添付文書を確認すること。
- ・ 併用する医薬品や医療機器がある場合は、それらの添付文書も併せて確認すること。
- ・ 本品は、医師の管理下で適切に使用すること。
- ・ 使用前、包装や内容物に破損や汚損、水ぬれ、滅菌紙の剥がれ、外箱と本品の使用期限の相違等の異常がないことを確認すること。万一、異常が確認された場合は、使用しないこと。
- ・ 使用目的以外には使用しないこと。
- ・ 開封後はすぐに使用し、使用後は感染防止に留意して、安全な方法で適切に処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・ 水ぬれに注意し、高温多湿や直射日光を避けて保管すること。

<有効期間>

- ・ 直接の容器又は被包に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

創作メディカル株式会社

千葉県船橋市本町六丁目 1 番 1 2 号サクセスビル 2 F

TEL：047-455-3564