

機械器具 02 医療用照明器
一般医療機器 診療用照明器
12276000

ホスピライト アルコスⅢ

【警告】

- ・至近距離で患者の目に向かって照射しないこと。
- ・酸素又は亜酸化窒素・可燃性麻酔ガスの近くで使用しないこと。


【禁忌・禁止】

- ・当社が指定した業者以外は、修理・設置を行わないこと。
- ・本品の改造は行わないこと。
- ・本品清掃する際には、柔らかい布等で行い、アルコールやエタノールを使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成


(1) 灯体

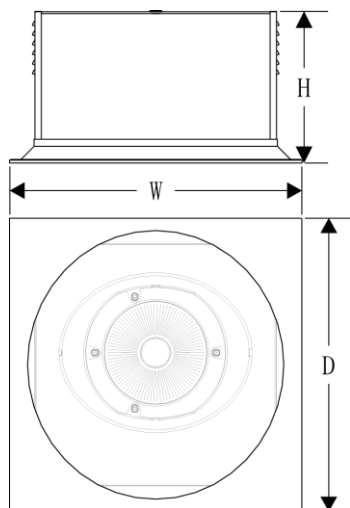


(2) ウォールコントロール

- ※ 灯ボックスタイプとフラットタイプの 2 種類がある。
- ※ 灯体数に応じた設計となり、1 つのウォールコントロールに、灯体 4 台までの接続が可能となる。

ボックスタイプ

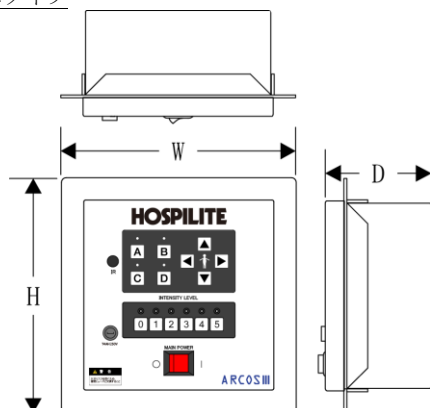


フラットタイプ

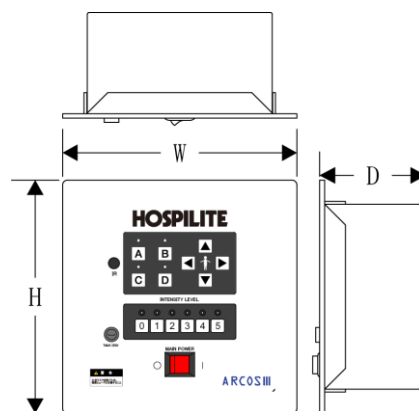


(3) 発光器

※ 単三アルカリ乾電池 2 個により可動する。

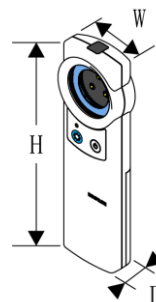

(4) 置台

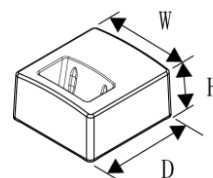

2. 寸法

番号	名称	寸法（単位：mm）
(1)	灯体	W:605 D:605 H:312.8
(2)	ウォールコントロール ボックスタイプ フラットタイプ	W:247 D:111.6 H:247 W:247 D:112.3 H:247
(3)	発光器	W:52 D:25 H:187
(4)	置台	W:84 D:88 H:44

（横：W、奥行：D、高さ：H）

3. 作動原理

灯体はセンサーを備えており、発光器の光を感知すると追尾する。また、ウォールコントロールによる灯体可動も可能である。これらにより、所望位置へ光を照射することができる。

取り扱い説明書を必ずご参照下さい。

【使用目的又は効果】

本装置は、患者の診療及び治療時に用いる照明器であり、天井や壁に取付けられる。

【使用方法等】

- (1) 主電源を ON にする。
- (2) ウォールコントロール又は発光器により、灯体を操作して所望位置へ光を照射する。
- (3) 灯体使用後は主電源を OFF にし、発光器を置台に差し込む。

【使用上の注意】

1. 取り扱い説明書をよく読み、理解してから使用すること。
2. 使用前には毎回必ず点検し、安全で正しく操作できるようにすること。
3. ライトヘッドに損傷などの異常がある際には、本品を使用せず、修理を依頼すること。
4. 清掃やメンテナンスをする際には、ライトヘッドの温度が十分下がった事を確認してから行うこと。
5. ウォールコントロールで電源を切った状態でなければ清掃はしないこと。
6. 塗装表面は中性洗剤で拭き、きれいな水で濯いだ糸くずの出ない柔らかい布で拭いてから乾かすこと。
7. 塗装表面には強い洗剤を使わないこと。
8. 直接光源を見たり、光線の通り道に反射率の高い面を置いたりしないこと。[視力が失われる危険があるため。]
9. 複数の灯体を配置して一か所に光を集めるときは、術部に過度の熱が当たるリスクを避けるため、適宜照度を落とすこと。
10. 本品の清掃に、蒸気、非常に高温の熱湯(65℃以上)又は高圧散水は使用しないこと。
11. 照明に直接液体をかけないこと。
12. 灯体に直接洗剤を塗ったりスプレーしたりしないこと。
13. 高濃度アルコール、エチレングリコール、フェノール、ヨードフォア、グルタルアルデヒドベースの消毒剤の入った洗浄液の使用は避けること。[照明機器の破損につながる可能性があるため。]

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法
 - ・高温、多湿、直射日光および水濡れを避け、清潔な換気のよい場所に保管すること。
 - (温度-10～60℃、相対湿度 10 から 85 % 結露なきこと、気圧範囲 500～1,060 hPa)
2. 耐用期間
 - ・10 年[自己認証による。]

【保守・点検に係る事項】

1. 主電源を切った状態でヒューズを交換すること。灯体ヒューズの交換には 1Amp タイムラグ、灯体 1 又は 2 台を接続するウォールコントロールのヒューズ交換には 2Amp タイムラグ、灯体 3 又は 4 台を接続するウォールコントロールのヒューズ交換には 4Amp タイムラグを使用すること。
2. LED 交換の際、メインスイッチを OFF にして電球が冷めていることを確認してから交換を行うこと。
3. 本品の設置は許可を受けた者、若しくは設置について十分な経験があるものが行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 第一照明株式会社
住 所 〒174-0043 東京都板橋区坂下 1-32-26
T E L 03-3969-9223
F A X 03-3969-9269

製造業者 第一照明株式会社
住 所 〒174-0043 東京都板橋区坂下 1-32-26
T E L 03-3969-9223
F A X 03-3969-9269

取り扱い説明書を必ずご参照下さい。

取り扱い説明書を必ずご参照下さい。