

医療用品（04）整形用品
管理医療機器 歯科用保持ピン 35868000
ピンスクリュー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・本合金の配合成分及び類似成分に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと
- ・ノンプレシヤス合金を使用しないこと〔適合が悪い、タップが切れない〕
- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1) 製品形状



2) 成分及び分量


	成分	分量
OSV	金	60%
	銀	7%
	銅	14%
	パラジウム	6.5%
	亜鉛	2%
	白金	10.5%

【使用目的又は効果】

歯科修復物、補綴物等を歯に保持又は安定させるために用いること。

***【使用方法等】

- 1) 内冠と外冠を分離させます。
- 2) センタードリルを用いて、外冠に本品を挿入する位置決めポイントを作成します。
- 3) スパイラルドリルを用いて、外冠に形成されたポイントに注油をしながら、スクリューホールを作成します。
その際、下方から上方に向かってわずかに傾けてドリリングしてください。（図 1）
- 4) 内冠と外冠を組合せます。
- 5) 3) の外冠に形成したスクリューホールにセンタードリルを通し、内冠にも位置決めポイントを作成します。
- 6) 再度、内冠と外冠を分離させます。
- 7) スクリュータップをスクリュータップホルダーに装着し、外冠のスクリューホールのネジ切りを手動で行います。ネジ切りは指先に抵抗が感じられるまで時計方向に約 2 回転させ、その後逆回転にて切り屑を除去します。ネジ切りが完了するまでこの作業を繰り返します。
- 8) 再度、内冠と外冠を組合せます。
- 9) スクリュードライバーを用いて、本品をスクリューホールに挿入し、内冠と外冠を完全に固定します。

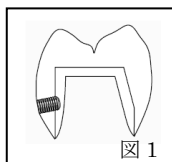

（使用方法に関連する使用上の注意）

- 1) 外冠の本品を挿入する部位の厚みは 2 mm 以上を確保すること。
- 2) スクリュードライバーを使用の際は、脱落等による誤飲に注意すること。
- 3) 作業中に発生したメタル塵等を患者が吸引しないよう、ラバーダムを使用すること。

***【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 本品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 2) 研磨の際は粉塵による人体への影響を避けるために吸塵装置及び防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないようにすること。目の損傷を防止するために防護メガネ等を使用すること。
- 3) 技工作業を行う際は換気設備の整った場所で作業を行うこと。
- 4) 補綴物を患者の口腔内に試適・装着する前に、補綴物の消毒を行うこと。

〈不具合・有害事象〉

〔有害事象〕

掌蹼膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- ・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所
連絡先：0120-382-118
製造業者：センザメトウ社（スイス連邦）
Cendres+Métaux SA