

**2021 年 7 月改訂（第 3 版）
*2017 年 6 月改訂（第 2 版）

医療機器届出番号 27B1X00041000361


**機械器具（70）歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用鑄造器関連器具 70754000
ペクトン プレス

**再使用禁止

****【禁忌・禁止】**
・再使用禁止。（08000626、08000627）

【形状・構造及び原理等】

1) 製品形状

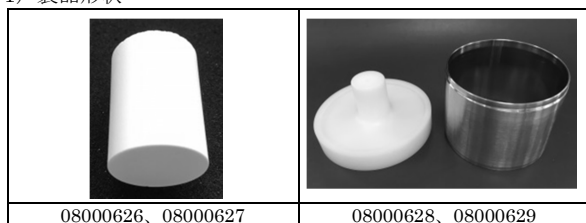

製品番号	製品名	材質
08000626	ペクトン デイスボ ーサブル プレス ランジャー 直径 12mm	①
08000627	ペクトン デイスボ ーサブル プレス ランジャー 直径 26mm	①
08000628	ペック プレス用モールド 200g	②、③
08000629	ペック プレス用モールド 600g	②、③

2) 材質

- ①：リン酸塩系埋没材
②：ステンレススチール
③：ポリアセタール樹脂

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために用いる鑄造用フラスコ、鑄造リング等をいう。

【使用方法等】

- 1) ワックスパターンを円錐台上に植立し、リングを装着する。
- 2) 1) にプレス用の埋没材を注ぎ入れ、硬化後、リングから取り外した埋没材をリングファーンネスに入れワックスパターンを焼却する。
- 3) プレス用インゴット及びプランジャーを埋没材に挿入し、プレスファーンネス内の所定の位置にセットする。
- 4) 通法に従いプレスを行う。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 技工作業を行う際は換気設備の整った場所で作業を行うこと。

***【保管方法及び有効期間等】**

〈保管方法〉

- ・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所
連絡先：0120-382-118
製造業者：センザメトウ社（スイス連邦）
Cendres+Métaux SA