


歯科材料（06）歯科用印象材料
一般医療機器 歯科印象採得用器材 70887000
CAVEX シリコン A ディスペンシング ガン

【形状・構造及び原理等】

1) 製品形状

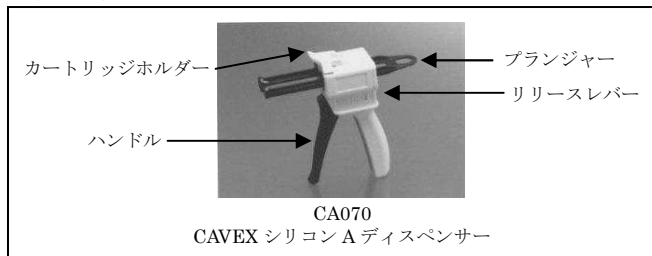

2) 材質

プラスチック／ステンレススチール

3) 原理

本品のハンドルを握ることにより、プランジャー部分が前へ進み、装着した専用カートリッジ内の練和物を押し出す。

【使用目的又は効果】

印象採得に使用する器具及び材料をいい、トレーを除く。

*** 【使用方法等】

- 1) リリースレバーを押し上げながら、プランジャーを引き戻してください。
- 2) カートリッジホルダーを指で押し上げて、カートリッジの凹部分が下になるように差し込み、カートリッジホルダーをカチッと音がするまで押し下げ、カートリッジを固定します。
- 3) カートリッジのキャップを取り外し、本品のハンドルを握ってペーストを少量吐出させ、左右両方のペーストが均一に吐出されたことを確認してください。片方のみが吐出した場合は、均等になるまでペーストを吐出させてください。
- 4) ミキシングチャネルをカートリッジの穴に合わせてはめ込み、時計方向へ 90° 回して固定してください。必要に応じてミキシングチャネルの先に口腔内注入チップを付けてください。
- 5) ハンドルを握り、練和物をミキシングチャネル先端から吐出させてください。握りにくい場合には、付属のスペーサー（赤色）をハンドルとカートリッジホルダーの間に挿入してください。
- 6) 作業終了後、使用済ミキシングチャネルを装着したままの状態保管するか、使用済ミキシングチャネルを取り外し、吐出口の余剰ペーストをガーゼ等で除去してから、カートリッジキャップを装着してください。
- 7) カートリッジをディスペンサーから外して保管する場合は、リリースレバーを押し上げながらプランジャーを完全に引き戻し、カートリッジホルダーを引き上げ、カートリッジを取り外してください。

〔本品と併用する材料〕

販売名	医療機器認証番号/届出番号
CAVEX シリコン A インジェクションタイプ	219AFBZX00033000
CAVEX シリコン A ヘビーボディ	219AFBZX00034000
ブループリントガム模型材セット	27B1X00041000559

（使用方法に関連する使用上の注意）

- 1) ハンドルを急激に排出すると、練和物が洩れたり、本品が壊れたりする可能性があるため、静かにハンドルを握り練和物を吐出させること。
- 2) 本品を使用する時はハンドル等に手指を挟まないように注意すること。

** 【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 本品に適合しないカートリッジは使用しないこと。
- 2) 本品の使用前後は、アルコールを含ませた脱脂綿等で清掃すること。滅菌すると変形する恐れがあります。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- ・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所
連絡先：0120-382-118
製造業者：CAVEX Holland BV（オランダ）
カーベックス社