


機械器具（68）印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科用咬合器 10201000

3 s h a p e アーティキュレーター

【形状・構造及び原理等】

1) 製品形状

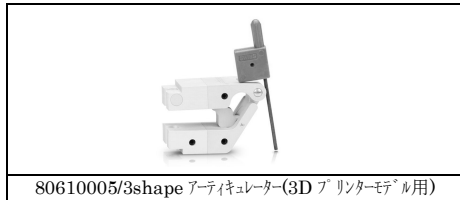

2) 原理：作製した模型を本品に装着し、アーム部分を動かすことにより模型上で上下顎歯列の相互位置的関係を再現することが出来る。



*【使用目的又は効果】

本品は蝶番付きの歯科用器具で、予め記録した顎間関係に従って上顎及び下顎模型を本品に取り付け、下顎運動をシミュレートする。

【使用方法等】

本品は、3Shape 社の「Model Builder」で設計、作製された模型に使用すること。

- 1) 作製した模型を本品にスライドさせて挿入する。上顎の模型はストレートのアームに、下顎の模型は角度付のアームに取り付ける。
- 2) 咬合紙と組み合わせて、1)の模型を上下左右に動かしながら、必要な咬合ポイントを探る。
- 3) 咬合器ストッパーを用いて、設計時の咬合ポイントで顎の動きを固定する。また、付属のツールで本品の調整スクリューを回すことにより、ストッパーの高さを調節することが出来る。

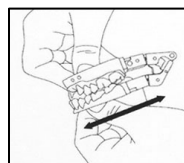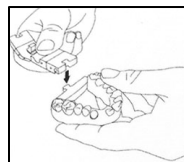

4) 使用後は乾いた布で拭く又はエアブローを行ってください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 補綴物の作製に際して患者の咬合機能を再現する以外の目的には使用しないこと。
- 2) 無理な角度、過度の加圧での使用は折れたり、曲がったりすることがあるのでしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- ・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所
連絡先：0120-382-118
製造業者：スリーシェイプ社（ポーランド）
3Shape Poland Sp. z o.o.