


機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 70722000
スクリュードライバー

＊【形状・構造及び原理等】


1) 製品形状

① スクリュードライバーコントラングル用

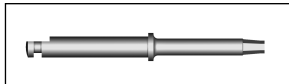

製品番号	製品名
HSM-09-CA	カバースクリュードライバーコントラングル用
HSM-20-CA	スクリュードライバーコントラ用（短）
HSMXS-20-CA	スクリュードライバーコントラ用（極短）
L-HSM-CA	プラマ FH スクリュードライバーコントラ用（短）

② スクリュードライバーフィンガー用

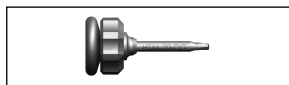

製品番号	製品名
HSMXS-09-DG	カバースクリュードライバーフィンガー用（極短）
HSM-09-DG	カバースクリュードライバーフィンガー用
HSMXS-20-DG	スクリュードライバーフィンガー用（極短）
HSM-20-DG	スクリュードライバーフィンガー用（短）
HSML-20-DG	スクリュードライバーフィンガー用（長）

③ スクリュードライバーラチェット用



製品番号	製品名
HSM-20-EX	スクリュードライバーラチェット用（短）
HSML-20-EX	スクリュードライバーラチェット用（長）
HSMXL-20-EX	スクリュードライバーラチェット用（極長）
L-HSM-EX	プラマ FH スクリュードライバーラチェット用（短）
L-HSML-EX	プラマ FH スクリュードライバーラチェット用（長）
L-HSMXL-EX	プラマ FH スクリュードライバーラチェット用（極長）

④ アバットメント用ドライバー



製品番号	製品名
AVV2-ABUT	ストリート PAD ドライバーラチェット用
BASCC-EX	ボールアタッチメントドライバーラチェット用

2) 材質

ステンレススチール
O リング（③、④）：シリコンゴム

＊【使用目的又は効果】

本品は、歯科インプラント用の補綴物の装着、固定などの目的に用いる器具である。

＊【使用方法等】

- 1) 本品は未滅菌であるため使用前に必ず洗浄、消毒、滅菌を行うこと。
- 2) スクリュードライバーコントラングル用（以下、①）を使用する際はハンドピースに、スクリュードライバーラチェット用（以下、③）及びアバットメント用ドライバー（以下、④）を使用する際はフィンガー用 6 角コネクター又はラチェットに接続する。尚、スクリュードライバーフィンガー用（以下、②）は、その他の器具に接続することなく使用可能である。

- 3) ①、②、③をキャップスクリュー、ヒーリングキャップ、スクリュー等のヘッド部に、④を対応するアバットメントのヘッド部に装着することにより把持し、インプラント又はアバットメントの上部へ装着し、ハンドピース又は手で回転させることにより締め付けを行う。
- 4) 使用後は、【保守・点検に係る事項】を参考に必ず洗浄、消毒、滅菌を行うこと。

＊【使用上の注意】

（重要な基本的注意）

- 1) インプラント手術を行うに当たり、包括的な患者評価と術前診断を行い、治療計画を行うこと。
- 2) 本品を口腔内で使用の際は、脱落等による誤飲に注意すること。

＊【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

- ・高温、多湿を避け、塵やほりのない清潔な場所に保管すること。

＊【保守・点検に係る事項】

- 1) 本品の使用後は、表面に付着している血液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに出来るだけ早く除去し、感染防止のために直ちに洗浄、消毒を行うこと。
- 2) 腐食の原因となるため、強アルカリ性、強酸性の洗浄剤や消毒剤の使用を避けること。
- 3) 超音波洗浄器等で洗浄をする際は、器具同士が接触して損傷することが無いよう注意すること。
- 4) 金属タワシやクレンザー等での清掃は行わないこと。
- 5) 洗浄液の残留がないよう流水にて十分にすすぎを行い、仕上げすすぎには蒸留水を用いること。
- 6) 洗浄、消毒後は汚れ・破損等を点検すると共に、腐食防止のため、速やかに圧縮空気乾燥させること。
- 7) 滅菌は、以下に例示する条件で行うこと。

滅菌方法	滅菌温度	滅菌時間	乾燥時間
高圧蒸気滅菌	121℃～124℃	20 分以上	15 分以上

- 8) 腐食した器具は滅菌しないこと。また滅菌後にも腐食がないか点検すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所

連絡先：0120-382-118

製造業者：スウェーデン&マルティナ社（イタリア）

SWEDEN & MARTINA S.p.A.