


マグネティックマレット用インスツルメント

【禁忌・禁止】

- ・本品の類似成分及び配合成分に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと

【形状・構造及び原理等】

1) 製品形状

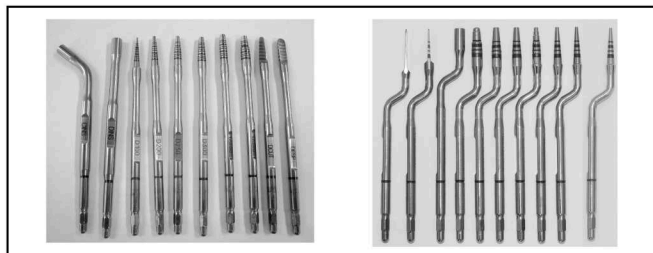

2) 製品番号

ヘキサゴン型		フランジ型		種類
直	曲	直	曲	
MM-PD-100P	MM-PC-100P	MM-F-100PD	MM-F-100PC	シャープチップ
MM-PD-100	MM-PC-100	MM-F-100D	MM-F-100C	
MM-PD-160	MM-PC-160	MM-F-160D	MM-F-160C	
MM-PD-200	MM-PC-200	MM-F-200D	MM-F-200C	
—	—	MM-F-230D	MM-F-230C	コニカルチップ
MM-PD-300	MM-PC-300	MM-F-300D	MM-F-300C	
—	—	MM-F-330D	MM-F-330C	
—	—	MM-F-360D	MM-F-360C	
MM-PD-23-45	MM-PC-23-45	—	—	ステップチップ
MM-PD-33-45	MM-PC-33-45	—	—	
MM-PD-36-55	MM-PC-36-55	—	—	
MM-PD-CUT	MM-PC-CUT	MM-F-CUTD	MM-F-CUTC	カッティングチップ
MM-PD-EXTR	MM-PC-EXTR	—	—	
—	—	MM-F-EXTR1D	MM-F-EXTR1C	チゼル
MM-PD-EXP1	MM-PC-EXP1	MM-F-EXP1D	MM-F-EXP1C	
MM-PD-EXP2	MM-PC-EXP2	MM-F-EXP2D	MM-F-EXP2C	
MM-PD-EXP3A	MM-PC-EXP3A	MM-F-EXP3AD	MM-F-EXP3AC	
MM-PD-EXTR2	MM-PC-EXTR2	MM-F-EXTR2D	MM-F-EXTR2C	
MM-PD-EXTR3	MM-PC-EXTR3	MM-F-EXTR3D	MM-F-EXTR3C	
MM-PD-EXTR5	MM-PC-EXTR5	MM-F-EXTR5D	MM-F-EXTR5C	インプラント 挿入用チップ
MM-PD-INS	MM-PC-INS	MM-F-INS	MM-F-INS	
MM-PD-INSSW	MM-PC-INSSW	MM-F-INSEXD	MM-F-INSEXC	
MM-PD-PB	—	MM-F-PBD	—	

セット付属品：MM-VASSOTO/マグネティックマレットチップ用トレイ

3) 材質：ステンレススチール

**【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの外科手術に用いる再使用可能な手動式の器具である。

**【使用方法等】

- 1) 本品は未滅菌のため、使用前に洗浄、消毒、滅菌を行うこと。
- 2) 本品は歯科インプラントの外科手術に用いる。
本品を専用の器具に装着し、作業端で骨等の硬組織の切断、切削、穿孔、圧縮等を行う。またインプラントと組合わせた本品を槌打することにより、骨にインプラントを埋入する。
- 3) 使用後は、【保守・点検に係る事項】を参考に必ず洗浄、消毒、滅菌を行うこと。

（使用方法に関連する使用上の注意）

- 1) チップにより骨にかかる圧力は、処置内容に応じて術者が決定すること。

- 2) 破損、変形などの原因となるため、必要以上の力を加えないこと。

**【使用上の注意】

（重要な基本的注意）

- 1) インプラント手術を行うに当たり、包括的な患者評価と術前診断を行い、治療計画を行うこと。

*【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

- ・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

**【保守・点検に係る事項】

- 1) 本品の使用後は、表面に付着している血液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに出来るだけ早く除去し、感染防止のために直ちに洗浄、消毒を行うこと。
- 2) 腐食の原因となるため、強アルカリ性、強酸性の洗浄剤や消毒剤の使用を避けること。
- 3) 超音波洗浄器等で洗浄をする際は、器具同士が接触して損傷することが無いよう注意すること。
- 4) 金属タワシやクレンザー等での清掃は行わないこと。
- 5) 洗浄液の残留がないよう流水にて十分にすすぎを行い、仕上げすすぎには蒸留水を用いること。
- 6) 洗浄、消毒後は汚れ・破損等を点検すると共に、腐食防止のため、速やかに圧縮空気乾燥させること。
- 7) 滅菌は、以下に例示する条件で行うこと。

滅菌方法	滅菌温度	滅菌時間	乾燥時間
高压蒸気滅菌	121℃～124℃	20分以上	15分以上

- 8) 腐食した器具は滅菌しないこと。また滅菌後にも腐食がないか点検すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所

連絡先：0120-382-118

製造業者：スウェーデン&マルティナ社（イタリア）

SWEDEN & MARTINA S.p.A.