

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント補綴用器具 70722000

S & Mロケーター用インスツルメント

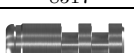
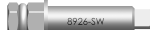
再使用禁止（8394、8505、8517、8530）

【禁忌・禁止】

- ・本品の類似成分及び配合成分に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと
- ・再使用禁止（8394、8505、8517、8530）

*【形状・構造及び原理等】

1) 製品形状

製品番号	製品名	材質
 8393	ロケーターコアツール	ステンレススチール
 8394	ロケーターアバットメント連結パーツ	プラスチック
 8505	ロケーターアバットメント印象キャップ	アルミニウム合金 プラスチック
 8517	ロケーターアバットメントパラレルピン	プラスチック
 8530	ロケーターアナログ	アルミニウム合金
 8926-SW	ロケーターアバットメントスクリュードライバースhort	チタン合金 シリコンゴム
 8927-SW	ロケーターアバットメントスクリュードライバースlong	チタン合金 シリコンゴム
 9530	ロケーター用アングルガイド	ステンレススチール

（単回使用に該当する製品）

8394、8505、8517、8530

**【使用目的又は効果】

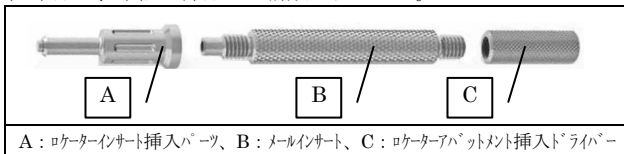
本品は、歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着・固定などの目的に用いる器具である。

*【使用方法等】

ロケーターコアツール

ロケーターアバットメント連結パーツ

1) 本品は、下記の部品から構成されている。



A：ロケーターキャップからリテーナーを取り外す際に用いる。Bを反時計方向に2回転させ、先端のピンが隠れるように緩める。ロケーターキャップにAの尖った先端部分を差し込み、リテーナーとかみ合わせることによりロケーターキャップからリテーナーを取り外す。Bを時計回りに回転させることにより、先端のピンが押し出され、リテ



ーナーが外れる。

B：ロケーターキャップにリテーナーを装着する際に用いる。リテーナーをロケーターキャップにカチッと音がするまで押し付けて装着する。

C：ロケーターアバットメントを把持する際に用いる。

Cの先端に、ロケーターアバットメント連結パーツを装着し、アバットメントを把持する。

ロケーターアバットメント印象キャップ

1) ロケーターアバットメント印象キャップがロケーターアバットメントに完全に装着されていることを確認する。

2) 通法に従い、印象を採得する。

ロケーターアバットメントパラレルピン

ロケーター用アングルガイド

1) ロケーターアバットメントにロケーターアバットメントパラレルピンを装着する。

2) ロケーター用アングルガイドを用いて、アバットメント間の角度を測定する。



ロケーターアナログ

1) 印象体内に取り込まれたロケーターアバットメント印象キャップに本品を装着する。

2) 通法に従い石膏を注入し、作業模型を作製する。

ロケーターアバットメント スクリュードライバースhort（短、長）

1) ロケーターコアツールにてロケーターアバットメントを装着後、最終的な締め付けを行う際に用いる。

**【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 本品は未滅菌の状態での出荷されるため、必要に応じて、本品の材質に適した洗浄・消毒を行うこと。
- 2) 本品を口腔内で使用の際は、脱落等による誤飲に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

- ・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所

連絡先：0120-382-118

製造業者：ゼスト アンカーズ エルエルシー、
ビルディング2（アメリカ合衆国）
ZEST ANCHORS LLC Building2