

歯科材料（06）歯科用印象材料  
一般医療機器 歯科印象採得用器材 70887000  
プレミアム印象キャップ


再使用禁止

【禁忌・禁止】  
・再使用禁止。

\*【形状・構造及び原理等】


1) 製品形状

①ピックアップ印象キャップ（F スクリュー付）

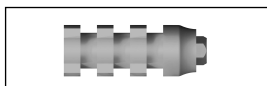


| 製品番号       | 製品名                              | 対応するスクリュー                                     |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| A-TG-TRA-M | プレミアム TG ピックアップ 印象キャップ MP        | A-TG-VTRA-180-20                              |
| A-TG-TRA-W | プレミアム TG ピックアップ 印象キャップ WP        | A-TG-VTRA-200-20                              |
| A-TRA-330  | プレミアム ピックアップ 印象キャップ ストレート φ 3.30 | VTRA2-180-15<br>VTRA2-180-20<br>VTRA2-180-MAN |
| A-TRAR-330 | プレミアム ピックアップ 印象キャップ アナミカル φ 3.30 |                                               |
| A-TRA-380  | プレミアム ピックアップ 印象キャップ ストレート φ 3.80 |                                               |
| A-TRAR-380 | プレミアム ピックアップ 印象キャップ アナミカル φ 3.80 |                                               |
| A-TRA-425  | プレミアム ピックアップ 印象キャップ ストレート φ 4.25 | VTRA2-200-15<br>VTRA2-200-20                  |
| A-TRAR-425 | プレミアム ピックアップ 印象キャップ アナミカル φ 4.25 |                                               |
| A-TRA-500  | プレミアム ピックアップ 印象キャップ ストレート φ 5.00 |                                               |
| A-TRAR-500 | プレミアム ピックアップ 印象キャップ アナミカル φ 5.00 |                                               |
| A-TRAR-600 | プレミアム ピックアップ 印象キャップ アナミカル φ 6.00 |                                               |

②プルアップ印象キャップ（スクリュー無）

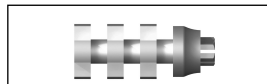

| 製品番号        | 製品名                             |
|-------------|---------------------------------|
| A-TG-TRAP-M | プレミアム TG プルアップ 印象キャップ MP        |
| A-TG-TRAP-W | プレミアム TG プルアップ 印象キャップ WP        |
| A-TRAP-330  | プレミアム プルアップ 印象キャップ ストレート φ 3.30 |
| A-TRAP-330  | プレミアム プルアップ 印象キャップ アナミカル φ 3.30 |
| A-TRAP-380  | プレミアム プルアップ 印象キャップ アナミカル φ 3.80 |
| A-TRAP-425  | プレミアム プルアップ 印象キャップ アナミカル φ 4.25 |
| A-TRAP-500  | プレミアム プルアップ 印象キャップ アナミカル φ 5.00 |

③プルオフ印象キャップ（F スクリュー付）

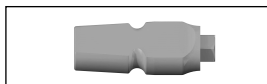

| 製品番号        | 製品名                           | 対応するスクリュー    |
|-------------|-------------------------------|--------------|
| A-TRAS-330  | プレミアム プルオフ印象キャップ ストレート φ 3.30 | VTRA2-180-10 |
| A-TRARS-330 | プレミアム プルオフ印象キャップ アナミカル φ 3.30 |              |
| A-TRARS-380 | プレミアム プルオフ印象キャップ アナミカル φ 3.80 |              |
| A-TRARS-425 | プレミアム プルオフ印象キャップ アナミカル φ 4.25 | VTRA2-200-10 |
| A-TRARS-500 | プレミアム プルオフ印象キャップ アナミカル φ 5.00 | VTRA2-200-10 |

| 製品番号        | 製品名                           | 対応するスクリュー    |
|-------------|-------------------------------|--------------|
| A-TRARS-600 | プレミアム プルオフ印象キャップ アナミカル φ 6.00 | VTRA2-200-10 |

④F スクリュー



| 製品番号             | 製品名                                    |
|------------------|----------------------------------------|
| VTRA2-180-10     | プレミアム プルオフ印象キャップ 用 F スクリュー M1.8        |
| VTRA2-200-10     | プレミアム プルオフ印象キャップ 用 F スクリュー M2.0        |
| VTRA2-180-15     | プレミアム ピックアップ 印象キャップ 用 F スクリュー M1.8     |
| VTRA2-200-15     | プレミアム ピックアップ 印象キャップ 用 F スクリュー M2.0     |
| VTRA2-180-20     | プレミアム ピックアップ 印象キャップ 用 F スクリュー M1.8 (長) |
| VTRA2-200-20     | プレミアム ピックアップ 印象キャップ 用 F スクリュー M2.0 (長) |
| VTRA2-180-MAN    | プレミアム ピックアップ 印象キャップ 用 ハンド F スクリュー M1.8 |
| A-TG-VTRA-180-20 | プレミアム TG ピックアップ 印象キャップ 用 F スクリュー M1.8  |
| A-TG-VTRA-200-20 | プレミアム TG ピックアップ 印象キャップ 用 F スクリュー M2.0  |

2) 材質

| 種類            | 材質                     |
|---------------|------------------------|
| ピックアップ 印象キャップ | チタン合金<br>(Ti-6Al-4V)   |
| プルオフ印象キャップ    |                        |
| F スクリュー       |                        |
| プルアップ 印象キャップ  | PEEK、チタン合金 (Ti-6Al-4V) |

【使用目的又は効果】

本品は印象採得に使用する器具である。

\*\*【使用方法等】

ピックアップ印象

- 1) 通法に従い患者用個人トレーを作製し、インプラント埋入位置に合わせて穴を開けたオープントレーにする。
- 2) ピックアップ印象キャップをインプラントに装着し、F スクリューで固定する。
- 3) 患者用個人トレーを使用し、印象採得する。
- 4) 印象材が硬化後、F スクリューをピックアップ印象キャップから取り外し、患者用個人トレーを口腔内から取り出す。この時ピックアップ印象キャップは、印象体内に取り込まれている。

プルアップ印象

- 1) 通法に従い患者用個人トレー（クローズドトレー）を作製する。
- 2) プルアップ印象キャップをインプラントショルダーにクリック音が出るまで押し込む。
- 3) 患者用個人トレーを使用し、印象採得する。
- 4) 印象材が硬化後、患者用個人トレーを口腔内から取り出す。この時印象キャップは、印象体内に取り込まれている。

プルオフ印象

- 1) 通法に従い患者用個人トレー（クローズドトレー）を作製する。
- 2) プルオフ印象キャップをインプラントに装着し、F スクリューで固定する。
- 3) 患者用個人トレーを使用し、印象採得する。
- 4) 印象材が硬化後、印象キャップが口腔内に固定されたままの状態、個人トレーを取り出す。
- 5) 口腔内に残っている印象キャップを取り外し、印象体に復位する。

（使用方法に関連する使用上の注意）

- 1) 破損、変形などの原因となるため、必要以上の力を加えないこと。

**\*\*【使用上の注意】**

〈重要な基本的注意〉

- 1) インプラント治療を行うに当たり、包括的な患者評価と術前診断を行い、治療計画を行うこと。
- 2) 本品は未滅菌の状態でお荷されるため、必要に応じて、本品の材質に適した洗浄、消毒を行うこと。
- 3) 本品を口腔内で使用の際は、脱落等による誤飲に注意すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

〈保管方法〉

- ・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所

連絡先：0120-382-118

製造業者：スウェーデン&マルティナ社（イタリア）

SWEDEN & MARTINA S.p.A.