


機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 70722000
（歯科インプラント技工用器材 70757000）
ダイナミック 補綴用補助パーツ

【形状・構造及び原理等】

1) 製品形状

①ダイナミック スキャンボディ

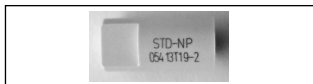


製品番号	製品名
30.412.001.01-2	ダイナミック スキャンボディ

②ダイナミック マイクロスキャンボディ



製品番号	製品名
52.410.104.01-2	ダイナミック マイクロスキャンボディ H10
52.412.104.01-2	ダイナミック マイクロスキャンボディ H12

③ダイナミック アダプター

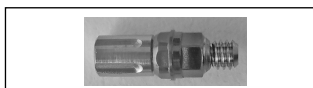

製品番号	製品名
50.311.031.01-2	ダイナミック アダプター マイクロスキャンボディ用

2) 材質

- ①、②：PEEK
③：チタン合金（Ti-6Al-4V）、マグネット

* 【使用目的又は効果】

本品は、歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着・固定などの目的に用いる器具である。

* 【使用方法等】

ダイナミック スキャンボディ

- インプラントネックが再現された作業模型上のアバットメントに、本品を固定する。
- 各種歯科用 CAD/CAM システムのスキャナーを用いて 1)の模型をスキャンする。
- 保存されたスキャンデータをもとに CAD 用のソフトウェアで補綴物を設計する。

ダイナミック マイクロスキャンボディ

ダイナミックアダプター

- ①本品は未滅菌であるため、使用前及び使用後には必ず洗浄、消毒、滅菌を行うこと。推奨する滅菌方法は、以下のとおりである。

滅菌方法	滅菌温度	滅菌時間
高圧蒸気滅菌	121℃	15 分間

- ダイナミック アダプタードライバーを用いてダイナミックアダプターを口腔内のインプラントに装着する。
- ダイナミックアダプター上にダイナミック マイクロスキャンボディを装着し、印象採得を行う。

* 【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- インプラント手術を行うに当たり、包括的な患者評価と術前診断を行い、治療計画を行うこと。
- 本品を口腔内で使用する際は、脱落等による誤飲に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- 高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所

連絡先：0120-382-118

製造業者：タラディウム エスパーニャ社（スペイン）

TALLADIUM ESPAÑA, S.L.,