

歯科材料 04 歯科用根管充填材料
管理医療機器 歯科用根管充填ガッターパーチャポイント (31872000)
ジーシー ガッターパーチャソフトポイント


【禁忌・禁止】

本品及び本品配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

概要： JIS T 6515 に適合する歯科用根管充填ガッターパーチャポイントであり、メインポイントとして用いる。

形状：

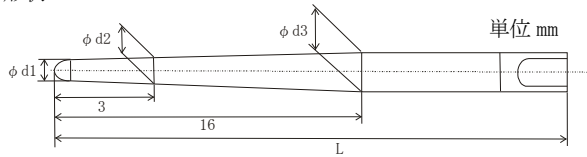

寸法：

標準ポイント (.02 テーパー)

単位 mm

表示番号	直径 d1	直径 d2	直径 d3	全長 L	色
030 (#30)	0.30	0.36	0.62	28	青
035 (#35)	0.35	0.41	0.67	28	緑
040 (#40)	0.40	0.46	0.72	28	黒
045 (#45)	0.45	0.51	0.77	28	白
050 (#50)	0.50	0.56	0.82	28	黄
055 (#55)	0.55	0.61	0.87	28	赤
060 (#60)	0.60	0.66	0.92	28	青
070 (#70)	0.70	0.76	1.02	28	緑
080 (#80)	0.80	0.86	1.12	28	黒
090 (#90)	0.90	0.96	1.22	28	白

.04 テーパー

表示番号	直径 d1	直径 d2	直径 d3	全長 L	色
02504 (#25)	0.25	0.37	0.89	28	赤
03004 (#30)	0.30	0.42	0.94	28	青
03504 (#35)	0.35	0.47	0.99	28	緑
04004 (#40)	0.40	0.52	1.04	28	黒
04504 (#45)	0.45	0.57	1.09	28	白

.06 テーパー

表示番号	直径 d1	直径 d2	直径 d3	全長 L	色
02506 (#25)	0.25	0.43	1.21	28	赤
03006 (#30)	0.30	0.48	1.26	28	青
03506 (#35)	0.35	0.53	1.31	28	緑
04006 (#40)	0.40	0.58	1.36	28	黒
04506 (#45)	0.45	0.63	1.41	28	白

d1：先端の仮想直径

d2：先端から 3 mm の直径

d3：先端から 16 mm の直径

【セット品】

.02 テーパー #30, #35, #40, #45, #50, #55 120 本／各 20 本入り
.04 テーパー #25, #30, #35, #40, #45 60 本／各 12 本入り
.06 テーパー #25, #30, #35, #40, #45 60 本／各 12 本入り

【単品】

.02 テーパー #30, #35, #40, #45, #50, #55, #60, #70, #80 各形態 120 本入り
.02 テーパー #90 60 本入り
.04 テーパー #25, #30, #35, #40, #45 各形態 60 本入り
.06 テーパー #25, #30, #35, #40, #45 各形態 60 本入り

主成分：酸化亜鉛、ガッターパーチャ

原理：抜髄後の根管に充填して根管を封鎖する。

特性

X線造影性	有り
-------	----

【使用目的又は効果】

抜髄後の根管に充填する。

【使用方法等】

- 1) 充分かつ適切に拡大・形成され、かつ消毒された根管内に拡大・形成時に同寸法の消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム水溶液等の薬液で消毒した本品（メインポイント）を挿入します。*
- 2) 本品と根管壁の間に、ブラガー、スプレダーなどのインストルメントを用いてアクセサリーポイントを充分に加圧充填し、空隙を緊密に封鎖します。
- 3) 根管口で、余剰な本品をヒートカッターなどを用いて除去します。

【使用方法等に関連する使用方法の注意】

- 1) 本品は、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム水溶液等の薬液で消毒してから使用すること。消毒方法の詳細は、使用する薬液の取扱説明書を参照すること。[感染症を引き起こす可能性がある]*
- 2) 本品は、オートクレーブまたは乾熱による滅菌を避けること。[劣化または変形してしまう可能性がある]
- 3) 彎曲度の大きい根管では、挿入時、側方加圧時に充分注意すること。
- 4) ポイント挿入時には、根尖を突出しないように注意すること。
- 5) 本品は、ピンセット等で確実に把持し、口腔内の落下等に注意すること。
- 6) 薬剤による消毒時、薬剤の残量等に充分注意すること。
- 7) ヒートカッター使用時には、火傷等に気をつけて使用すること。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
① 本品の使用により、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
② 本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、手袋等を用いて直接本品に触れないようにすること。また本品の使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
③ 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
④ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
⑤ 本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。（自己認証による）**

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本品は、直射日光を避け、乾燥した涼しい場所に保管する。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理する。

【有効期限】

本品は、包装に記載の使用期限*までに使用すること。

※（例 EXP. 2027-02 は
使用期限 2027 年 2 月 を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：大成歯科工業株式会社

主たる設計元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480