


機械器具 6 8 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象材用シリンジ (35860000)
ジーシー プラスチックシリンジ

【形状・構造及び原理等】

構造：

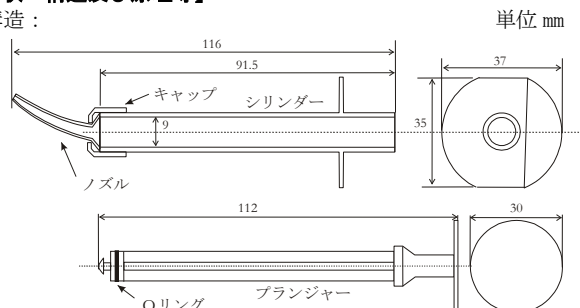

主成分

- ・シリンダー：ポリアセタール*
- ・ノズル：アセチルセルロース
- ・キャップ：ポリアセタール*
- ・プランジャー：ポリアセタール*
- ・Oリング：ゴム

原理：シリンダー内に充填した印象材をプランジャーで押し出し、印象を採得する。

【使用目的又は効果】

印象採得時にシリコン、ポリサルファイドなどのラバー系印象材及びアルジネート系印象材を注入するためのシリンジである。

【使用方法等】

1) 印象の採得

- ①練和した印象材を練和紙上に広げます。
- ②プランジャーを抜き、シリンダーを親指と人差指で持ち、50°～60°の角度で印象材を掻くようにして必要量をシリンダーの後部から填入します。
- ③すぐにプランジャーを差し込み、印象材を注入します。
※あらかじめOリングにワセリン・ココアバターなどを塗ると、プランジャーの動きがスムーズになります。
- ※Oリングが破損した場合は、付属の予備のOリングと交換します。

2) 清掃

- ①残った印象材を押し出し、完全に硬化するまで待ちます。
- ②ノズル先端に付着した印象材を取り除き、キャップを取り外します。
- ③プランジャーを一度押してから引き抜きます。
- ④付着した印象材は乾いた布で拭き取り、シリンダー内は付属の清掃用ブラシを使って清掃します。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) キャップ、ノズルが確実にシリンダーに装着されていることを確認の上、印象採得をおこなうこと。
- 2) 印象材を急激に押し出すと、過度な圧力によりシリンジ各部が破損する恐れがあるので、徐々に圧力を加え静かに注入すること。
- 3) 本品をポリサルファイド系印象材とともに使用した後、充分清掃せずに、引き続きシリコン印象材(付加型)にも使用すると、硬化遅延を起こすことがあるので注意すること。
- 4) ピストンを動かすとき、及び清掃の際は、筒の内部を傷つけないように注意すること。

【使用上の注意】

1) 使用注意 (次の患者には慎重に適用すること)

- ①本品の各主成分又は類似成分に対し、発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。*
- ②本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ③本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往症のある術者は本品を使用しないこと。また使用により過敏症状を起したときは、使用を中止し、すぐに医師の診断をうけること。

2) 重要な基本的注意

- ①印象採得時に、血液・唾液などが本品に付着した場合は、十分に洗浄後、必要に応じて消毒をおこなうこと。ただし、加熱消毒の場合はノズルを取り外して消毒すること。
- ②消毒剤及び洗浄剤の濃度、浸漬時間、温度などの使用方法は、各メーカーの指示に従い、正しく使用すること。
- ③本品は消毒済みのものを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・100℃以上の高温となる場所には置かない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：大成歯科工業株式会社

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：(お客様窓口) 0120-416480