


機械器具 6 8 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象材用シリンジ（35860000）

ジーシー ベリシリンジ

【形状・構造及び原理等】

構造：

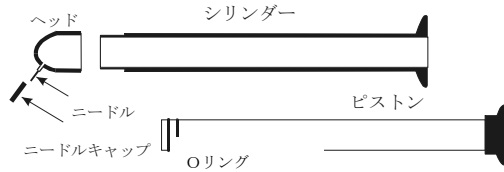

主成分

- ・シリンダー：ステンレス鋼、ナイロン
- ・ヘッド：ステンレス鋼、ナイロン
- ・ピストン：ステンレス鋼、ナイロン
- ・ニードル：鋼
- ・Oリング：JIS B 2401

原理：シリンダー内に充填した寒天印象材をピストンで押し出し、印象を採得する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：大成歯科工業株式会社

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480

【使用目的又は効果】

印象採得時に寒天印象材を注入するシリンジである。

【使用方法等】

- 1) ヘッド及びピストンをシリンダーからはずします。
- 2) 寒天スティックをシリンジに入れ、スティックの先端が 5mm ほど出るまでピストンを押しします。
- 3) ヘッド、ニードルキャップをしっかりと装着します。
- 4) シリンダーを 5～10 分間煮沸し、60℃で 10 分間以上係留します。
- 5) ニードルキャップをはずして、ニードルから寒天が押し出されるまでピストンを押し、印象を採得します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) ヘッド部が確実にシリンダーに装着されていることを確認の上、印象採得をおこなうこと。
- 2) シリンジ内に空気が残留すると、ピストンが加熱中に外れる恐れがあるので、寒天スティックのシリンジへの挿入時に空気が残留しないように注意すること。
- 3) 印象材を急激に押し出すと、過度な圧力によりシリンジ各部が破損する恐れがあるので、徐々に圧力を加え静かに注入すること。
- 4) ヘッドをはずす時は、必ずニードルキャップを装着すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
 - ①本品の類似材質に対し、発疹皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
 - ②本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①本品に対して、発疹皮膚炎などの過敏症の既往症のある術者は本品を使用しないこと。また使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
 - ②本品は、寒天溶解時 100℃、ストレージ時約 60℃となるため、火傷しないように注意すること。
 - ③口腔内への注入前に、注入温度が高すぎないよう必ず術者の手に少量取り、適温であることを確認すること。
 - ④印象採得時に血液・唾液などが本品に付着した場合は、充分に洗浄後、必要に応じて消毒をおこなうこと。
 - ⑤消毒剤及び洗浄剤の濃度、浸漬時間、温度などの使用方法是、各メーカーの指示に従い、正しく使用すること。