


ウィズダム・ニードル

禁 忌・禁 止

- 1.変色した鍼は使用しないで下さい。
- 2.包装が破損している時は使用しないで下さい。
- 3.製品を分解や改造しないで下さい。
- 4.研ぎ直しはしないで下さい。
- 5.妊婦には使用しないで下さい。

形 状、構造及び原理

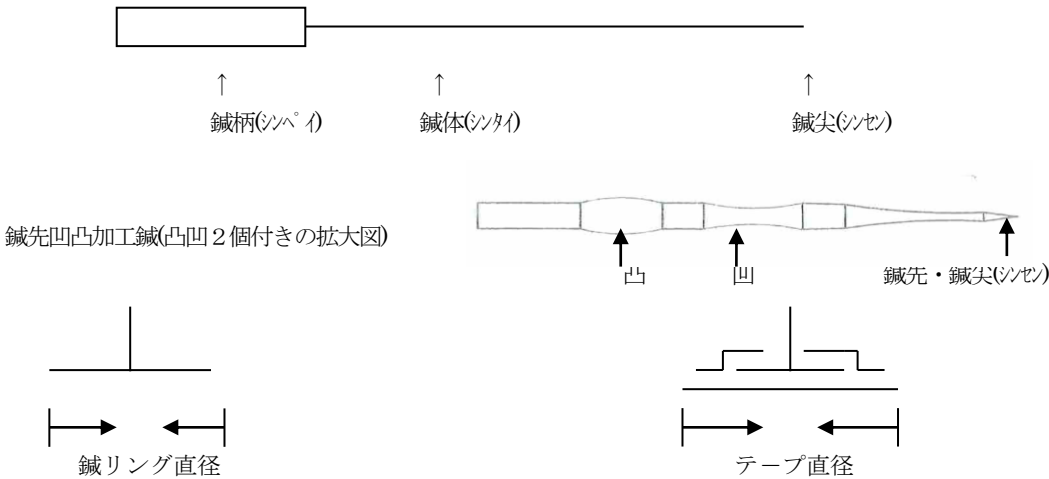

主な規格 鍼体ステンレス用（金、銀は弾性補正しています。）

太さ	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25
長さ	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30mm(1 寸)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39mm(1 寸 3 分)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48mm(1 寸 6 分)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

●使用目的又は効果

鍼灸治療全般の鍼として使用する。

●使用方法

- 1.ご使用前に必ず使用上の注意をお読み下さい。
- 2.再使用可能な商品であっても、開封後はできるだけ速やかに使用下さい。
- 3.ご使用前には必ずEOGガス・オートクレーブ・薬剤などで滅菌してご使用下さい。その際 機具等の使用方法をご確認下さい。また、再使用する際にも滅菌処理を行って下さい。
- 4.ご使用時には必ず鍼体(曲げ可能な製品のみ)曲げテストを行って下さい。
- 5.鍼体に傷がないかチェックし、傷が有れば折鍼の原因となりますので使用しないで下さい。
- 6.通電で使用了鍼は、折鍼の原因となりますので使用する機器の「取扱説明書」をご確認下さい。尚鍼体が金・銀の場合は通電には使用しないでください。
- 7.電触は鍼の材質による事ではなく、極性により電触は有無が決まる事を考慮して使用者責任で判断して下さい。

●使用上の注意

- 1.使用前には、製品の折れ、破損等を確認し、異常が認められた場合は使用しないで下さい。
- 2.ハリ、ムクミ、コリ等のある所に貼って下さい。
- 3.目、傷、湿疹等の箇所には使用しないで下さい。
- 4.一度使用した物は衛生上の観点から使用しないで下さい。
- 5.開封後はできるだけ速やかにご使用下さい。
- 6.廃棄する場合、自治体の廃棄方法に従って下さい。

●貯蔵・保管方法

- 1.直射日光や高温多湿の場所での保管は避けて下さい。
- 2.開封後は清潔な所に保管して下さい。

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等

製造販売業者 大宝医科工業株式会社

住所 〒731-0211 広島市安佐北区三入 1-25-9

電話番号 082-818-2511

製造業者 大宝医科工業株式会社

住所 〒731-0211 広島市安佐北区三入 1-25-9

