


* 機械器具 40
一般医療機器

医療用のこぎり
ギブスカッター用刃 JMDNコード:15774000

ギブスカッター替刃

(1)本製品を改造、曲げ、打刻(刻印)等の二次加工をすることは、損壊事故等の原因となりますので絶対に行わないで下さい。

【 形状、構造及び原理等 】

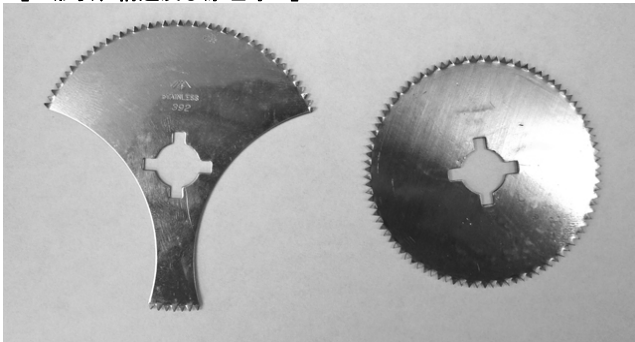

く 組成 く 13クロムステンレス鋼(ニッケルクロム)

く 寸法 く

		外径	内径	歯数
ギブスカッター替刃	大	64mm	9.5mm	120
〃	小	51mm	9.5mm	94
〃	深部用 大	64mm	9.5mm	45-7
〃	〃 小	51mm	9.5mm	34-7
〃	切断刃 大	42mm	6mm	54
〃	〃 中	36mm	6mm	46
〃	〃 小	29mm	6mm	36

板厚 各種とも0.6mm

歯部分の厚さ 各種とも1.0mm

【 使用目的又は効果 】

ギブス除去ツール(ギブスカッター)の一部で、ギブス材料を開する刃をもつ手術器具をいう。

** 【 操作方法等 】

く使用方法く

- (1)本製品を往復動型石膏切断器(ギブスカッター)にしっかりと取り付ける。
- (2)石膏部分に軽くあて、切断する。

く使用方法に関する使用上の注意く

- (1)必ず往復動型石膏切断器に取り付け、使用して下さい。一方向回転型器具を使用すると皮膚を切創します。
- (2)使用時に必要以上の応力をかけると、曲がり、破損等の原因となります。十分な安全性を考慮し、使用して下さい。
- (3)プラスチック製ギブスの切断に使用しますと寿命が極端に短くなります。

【 使用上の注意 】

く重要な基本的注意く

- (1)打刻、改造等の二次加工は損壊事故の恐れがあるため行わないで下さい。
- (2)切れ味が悪くなったと感じたときは使用を中止し廃棄して下さい。

(3)常に表面の変色、汚れ、傷、変形、破損等の有無を確認し異常あるときは使用を中止し、廃棄して下さい。

(4)アルカリ、酸性洗剤、消毒剤等は使用しないで下さい。

【 保管方法及び有効期間等 】

- (1)温度及び湿度の高い場所での貯蔵を避けて下さい。
- (2)貯蔵保管するさいは防錆処置を施して下さい。
- (3)貯蔵保管中、本製品に無理な応力を負荷しないで下さい。

【 保守・点検に係る事項 】

- (1)使用前後は必ず表面に変色、傷、変形等の異常がないか確認して下さい。
- (2)アルカリ、酸性洗剤、消毒剤等は本製品を腐蝕させる恐れがありますので使用しないで下さい。
- (3)金属たわし、磨き粉等は表面を傷つけ損傷の原因となりますので使用しないで下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者の名称：株式会社大和製作所

電話：026-245-1576