

* 機械器具 58
一般医療機器


整形用器具器械
整形外科用締結術器具 JMDNコード:35797000

ボルシャルト氏緊張弓

【 禁忌・禁止 】

(1)本製品を改造、曲げ、打刻（刻印）等の二次加工をすることは、折損、変形等の原因となりますので絶対に行わないで下さい。

【 形状、構造及び原理等 】

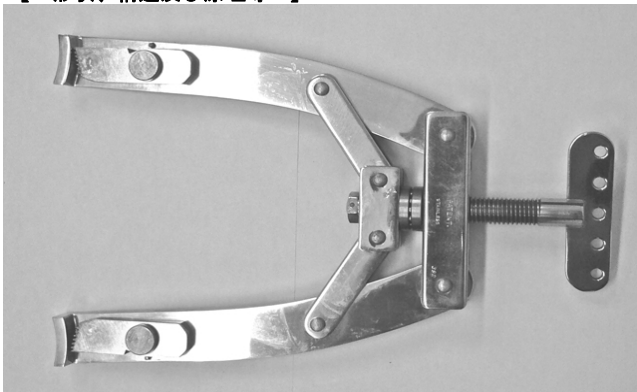

＜ 組成 ＞

蝶ねじ部	ステンレス鋼 18-8	クロム
本体部	ステンレス鋼 18-8	クロム
つめ	鋼（焼き入れ）	クロムメッキ仕上げ

＜ 寸法 ＞

サイズ	大	小
使用可能最大幅	19cm	11cm

【 使用目的又は効果 】

整形外科用締結ループ、クランプ又はワイヤの配置、固定又は結合に用いる外科用器具をいう。

** 【 操作方法等 】

＜使用方法＞

- (1)骨折手術にさいし、キルシュネル鋼線等を骨折部の骨に通し、その両端を本製品のつめ部分に固定する。
- (2)蝶ねじ部を回しキルシュネル鋼線を取り付ける。
- (3)その後、蝶ねじ部の引っ掛け穴に金具を掛ける。
- (4)滑車等を介して錘をつけ、その重さにより引っ張り強さを調整する。

＜使用方法に関する使用上の注意＞

- (1)使用前必要に応じて本製品を消毒後、使用してください。
- (2)キルシュネル鋼線を張るときには、張り過ぎないようにして下さい。張り過ぎますと、すべり、つめ部の損傷、本体の曲がり等の恐れがあります。
- (3)本製品はキルシュネル鋼線のすべりをおさえる機構になっていますが、より確実にするために、つめを軽く押えて取付、緊張牽引して下さい。
- (4)本製品は強度、安全性を考慮して使用して下さい。

【 使用上の注意 】

＜重要な基本的注意＞

- (1)使用後は必ず洗浄し十分に乾燥させてください。そのままにしておくと、腐蝕、錆等の原因となります。

【 保管方法及び有効期間等 】

- (1)温度及び湿度の高い場所での貯蔵を避けて下さい。
- (2)使用後は腐蝕防止のため、必ず洗浄、乾燥して下さい。
- (3)長期にわたって使用しないときは、つめ部に錆止めを施して下さい。

【 保守・点検に係る事項 】

- (1)使用前後には必ず汚れ、傷、変形等の異常がないか確認してください。
- (2)アルカリ、酸性洗剤、消毒剤等は本器を腐蝕させる恐れがありますので使用しないで下さい。
- (3)金属たわし、磨き粉等は本製品の表面を傷つけ、メッキのはがれ、錆、損傷等の原因となりますので使用しないで下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者の名称：株式会社大和製作所
電話：026-245-1576