


* 機械器具 52
一般医療機器

医療用拡張器
医療用拡張器 JMDNコード:70969001

ブリュニングス氏拡大耳鏡

本製品を改造、曲げ、打刻（刻印）、切削等の二次加工することは、故障、事故等の原因となりますので絶対に行わないで下さい。

【 形状、構造及び原理等 】

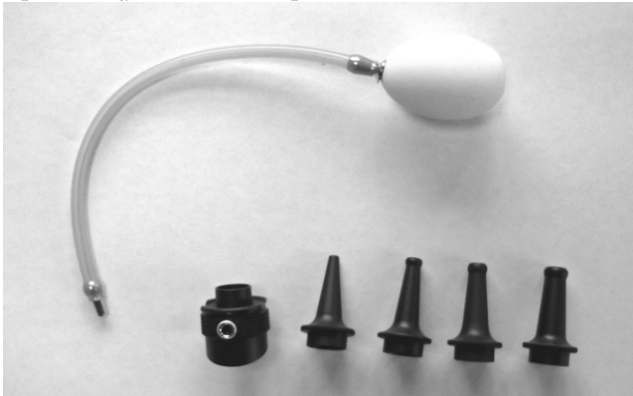

＜ 組成 ＞

レンズ部及び耳鏡部	黄銅	黒コーティング処理
テーパ部	黄銅	クロムメッキ仕上げ
レンズ	ガラス	
ゴム球取付金具	黄銅	クロムメッキ仕上げ
送気管	シリコン管	
送気球	天然ゴム	

＜ 寸法 ＞

レンズ部外径	24mm			
レンズ径	17.5mm			
耳鏡部先端の寸法	(内外径mm)			
	特大	大	中	小
内 径	6.0	5.0	4.0	2.5
外 径	8.5	7.0	6.0	3.5

【 使用目的又は効果 】

拡張するために用いる器具をいう。電動式のものを除く。本品は再使用可能である。

**【 操作方法等 】

＜使用方法＞

- (1) 本製品を必要に応じ、滅菌消毒を行う。
- (2) 診察する耳に合わせてテーパ部を選択し、耳鏡本体に取付ける。
- (3) 耳鏡部を耳に挿入しレンズ効果により拡大された外耳、中耳、内耳を観察し、診断、処置等を行う。
- (4) ときにより、送気球より空気を送り、外耳等にある耳垢等の異物を吹き飛ばし観察、診断を行う。

＜使用方法に関する使用上の注意＞

- (1) 本製品は未滅菌です。消毒後、使用してください。
- (2) 消毒はオートクレーブ滅菌は行わず、アルコール清拭消毒をしてください。
- (3) 送気球より空気を送るときは、徐々に様子を見ながら慎重に軽く送って下さい。強く送ると鼓膜等の損傷の原因となります。

ます。

【 使用上の注意 】

＜重要な基本的注意＞

- (1) 使用後は必ず洗浄し十分に乾燥させてください。そのままにしておくと、腐蝕、錆等の原因となります。
- (2) 本製品を改造、曲げ、打刻（刻印）、切削等の二次加工することは、故障、事故等の原因となりますので絶対に行わないで下さい。

【 保管方法及び有効期間等 】

- (1) 温度及び湿度の高い場所での貯蔵を避けて下さい。
- (2) 使用後は腐蝕防止のため、必ず洗浄、乾燥して下さい。

【 保守・点検に係る事項 】

- (1) 使用前後には必ず汚れ、傷、変形等の異常がないか確認してください。
- (2) アルカリ、酸性洗剤、消毒剤等は本器を腐蝕させる恐れがありますので使用しないで下さい。
- (3) 金属たわし、磨き粉等は表面を傷つけ損傷の原因となりますので使用しないで下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者の名称：株式会社大和製作所
電話：026-245-1576