

* 機械器具 37
一般医療機器

医療用匙
スプーン型鋭ひ及び鈍ひ JMDNコード:41716001

クルップ式有窓鈍匙


【 禁忌・禁止 】

(1)本製品を改造、曲げ、打刻（刻印）、切削等の二次加工をすることは、故障、事故等の原因となりますので絶対に行わないで下さい。

(2)本製品は曲げて使用するものです。金属疲労等により折損することがあります。次のようなときは使用しないで下さい。

- ①亀裂のできたとき
- ②メッキの剥れがあったとき
- ③曲げたときに表面に凹凸を感じたとき
- ④曲げたときに硬く感じたとき
- ⑤その他異常を感じたとき

【 形状、構造及び原理等 】

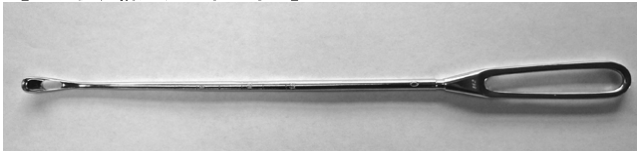

＜ 組成 ＞

取手部	黄銅	クロムメッキ仕上げ
ガイド部	銅	"
搔爬部	洋白	"

＜ 寸法 ＞

全 長	29cm
うち取手部長さ	10cm

搔爬部の大きさによる種類

No. 000	No. 00	No. 0	No. 1	No. 2	No. 3
---------	--------	-------	-------	-------	-------

搔爬部のおよその幅。

No. 000:5.5mm	No. 00:6.5mm	No. 0:8mm
No. 1:10mm	No. 2:12mm	No. 3:14mm

【 使用目的又は効果 】

遠位端がスプーン型(皿型)でハンドルの付いた器具をいう。
手術器具、投薬用器具として用いる場合もあれば、医療部門で
他の機能として用いる場合もある。本品は再使用可能である。

**【 操作方法等 】

＜使用方法＞

- (1)本製品を消毒する。
- (2)ガイド部の形状を整える。
- (3)先端の搔爬部を子宮内に挿入し搔爬を行う。

＜使用方法に関する使用上の注意＞

- (1)本製品は未滅菌です。消毒後、使用してください。
- (2)使用目的（手術等の医療行為）以外の目的で使用しないで下さい。

【 使用上の注意 】

＜重要な基本的注意＞

- (1)使用後は必ず洗浄し十分に乾燥させてください。そのままにしておくと、腐蝕、錆等の原因となります。
- (2)使用後は必ず破損の有無を確認し、万一、破損部が体内に脱落した恐れのあるときは直ちに除去してください。
- (3)本製品は金属疲労により折損することがあります。亀裂、メッキの剥れ、表面の凹凸、硬化等の異常を感じたときは、直ちに使用を中止して下さい。

【 保管方法及び有効期間等 】

- (1)温度及び湿度の高い場所での貯蔵を避けて下さい。
- (2)使用後は腐蝕防止のため、必ず洗浄、乾燥して下さい。

【 保守・点検に係る事項 】

- (1)使用前には必ず汚れ、傷、変形等の異常がないか確認してください。
- (2)アルカリ、酸性洗剤、消毒剤等は本器を腐蝕させる恐れがありますので使用しないで下さい。
- (3)金属たわし、磨き粉等は表面を傷つけ、メッキの剥れ、損傷等の原因となりますので使用しないで下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者の名称：株式会社大和製作所
電話：026-245-1576