

77型シリンジ


【警告】

ノズルが確実に取り付けられていることを確認すること。

【形状・構造及び原理等】

**1) 外観図


(ラッチ式)

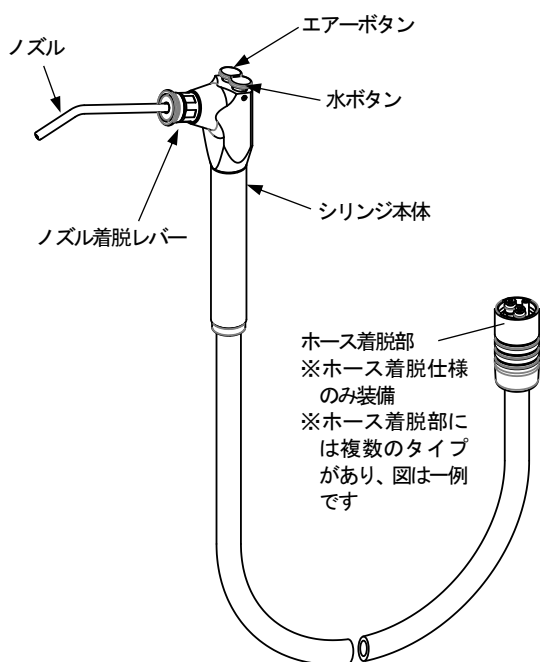

ノズル部の形状には次の種類もあります。

(ナット式)

(ナット式0リング追加タイプ)

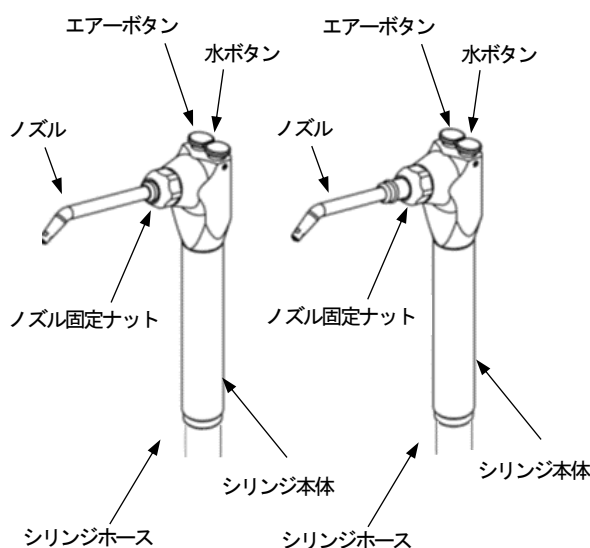

2) 作動・動作原理

歯科用ユニットより供給された水及びエアは、水ボタン、エアータンを押すことにより、それぞれのバルブを開きノズル先端より噴出し、水ボタン、エアータンを同時に押した場合、噴霧状態で噴出する。

水ボタン、エアータンの押し込み量により、水及びエアまたはスプレー状態の噴出量を調整する。

**3) 本製品の質量

シリンジ本体部・ノズル部 : 195g ±20g

ホース部 (ホース長 1300mm の場合) : 90g ±20g

<動作保証条件>

下記の条件にて使用すること。(但し、結露しないこと)

周囲温度: 0~40℃

相対湿度: 10~95%

気 圧: 700~1060 hPa

【使用目的又は効果】

本製品は、歯科用ユニットに接続し、歯科治療での治療部位などの洗浄及び異物を除去するために用いる。

【使用方法等】

*・操作方法

- ① 水ボタンを押すと水が、エアータンを押すとエアが噴出する。両方のボタンを同時に押すと水とエアがスプレー状態で噴出する。
- ② ボタンの押し込み量により、水及びエアの流量を調整する。

【使用上の注意】

・滅菌の注意事項

- ① 本製品は、ノズルのみオートクレーブ滅菌可能です。感染予防のため、患者さんごとにオートクレーブ滅菌を行うこと。
- ② 本製品は未滅菌で供給されますので、使用前に洗浄及び滅菌をすること。

・使用前の注意事項

- ① ノズルが確実に装着されているのを確認する。
- ② 水ボタンおよびエアータンを押し、水、エア、スプレーが正常に噴出することを確認すること。また、ボタンを離すと水、エアの噴出が止まることを確認する。

・使用中の注意事項

- ① シリンジホースに無理な力を加えないこと。(ホースの抜け/切れのおそれがあるため)

**・使用後の注意事項

- ① (ラッチ式) ノズル着脱レバーを操作してノズルを引き抜き、ノズルの残留物を取り除き、流水で清掃したあと、高圧蒸気滅菌をする。
(ナット式、ナット式0リング追加タイプ) ノズル固定ナットを反時計回りに回し、ノズル固定ナットがシリンジ本体から外れたらノズルを引き抜き、ノズルの残留物を取り除き、流水で清掃したあと、高圧蒸気滅菌をする。
- ② 本製品が汚れた場合は、消毒用エタノールまたは当社指定の洗剤で清掃すること。

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。

【保管方法及び有効期間等】**耐用期間**

正規の保守点検を行った場合に限り、製造出荷後7年間〔自己認証（社内データ）による〕とする。

【保守・点検に係わる事項】***1) 使用者による保守点検事項**

使用者による保守点検項目の概要は、下記のとおりとする。

詳細については、取扱説明書を参照し、使用前に必ず読むこと。

保守点検内容		保守点検頻度
1	水／エアーの漏れ確認	始業前
2	水／エアーの流量確認	始業前
3	ノズルのロック状態確認	患者ごと
4	外観、汚れ、薬品／薬剤の除去	終業後

2) 業者による保守（定期）点検事項

1年ごとの定期点検を当社または当社の指定する業者に依頼すること。

詳細は取扱説明書を参照すること。

【製造販売業者および製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者

ベルモントテクノロジー株式会社

TEL：03-3637-7111

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。