


バキュームチップ

【警告】

患者ごとに、指定する方法および条件で、洗浄などの処理を行った上で滅菌すること。
 [感染予防のため]


【形状、構造及び原理等】

形状

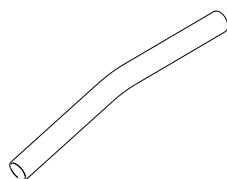


バキュームチップ 15°

外径：φ11mm
全長：139mm
材質：ステンレス

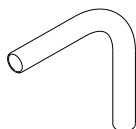


バキュームチップ 90°

外径：φ11mm
全長：80.5mm
材質：ステンレス

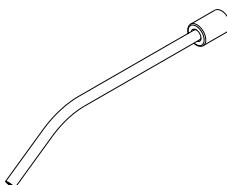

バキュームチップ 外科用穴なし

外径：φ11mm、φ5mm（先端部）	[穴なし／穴あり]
全長：135mm	[穴なし／穴あり]
材質：黄銅	[穴なし／穴あり]

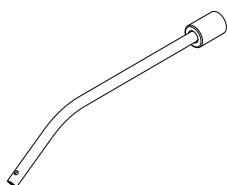


バキュームチップ 外科用穴あり

【使用目的又は効果】

歯科用ユニットのバキュームハンドピースに接続して、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。本製品は滅菌後に再使用する。

【使用方法等】

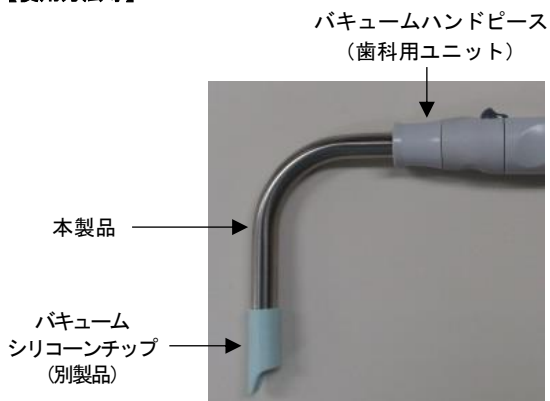

1. 本品の外径（φ11mm）に合う歯科用ユニットのバキュームハンドピースに接続し、歯科用ユニットを操作して、口腔内の水分や切削片などを先端部より吸引する。

2. バキュームチップ 15°、バキュームチップ 90° は、先端部にバキュームシリコンチップ（別製品）を取付け吸引する。
3. バキュームハンドピースから取り外し、洗浄、消毒および 134℃／3 分のオートクレーブ滅菌を患者ごとに行う。

【使用上の注意】

- ・滅菌の注意事項
 - ①本製品は、オートクレーブ滅菌可能です。感染予防のため、患者ごとにオートクレーブ滅菌を行うこと。
 - ②本製品は未滅菌で供給されますので、使用前に洗浄および滅菌をすること。
 - ③オートクレーブ滅菌以外の滅菌は行わないこと。
- ・使用前の注意事項
 - ①バキュームハンドピースへ確実に接続し、がたつきがなく簡単に外れないことを確認してから使用すること。
 - ②汚れ、傷、破損などの有無を確認すること。
- ・使用中の注意事項
 - ①本製品のみならず、接続している関連機器全般と患者の状態を常に監視し、異常が見られた場合は直ちに使用を中止すること。
 - ②本製品を口腔内に強く押し当てて使用しないこと。また、継続的な局部への吸引を行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ①洗浄、滅菌後の製品は、水分を除去し、十分乾燥させてから、滅菌状態を保つことができる容器にに入れて保管すること。
- ②使用回数に関わらず、傷、破損などが見られたら、使用せずに廃棄すること。

【保守・点検に係る事項】

- 〈使用者による保守点検事項（日常点検）〉
 外観の劣化状態を毎使用前後に確認すること。
 〈洗浄、消毒、および滅菌方法〉

1. 目視で確認できる汚れは、水道水ですすぎながらブラシなどで取り除く。
 2. 消毒剤に 5 分間浸漬させて、水道水で十分にすすぎ洗いを行う。
 3. 滅菌パウチに入れオートクレーブ滅菌を行う。（推奨滅菌条件：134℃／3 分）
- ・消毒剤を使用する時は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。消毒剤はアルカリ性のものを推奨します。
 - ・オートクレーブ滅菌器の取扱説明書を参照し、適切な条件、状態で滅菌を行うこと。
 - ・高温での乾燥は、本製品の材質に影響を与えるので、乾燥工程は 135℃以下で行うこと。

【製造販売業者および製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者
 ベルモントテクノロジー株式会社
 TEL：03-3637-7111
 販売業者