

SYR-20 シリンジ


【警告】

ノズルが確実に取り付けられていることを確認すること。


【形状・構造及び原理等】

1) 外観図

(アングルタイプ)

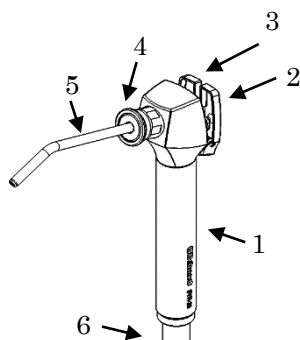


(ストレートタイプ)

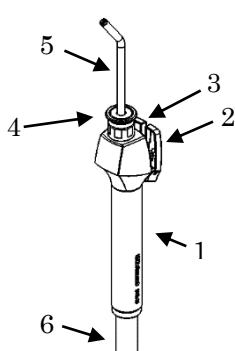


ホース部

(直結ホースタイプ)

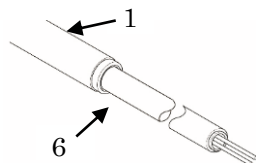

(着脱ホースタイプ)

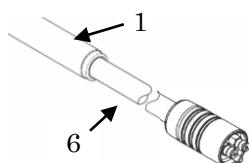

- 1 シリンジ本体
- 2 Wレバー
- 3 Aレバー
- 4 ノズル着脱レバー
- 5 ノズル
- 6 シリンジホース

2) 作動・動作原理

Wレバー、Aレバーを押すことによりそれぞれのバルブを開き、歯科用ユニットより供給された水及びエアーをノズル先端より噴出する。

Wレバー、Aレバーの押し込み量により、水及びエアーまたはスプレー状態の噴出量を調整する。Wレバー、Aレバーを同時に押した場合、噴霧状態で噴出する。

3) 本製品の質量

225 g ± 20 g (直結ホースタイプ)

235 g ± 20 g (着脱ホースタイプ)

<動作保証条件>

下記の条件にて使用すること。(但し、結露しないこと)

周囲温度： 0～40℃

相対湿度： 10～95%

気 圧： 700～1060 hPa

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用ユニットに接続し、歯科治療における治療部位等の洗浄及び異物の除去に用いる。

【使用方法等】

・使用前

1. 本品が歯科用ユニットと接続されていることを確認し、ノズルを取り付ける。ノズルが固定され、抜けないことを確認する。
2. Wレバー、Aレバーを押し、水、エアーが噴出されることを確認する。また、それぞれのレバーを離すと噴出が止まることを確認する。

・操作方法

Wレバーを押すと水が、Aレバーを押すとエアーが噴出する。両方のレバーを同時に押すと水とエアーがスプレー状態で噴出する。レバーの押し込み量により、水及びエアーの流量が調整できる。

・使用後

1. 薬剤、薬品や汚れが付着している場合は、消毒用エタノール又は当社指定の洗浄剤で清掃する。
2. ノズル着脱レバーを操作して、ノズルを引き抜く。
3. ノズルの残留物を取り除き、流水又は酵素クリーナーを入れた超音波洗浄器で洗浄したあと、高圧蒸気滅菌を行う。滅菌を行う際は必ず滅菌パウチに入れること。

【使用上の注意】

- ① 本品は、ノズルのみオートクレーブ滅菌が可能です。使用前に洗浄及び滅菌をすること。
- ② 感染予防のため、ノズルは患者さんごとにオートクレーブ滅菌を行うこと。
- ③ シリンジホースに無理な力を加えないこと。(ホースの抜け／切れのおそれがあるため)

【保管方法及び有効期間等】

耐用期間

正規の保守点検を行った場合に限り、製造出荷後7年間〔自己認証(社内データ)による〕とする。

【保守・点検に係る事項】

1) 使用者による保守点検事項

使用者による保守点検項目の概要は、下記のとおりとする。

詳細については、取扱説明書を参照し、使用前に必ず読むこと。

保守点検内容	保守点検頻度
1 水／エアーの漏れ確認	始業前
2 水／エアーの流量確認	始業前
3 ノズルのロック状態確認	患者ごと
4 外観、汚れ、薬品／薬剤の除去	終業後

2) 業者による保守(定期)点検事項

1年ごとの定期点検を当社または当社の指定する業者に依頼すること。詳細は取扱説明書を参照すること。

【製造販売業者および製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者
ベルモントテクノロジー株式会社
TEL：03-3637-7111

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。