


【警告】

- 1) 本製品の洗浄・消毒作業を十分行うこと。
[本製品の洗浄・消毒作業が不十分な場合、菌の発生により人体に影響を及ぼす場合があります。]
- 2) 洗浄液・クスコを患者に使用する前に、必ず適温になったことを手指で確認してから、使用すること。
[患者がやけどするおそれがあります。]


【形状・構造及び原理等】

〈装置外観図〉


湿式クスコウォーマー仕様

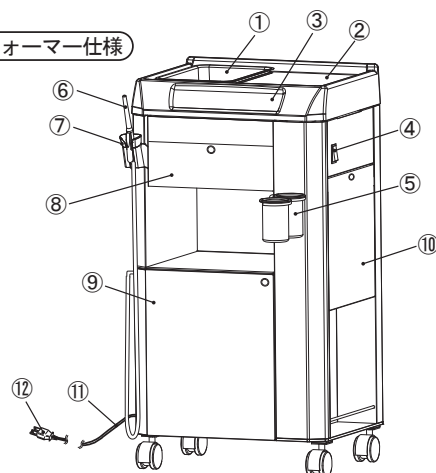

乾式クスコウォーマー仕様

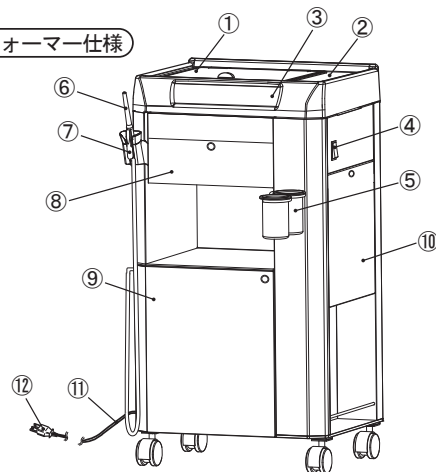

操作パネル

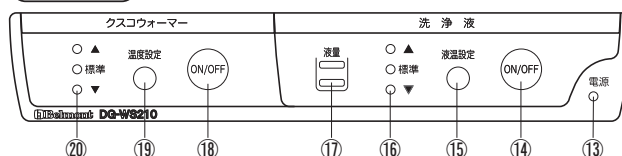

- ①クスコウォーマー
- ②カウンター
- ③操作パネル
- ④電源スイッチ
- ⑤鉗子立て
- ⑥洗浄嘴管
- ⑦嘴管ホルダー
- ⑧引き出し
- ⑨前扉
- ⑩サイド収納
- ⑪電源コード
- ⑫電源プラグ
- ⑬電源ランプ
- ⑭洗浄液保温スイッチ
- ⑮洗浄液液温設定スイッチ
- ⑯洗浄液液温設定表示ランプ
- ⑰洗浄液液量残量表示ランプ
- ⑱クスコ保温スイッチ
- ⑲ウォーマー温度設定スイッチ
- ⑳ウォーマー温度設定表示ランプ

湿式クスコウォーマー仕様

- (1) 本体寸法・・・幅510 mm×奥行400 mm×高さ950 mm
- (2) 質量・・・66kg
- (3) 電気定格・・・AC100V 50/60Hz 450VA
- (4) 動作原理・・・電動モータ式

乾式クスコウォーマー仕様

- (1) 本体寸法・・・幅510 mm×奥行400 mm×高さ960 mm
- (2) 質量・・・65kg
- (3) 電気定格・・・AC100V 50/60Hz 280VA
- (4) 動作原理・・・電動モータ式

<性能>

●クスコウォーマー部

ヒーター

- ・湿式クスコウォーマー仕様・・・AC100V 200VA
- ・乾式クスコウォーマー仕様・・・AC100V 42.5VA

温度設定機能・・・3段階

●洗浄液保温部

ヒーター・・・AC100V 200VA

ポンプ部・・・AC100V 26VA

基準吐出量 800ml/分(50Hz)
1000ml/分(60Hz)

給水タンク容量・・・3L

液温設定機能・・・3段階

液温感熱遮断器・・・通水遮断温度 45℃以上

●コントロール操作電圧・・・DC5V

●電撃に対する保護形式・・・クラス I

<動作保証条件>

下記の条件にて使用すること。(但し、結露しないこと)

温度・・・10℃～40℃

湿度・・・10%～90%

* 気圧・・・700hPa～1060hPa

【使用目的又は効果】

本製品は、身体の一部に適用する液体を電動で吐出し、衛生状態の維持、または治療の一環として用いることを目的としています。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用方法等】

〈設置方法〉

- ・本製品は、必ず平らで丈夫な床の上に設置すること。
床面が5°以上傾いている場所へ設置すると本製品が転倒するおそれがあります。
(取扱説明書の「設置」の頁を参照のこと。)
- ・本製品は移動するとき以外、必ずキャスター(ストッパー付)をロックして固定させること。

〈使用方法〉

- ①電源プラグをアース端子付コンセントに差し込み、電源スイッチを入れます。
- ②診断・処置終了後は電源スイッチを切り、電源プラグをアース端子付コンセントから抜いてください。

機器の詳細な操作方法及び使用方法については付属の取扱説明書「操作方法」の項を必ず読むこと。

* * 【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 本製品は出荷時に消毒・滅菌などがされていないので、使用前に清拭作業を行なうこと。
- 2) 薬液等が樹脂や金属塗装面に付着した場合、樹脂が変質したり、塗装が剥れ、内部金属が腐食する恐れがあるので、速やかに清拭してください。
- * * 3) 他の医用電気機器と併用する場合、電磁的影響による不正確な動作が発生することがないか使用前に確認すること。
- 4) 患者が操作パネル・洗浄嘴管に触れたりしないように、常に患者から目を離さないこと。
- 5) クスコトレイ内に水を入れる時は、水がこぼれないようにしてください。もし製品内に水がこぼれた場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてからすぐに拭き取ること。(湿式クスコウーマー仕様のみ)
[絶縁不良や温度調節不良の原因になります。]
- 6) クスコトレイ内に水を入れて使用しないでください。製品内に水が入った場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてからすぐに拭き取ること。(乾式クスコウーマー仕様のみ)
[絶縁不良や温度調節不良の原因になります。]
- 7) ウォーマートレイに水を入れて使用しないでください。本製品内に水が入った場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてからすぐに拭き取ること。
[絶縁不良や温度調節不良の原因になります。]
- 8) 給水タンクのフタを締める際は、締めた後に空気が内部に入らないように、しっかり締めること。
[空気が内部に入ると洗浄液があふれて感電や絶縁不良、温度調節不良の原因になります。]
- 9) 給水タンクに洗浄液を入れるときは、加熱タンクから給水タンクを外してから行ってください。また、加熱タンクに直接洗浄液を入れないでください。
[加熱タンクから外さない状態で給水タンクのフタをゆるめて、洗浄液を入れると、洗浄液があふれて、感電や絶縁不良、温度調節不良の原因になります。]
- 10) 本製品は必ずキャスター(ストッパー付)をロックして安定させること。
- 11) 洗浄液・クスコを患者に使用する際は、必ず適温になったこと手指で確認してから、使用すること。
[患者がやけどをするおそれがあります。]
- 12) タンクヒーター・クスコヒーター面を清拭するときは、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて、十分に冷えてから行ってください。

* 【保管方法及び有効期間等】

〈耐用期間〉

- ・本製品の耐用期間は、正規の保守点検をした場合に限り10年間です。[自己認証(当社データ)による]
- ・配管、およびスイッチ類は使用環境によって異なります。

【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書の「保守点検」の項を使用前に必ず読むこと。

- 1) 本製品および部品は必ず日常点検を行うこと。
 - ・設置状態の確認。
 - ・電源スイッチの確認。
 - ・洗浄液が吐出するかの確認。
 - ・洗浄液の温度の確認。
 - ・クスコウーマーの温度の確認。
 - ・給水タンク・加熱タンク・配管ライン・洗浄嘴管の内部の洗浄、および消毒。
 - ・外観部品の状態確認。
- 2) しばらく使用しなかった本製品を再使用するときは、使用前に清掃、洗浄・消毒作業を行い、必ず本製品が異常なく安全に動作することを確認すること。

●本製品を廃棄するとき

本製品や交換した部品を廃棄するときは、感染予防を十分行い、その時点での法規制にしたがい、適切な処理をしてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

タカラベルモント株式会社

TEL : 06-6212-3620

販売業者

取扱説明書を必ずご参照ください。