

診療椅子 マンモキュート

【警告】


- 1) 患者および使用者の手・指・身体の一部を機器の可動部や可動部の周辺に近寄らせないこと。

【形状・構造及び原理等】

1) 作動原理

本製品は、ペダルを踏むことで本体が昇降します。また、スライド解除レバーの操作によりシートが左右に移動します。

2) 外観図

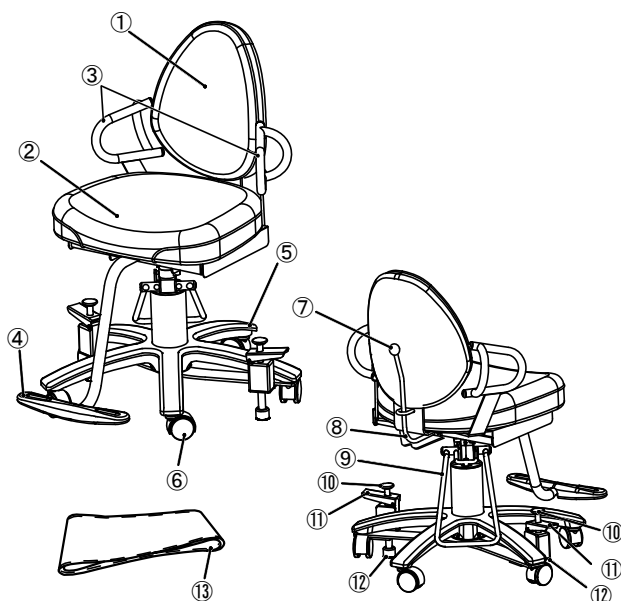

- ①背モタレ ②シート ③グリップ
④ステップ ⑤ベースフレーム ⑥キャスター
⑦スライド解除レバー ⑧センター目印板 ⑨ペダル
⑩ロックペダル ⑪ロック解除ペダル ⑫ストッパー
⑬ベルト

〈動作保証条件〉

下記の条件にて使用すること。(但し、結露しないこと)

温度…10℃～40℃

湿度…10%～90%

気圧…700hPa～1060hPa

【使用目的又は効果】

本製品は、診療室などで使用し、患者の診療、および処置に使用することを目的とした診療・処置用椅子です。

【使用方法等】

〈使用方法〉

- ①ロックペダルを踏み、本製品を固定する。
- ②本製品の操作はペダルおよびスライド解除レバーで行う。
- ③本製品への乗り降りは、ペダルを深く踏みシートの高さが下限位置にし、スライド解除レバーでシートをセンター位置に固定してから行う。
- ④本製品を移動させるときは、ロック解除ペダルを踏む。

機器の詳細な操作方法および使用方法については

付属の取扱説明書「操作方法・使用方法」の項を必ず読むこと。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 機器周辺に、患者以外(特に小児など)を近づけないこと。やむを得ず、患者以外を近づける場合、機器の操作中は、患者以外の安全にも考慮すること。
- 2) ステップに乗らないこと。転倒によりけがをすることがあります。
- 3) 背モタレ、およびグリップには乗ったり、腰をかけたりしないこと。転倒によりけがをすることがあります。
- 4) お手入れは取扱説明書に従って実施すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈耐用期間〉

- ・本製品の耐用期間は、正規の保守点検をした場合に限り7年間です。[自己認証(当社データ)による]
- ・シートなどのクッション類は使用環境によって異なります。

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項〉

保守点検には日常点検と定期点検があります。

・日常点検

詳細については取扱説明書の「保守点検」の項に記載しています。日常点検内容を確認し、必ず実施してください。

点検頻度	
始業前	設置状態の確認
	機器の作動の確認
始業前/終業後	外観の確認

・定期点検

使用頻度に合わせて機能低下や消耗する部品、部位がありますので、1年に1度を目安にした定期点検による保守(消耗品交換を含む)と、安全性確認を推奨します。定期点検の内容は日常点検と同等です。

〈業者による保守点検事項〉

使用者による保守点検と同等の内容を実施してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

タカベルmont株式会社

TEL : 06-6212-3620

販売業者

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。