

機械器具 1 手術台及び治療台
一般医療機器 汎用診断・処置用テーブル (13958009)

検査台 US-400


【警告】

1) 患者および使用者の手・指・身体の一部を機器の可動部や可動部の周辺に近寄らせないこと。


【形状・構造及び原理等】

〈装置外観図〉

〔標準仕様〕

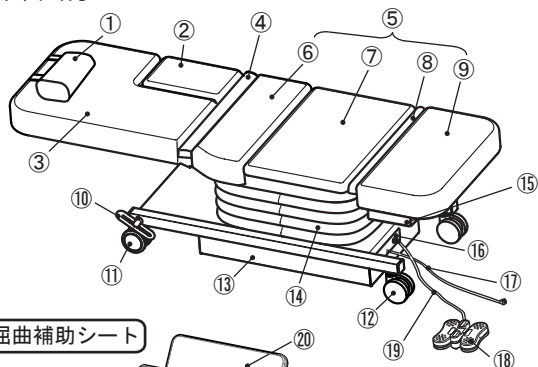

〔シート一枚仕様〕

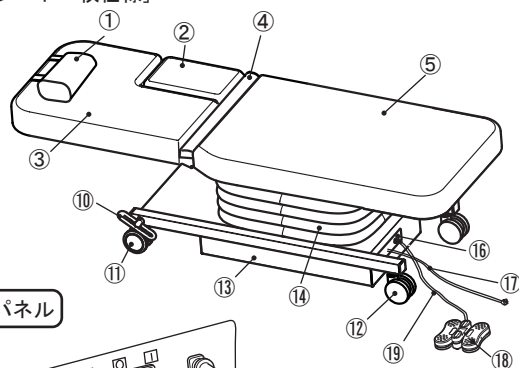

- ①枕 ②胸部 ③背モタレ ④隙間クッション ⑤シート
⑥シート(前) ⑦屈曲補助シート ⑧隙間クッションL
⑨シート(後) ⑩キャスターロックペダル ⑪キャスター(前)
⑫キャスター(後) ⑬ベース ⑭ジャバラ ⑮手すり置き
⑯電源パネル ⑰電源コード ⑱フットスイッチ
⑲フットスイッチ中継コード ⑳モタレクッション
㉑シートクッション ㉒手すり ㉓機器用インレット
㉔機器用コネクター ㉕電源ヒューズ ㉖電源スイッチ

- (1) 本体寸法・・・670 mm×1960mm
(2) 質量・・・170kg
(3) 電気定格・・・AC100V 400/460VA 50/60Hz
(4) 動作原理・・・電動油圧式

〈性能〉

- (1) 本体昇降範囲・・・430 mm～780 mm (電動油圧式)
(2) 背モタレ昇降範囲・・・0°～70° (電動油圧式)
(3) 胸部昇降範囲・・・0mm～160mm (シート面基準)
(電動油圧式)
(4) 屈曲補助シート調節範囲・・・0°～90° (6°刻みで調節可能)
(標準仕様のみ)
(5) コントロール操作電圧・・・DC5V
(6) 作動(運転)モード・・・非連続作動 最大連続作動時間 3分
デューティーサイクル 1:5
(1分の作動につき5分間の休息)
(7) 電撃に対する保護形式・・・クラス I B形装着部

〈動作保証条件〉

下記の条件にて使用すること。(但し、結露しないこと)
温度…10℃～40℃
湿度…10%～90%

* 気圧…700hPa～1060hPa

【使用目的又は効果】

本製品は、診療室などで使用し、患者の診断、および処置に使用することを目的とした電動油圧式の汎用診断・処置用テーブルです。

【使用方法等】

〈設置方法〉

- ・本製品は、必ず平らで丈夫な床の上に設置すること。床面が5°以上傾いている場所へ設置すると本製品が転倒するおそれがあります。(取扱説明書の「設置」の頁を参照のこと。)
- ・壁ぎわに設置される場合、本製品を壁から10cm以上離して設置すること。
- ・本製品は移動するとき以外、必ずキャスターをロック状態にすること。

〈使用方法〉

- ①機器用インレットに機器用コネクターを差し込み、電源プラグをアース端子付コンセントに差し込み、電源スイッチを入れます。
- ②本製品の操作はフットスイッチで行います。
- ③診断・処置終了後は電源スイッチを切り、電源プラグをアース端子付コンセントから抜いてください。

機器の詳細な操作方法、および使用方法については
付属の取扱説明書「操作方法・使用方法」の項を必ず読むこと。

*** * 【使用上の注意】**

〈重要な基本的注意〉

- 1) 機器周辺に、患者以外（特に子供）を近づけないこと。
やむを得ず、患者以外を近づける場合、機器の操作中は、患者以外の安全にも考慮すること。[挟み込みによる怪我の防止]
 - 2) 本製品は出荷時に消毒・滅菌などがされていないので、使用前に清拭作業を行なうこと。
 - 3) 人体質量135kgより大きな人、及び同時に複数の人を乗せないこと。
 - 4) 薬液等が樹脂や金属塗装面に付着した場合、樹脂が変質したり、塗装が剥れ、内部金属が腐食する恐れがあるので、速やかに清拭してください。
- * * 5) 他の医用電気機器と併用する場合、電磁的影響による不正な動作が発生することがないか使用前に確認すること。**
- 6) 油圧モータを3分以上連続で作動させないこと。
モータの温度過昇防止装置が働き、操作できなくなります。

*** 【保管方法及び有効期間等】**

〈使用期間〉

非連続作動

最大作動時間 3 分

デューティサイクル 1 : 5

〈耐用期間〉

- ・ 本製品の耐用期間は、正規の保守点検をした場合に限り 10 年間はです。[自己認証（当社データ）による]
- ・ シート、背モタレ、枕などのクッション部品、およびスイッチ類は使用環境によって異なります。

【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書の「保守点検」の項を使用前に必ず読むこと。

- 1) 日常点検の項目
 - ・ 設置状態の確認
 - ・ 電源スイッチの確認
 - ・ フットスイッチ操作での作動確認
 - ・ シート・背モタレ・胸部昇降機構部からの異臭の確認
 - ・ 上昇したシート・背モタレ・胸部の高さが一定位置で停止しているかの確認
 - ・ オイル漏れ
 - ・ 外観部品の状態確認
 - ・ キャスターロックペダルの操作確認
- 2) しばらく使用しなかった本製品を再使用するときは、使用前に清掃を行い、清拭作業を行った後、必ず本製品が異常なく安全に作動することかを確認してください。

● 本製品を廃棄するとき

本製品や交換した部品を廃棄するときは、感染予防を十分行い、その時点での法規制にしたがい、適切な処理をしてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

タカラベルモント株式会社

TEL : 06-6212-3620

販売業者

取扱説明書を必ずご参照ください。