

ベルフリット


【警告】

- １）患者および使用者の手・指・身体の一部を機器の可動部や可動部の周辺に近寄らせないこと。
[挟まれて人身事故の原因になります。]


【形状・構造及び原理等】

- ＊ １）作動原理
ハンドスイッチの操作により電動ギアモータ式アクチュエータが伸縮しシートを昇降させ、背モタレ上部のレバー操作によりガスシリンダーが伸縮し、背モタレ・レッグレスト（※）を寝起きさせることができます。
（※）コンパクトタイプのみ
- ＊ ２）外観図
本製品は背モタレが可動するスタンダードタイプ、背モタレが可動しないフラットタイプ及び、レッグレストが背モタレと連動で可動するコンパクトタイプがあります。


スタンダードタイプ

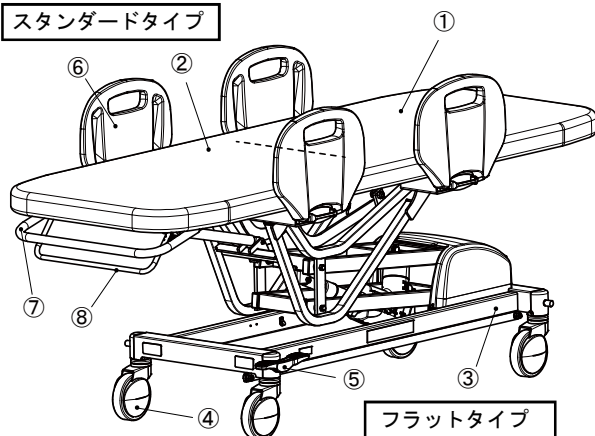

フラットタイプ
スタンダードタイプ
との違いのみ記載

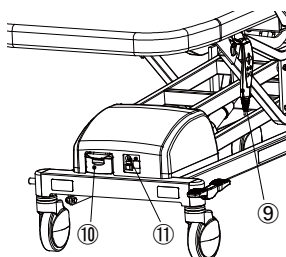

コンパクトタイプ
スタンダードタイプ
との違いのみ記載

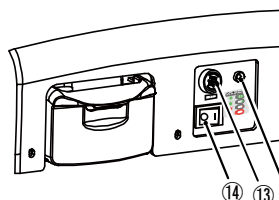

- ①シート ②背モタレ ③ベース ④キャスター
⑤キャスターロックペダル ⑥サイドフェンス
⑦リクライニングハンドル ⑧リクライニングレバー
⑨ハンドスイッチ ⑩バッテリーホルダー（バッテリーパック）
⑪電源パネル ⑫ハンドル ⑬電源ヒューズ ⑭電源スイッチ
⑮バッテリー残量表示ランプ ⑯レッグレスト

＊ ３）機器の分類

- ①電撃に対する保護の形式による分類：内部電源ME機器
②電撃に対する保護の程度による分類：BF形装着部

＊ ４）バッテリーパックの定格

- ①種類：リチウムイオン電池
②定格出力：DC 21.6V
③充電時間：2時間（専用充電器使用）

＊ 〈動作保証条件〉

- 下記の条件にて使用すること。（但し、結露しないこと）
温度…10℃～40℃
湿度…10%～90%
気圧…700hPa～1060hPa

【使用目的又は効果】

本製品は、内視鏡検査室などで使用し、患者の診断及び処置に使用することを目的とした電動ギアモータ式の汎用診断・処置用テーブルです。

＊ ＊ 【使用方法等】

〈使用方法〉

- ①充電されたバッテリーパックをバッテリーホルダーに設置し、電源スイッチを入れます。
電源スイッチが入ると音で知らせます。
②本製品の操作はハンドスイッチで行います。
③本体のバッテリー残量確認
④診療・処置終了後は電源スイッチを切り、バッテリーホルダーからバッテリーパックを取り外し、充電してください。

機器の詳細な操作方法及び使用方法については付属の取扱説明書「使い方」の項を必ず読むこと。

【使用上の注意】

＊ ＊ 〈重要な基本的注意〉

- １）本製品は出荷時に消毒・滅菌などがされていないので、使用前に清掃作業を行なうこと。
２）体重が135kgより重い人、及び同時に複数の人を乗せないこと。
３）薬液等が樹脂や金属塗装面に付着した場合、樹脂が変質したり塗装が剥れ、内部金属が腐食する恐れがあるので、速やかに清掃してください。
４）機器の清掃に取扱説明書で指定した洗剤以外を使用しないこと。
５）患者を乗せての本製品の移動は、必ずサイドフェンスを起こした設置状態で患者に注意して行うこと。
６）本製品は移動するとき以外、必ずキャスターのロック操作を行うこと。[使用中に、本製品が不意に動くと、人身事故や物損事故などの原因になります。]
７）他の医用電気機器と併用する場合、電磁的影響による不正確な動作が発生することがないか使用前に確認すること。
８）本体用バッテリーパック及び充電に関する注意事項
・バッテリーパックの寿命は使用条件や使用環境によって異なります。使用可能時間が短くなったときには、新しいバッテリーパックに交換すること。
・機器をはじめて使用するときや、長時間使用しなかったときには、必ず充電してから使用すること。
・直接日光や暖房など、温度上昇のしやすい場所での充電、保管は避けること。
・バッテリーパックに衝撃を与えたり、加熱、分解、ショートはしないこと。
・バッテリーパックは専用の充電器以外では充電しないこと。

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。

【保管方法及び有効期間等】

〈耐用期間〉

- ・本製品の耐用期間は、日常点検を適切に実施した場合に限り10年間です。[自己認証（当社データ）による]
- ・シート、背モタレのクッション類およびスイッチ・電動ギアモータ等は使用環境により異なります。

* 【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項〉

保守点検には日常点検と定期点検があります。

・日常点検

詳細については取扱説明書の「保守点検」の項に記載しています。日常点検内容を確認し、必ず実施してください。

点 検 頻 度	点 検 内 容
使用前	設置状態の確認
	電源スイッチの確認
	ハndsスイッチ操作での作動確認
	上昇したシートの高さが使用する位置で停止しているかの確認
	キャスターロックペダルの操作確認
使用前/使用后	外観部品の状態確認

・定期点検

使用頻度に合わせて機能低下や消耗する部品、部位がありますので、1年に1度を目安にした定期点検による保守（消耗品交換を含む）と、安全性確認を推奨します。定期点検の内容に関しては取扱店または直接当社にご連絡ください。

〈業者による保守点検事項〉

業者による保守点検（定期点検）を実施するときは当社または当社の指定する業者、若しくは修理業者などの適切な資格者に依頼すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

タカラベルモント株式会社

TEL:06-6212-3620

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。