

機械器具1 手術台及び治療台
一般医療機器 診療・処置用椅子（16437000）

パシエントスツールDR-060HY

【形状・構造及び原理等】


1) 作動原理

本製品は、フットペダルの操作により座面の高さが昇降します。


2) 外観図

本製品は、背もたれあり仕様と背もたれなし仕様があります。

背もたれありタイプ

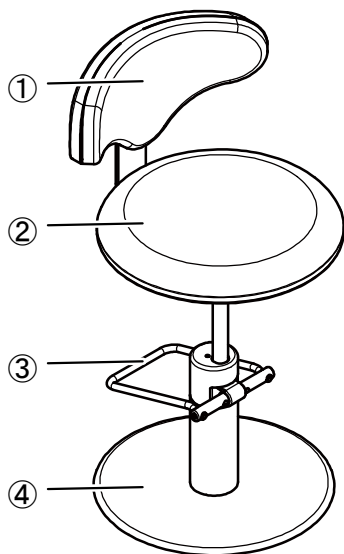

背もたれなしタイプ

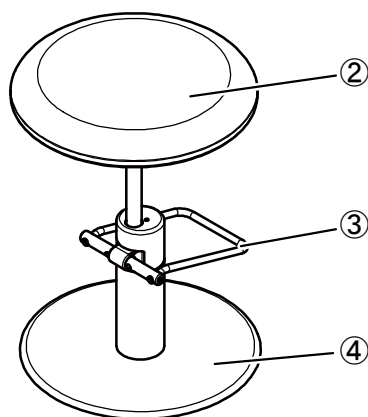

①背もたれ ②シート ③フットペダル ④ベース

〈動作保証条件〉

下記の条件にて使用すること。（但し、結露しないこと）

温度…10℃～40℃

湿度…10%～90%

気圧…700hPa～1060hPa

【使用目的又は効果】

本製品は、診察室・処置室で患者の診療・処置するために用いられ、手動により座面の高さを変更できる椅子である。

【使用方法等】

〈使用方法〉

- ①フットペダルを操作して本製品の座面を下限位置に移動する。
- ②患者が本製品に乗る。
- ③施術しやすい座面の高さになるようにフットペダルを操作する。

本製品の詳細な操作方法および使用方法については付属の取扱説明書「使い方」の項を必ず読むこと。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 患者および使用者の手・指・体・衣服の一部を製品の可動部や可動部の周辺に近寄らせないこと。
- 2) 製品周辺に、患者以外（特に小児など）を近づけないこと。やむを得ず、患者以外を近づける場合、製品の操作中は、患者以外の安全にも考慮すること。
- 3) 椅子を持ち運ぶときは、フットペダルを上げてシートをロックすること。
- 4) お手入れは取扱説明書に従って実施すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈耐用期間〉

- ・本製品の耐用期間は、正規の保守点検をした場合に限り10年間です。〔自己認証（当社データ）による〕
- ・シートなどのクッション類は使用環境によって異なります。

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項〉

保守点検には日常点検と定期点検があります。

・日常点検

詳細については取扱説明書の「保守点検」の項に記載しています。日常点検内容を確認し、必ず実施してください。

点 検 頻 度	
始業前	設置状態の確認
	フットペダル操作の確認
始業前/終業後	外観の確認

・定期点検

使用頻度に合わせて機能低下や消耗する部品、部位がありますので、1年に1度を目安にした定期点検による保守（消耗品交換を含む）と、安全性確認を推奨します。定期点検の内容に関しては取扱店または直接当社にご連絡ください。

〈業者による保守点検事項〉

業者による保守点検（定期点検）を実施するときは当社または当社の指定する業者、若しくは修理業者などの適切な資格者に依頼すること。

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。

1E0AYCA0

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

タカラベルモント株式会社

TEL : 06-6212-3620

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。