

BT14

【警告】

ノズルが確実に装着されているのを確認すること。


【禁忌・禁止】

次の行為の禁止

- ・未整備状態での使用。（未整備とは、定期点検や日常点検をしていない状態をいう）

【形状・構造及び原理等】

* 1) 外観図

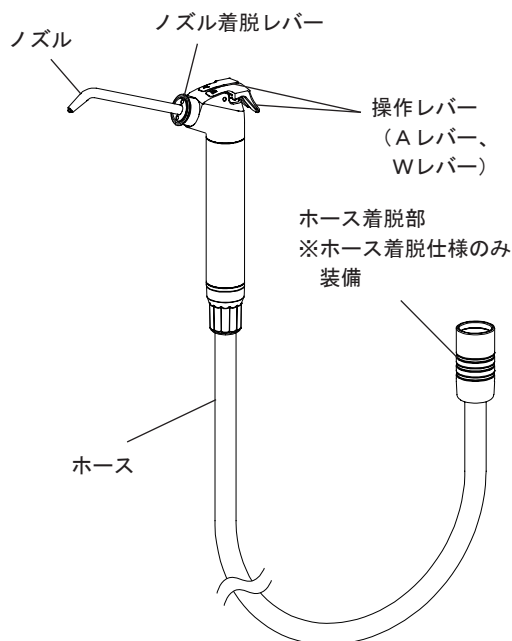

2) 作動・動作原理

歯科用ユニットより供給された水とエアは各操作レバーを押してバルブが開くことにより、ノズル先端部から噴出する。また、操作レバーを同時に押すと水とエアがスプレー状態で噴出する。操作レバーの押し込み量により、水、エア、スプレー状態の噴出量を調整する。

3) 電気定格

本製品は非電気機器であるため該当しない。

* 4) 機器の仕様

- ・供給エア圧力 0.45～0.5 MPa
- ・供給水圧力 0.1～0.2 MPa
- ・噴射エア量 28 L/min
(供給エア圧力0.5 MPaの場合)
- ・噴射水量 0.1 L/min
(供給水圧力0.2 MPaの場合)

【使用目的又は効果】

本製品は、歯科用ユニットに接続し、歯科治療における治療部位等の洗浄及び異物を除去するために用いる。

【使用方法等】

操作方法

- ①水とエアは各操作レバーを押すことにより、ノズル先端部から噴出する。
- ②操作レバーを同時に押すと水とエアがスプレー状態で噴出する。
- ③操作レバーの押し込み量により、水、エア、スプレー状態の噴出量を調整する。

【使用上の注意】

* ・使用上の注意事項

- ①ノズルが確実に装着されているのを確認する。
 - ②操作レバーを押し、水、エア、スプレー状態が正常に噴出すること、また、操作レバーを戻すと噴出が止まることを確認する。
- ・使用中の注意事項
 - ①ホースに無理な力を加えないこと。
 - ・使用後の注意事項
 - ①ノズル着脱レバーを操作してノズルを引き抜き、ノズルの残留物を取り除き、流水で清掃したあと、高圧蒸気滅菌をする。
 - ②本製品が汚れた場合は、消毒用エタノールまたは当社指定の洗剤で清拭すること。

【保管方法及び有効期間等】

1) 貯蔵・保管方法

- ①水のかからない場所に保管すること。
- ②気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分等を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ③傾斜、振動、衝撃（移動運搬時を含む）等、安定状態に注意すること。
- ④化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。

**2) 耐用期間

正規の点検を行った場合に限り、販売後7年間
〔自己認証（当社データ）による〕とする。

****【保守・点検に係る事項】**

〈使用者による保守点検事項〉

使用者による保守点検内容の概要は、下記のとおりとする。
詳細は取扱説明書を参照すること。

保守点検項目		保守点検頻度
1	水／エアーの漏れ確認	始業前
2	レバーの作動確認	始業前
3	水／エアーの流量確認	始業前
4	ホース着脱部の接続確認	始業前
5	ノズルのロック状態確認	患者ごと

〈業者による保守点検事項〉

1年ごとの定期点検を当社または当社の指定する業者に依頼すること。
詳細は取扱説明書を参照すること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 タカラベルモント株式会社 TEL：06-6212-3619
販売業者

取扱説明書を必ずご参照ください。