


ステラライトTタイプ

【形状・構造及び原理等】

1) 作動原理

- ①電装ボックス部にあるSENSOR/MANUAL切替スイッチでSENSORモードとMANUALモードと消灯を選択することができ、SENSORモードを選択することにより、電装ボックス内部に置かれた電源回路から電力供給を受けLEDを点灯させることができる。タッチレスセンサーにより、ライト（本体）に触れることなく、消灯／点灯、診察モード／レジンモード（照度：5500lx）の切替えを行なうことができる。なお、診療モードにおける照度レベルの切替えに関しては、ヨーク部に設けたボリュームにより照度の変換を4000～35500lxの間、無段階で行なうことができる。
- ②MANUALモードを選択すると、タッチレススイッチ、ボリュームに関係なく、診療モードの最大照度で点灯できる。
- ③LEDの光源はレンズモジュールにより、必要なライトパターンを得る。

2) 外観図

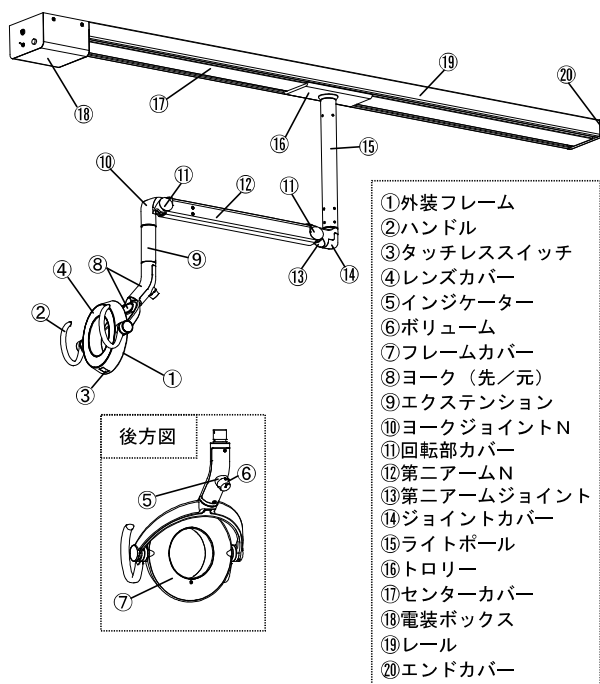

3) 電氣的定格

- ①電源電圧：100V AC
- ②電源周波数：50／60Hz
- ③電源入力：0.49A

4) 機器の分類

- ①電撃に対する保護の形式：クラスⅠ機器
- ②電撃に対する保護の程度：B形装着部

＜動作保証条件＞

下記の条件にて使用すること。（但し結露しないこと）
周囲温度：0～40℃
相対湿度：10～95%
気圧：700～1060hPa

5) 機器の仕様

記載の寸法の許容差は±10%である。

①光源

LED

②光学性能

- ・標準照射パターン：H85mm×W155mm
- ・標準照射距離：650mm
- ・中心照度：4000～35500lx
- ・中心色温度：5000±300K

③各可動部の可動範囲

・ライトヘッド部

水平方向に対し320°、鉛直方向に対し水平を基準に上に15°、下に130°、斜め軸方向に180°の範囲で可動し、この範囲において任意の位置に固定して使用することができる。

・アーム部

水平方向に対し260°、また、鉛直方向に対し水平を基準に上に35°、下に40°の範囲で可動し、この範囲において任意の位置に固定して使用することができる。

・トラックレール部

トロリーによりレール内を移動しその走行ストロークは1411mmを有する。

【使用目的又は効果】

本製品は、歯科診療時・手術時に口腔内を照らす目的として使用する、歯科用の照明器である。

【使用方法等】

1) 取付・設置（組立て・据え付け）

機器の取付・設置は専門の担当者（当社又は当社指定の業者）が行なうこと。

2) 操作方法又は使用方法

機器の詳細な操作方法及び使用法は付属の取扱説明書を使用前に必ず読むこと。

***【使用上の注意】**

＜重要な基本的注意＞

- 1) 当製品に使用しているＬＥＤ光源は強い光を発しています。まれに、体が過敏に反応し、めまいや吐き気などを引き起こす場合がありますので、照度を落としたり、必要な時以外は消灯することで、強い光が長時間目に入らないようにご注意ください。
- 2) 薬液等が樹脂や金属塗装面に付着した場合、樹脂が変質したり、塗装が剥れ、内部金属が腐食するおそれがあるので、速やかに清拭すること。
- 3) 本製品の清掃には取扱説明書で指定した洗剤を使用すること。
- 4) 本製品は、当社指定の装置及び付属品に設置して使用すること。
- 5) 本製品の傍で、携帯電話など電磁波を発生する機器の使用は、製品に障害を及ぼすおそれがあるので、使用しないこと。
- 6) アーム部に無理な荷重をかけないこと。アームのスイングは、スムーズに行ない、肘をかけたり、ぶら下がったりしないこと。（破損のおそれがあるため）
- 7) 回転部カバー未装着の状態でアームをスイングさせないこと。（アーム関節部に手指を挟むおそれがあるため）
- 8) レンズカバーに変色、破損、ヒビ割れ等が無いこと。変色、破損、ヒビ割れ等が確認された場合は、そのままの状態では使用せずにレンズカバーを交換して使用すること。（光学性能低下の原因となるため）
- 9) アーム部やヘッド部に衝撃を加えないこと。（ＬＥＤやアーム等の破損の原因となるため、ＬＥＤに繰り返し衝撃を加えるとＬＥＤの寿命が極端に短くなる場合があるため）
- 10) 診療後、または使用しない時は、本体電源を切ること。

****【保管方法及び有効期間等】**

＜耐用期間＞

販売後１０年間。[自己認証（当社データ）による]

※正規の使用法、保守点検、消耗品などの交換を行った場合に限り。

***【保守・点検に係る事項】**

＜使用者による保守点検事項＞

使用者による保守点検の概要は、下記のとおりとする。
詳細は取扱説明書を参照すること。

保守点検内容		保守点検頻度
1	レンズカバーの状況確認	始業前
2	ＬＥＤランプ点灯確認	始業前
3	タッチレススイッチ作動確認	始業前
4	ボリウム作動確認	始業前
5	第二アームNのスイングおよび停止確認	始業前
6	ライトヘッド回転および停止確認	始業前
7	ライトヘッドの位置確認	始業前
8	ライトヘッドの回転確認	始業前
9	トロリーの走行確認	始業前
10	レールの固定状態確認	始業前
11	患者用ミラー（オプション）の鏡面状態確認	始業前
12	汚れ、薬液・薬剤の除去	始業前

＜業者による保守（定期）点検事項＞

１年ごとの定期点検を当社または当社の指定する業者に依頼すること。
詳細は取扱説明書を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

製造販売業者
タカラベルモント株式会社
TEL：０６－６２１２－３６１９

販売業者

取扱説明書を必ずご参照ください