

機械器具 67 歯科用防湿器
一般医療機器 歯科用ラバーダム（11155010）

デンタルダム

再使用禁止

【禁忌・禁止】


**再使用禁止

- ①この製品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
- ②ディスポーザブル製品であるので再使用禁止。

**【形状・構造及び原理等】

1) 構成

ラバーダムシートには定形に切断されたレディー・カット状のものと定形に切断されていないロール状のものがあり各寸法及び色別種類は次のとおりである。

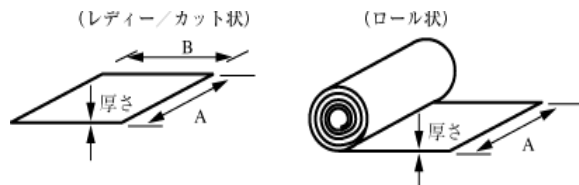

種類・形状	寸法	
	A	B または 全長
レディー・カット状	1 2 7 mm (5 インチ)	1 2 7 mm (5 インチ)
	1 5 2 mm (6 インチ)	1 5 2 mm (6 インチ)
ロール状	1 2 7 mm (5 インチ)	6 . 7 m (2 2 フィート)
	1 5 2 mm (6 インチ)	5 . 5 m (1 8 フィート)

厚さ：上記全種類につき次の厚さがある。

（厚さ表示）

シン：0. 2 0 3 2～0. 1 0 1 6 mm

ミディアム：0. 2 5 4 0～0. 1 5 2 4 mm

ヘビー：0. 3 0 4 8～0. 2 0 3 2 mm

色調：上記全種類につき次の色調がある。

ライト・ダーク・グリーン・ブルー

〔備考〕寸法は標準を示す。

主材料：天然ゴム

2) 製品の仕様

本品は口腔内の防湿、治療中の器具の誤飲防止に用いる天然ゴム製のシートである。

*【使用目的又は効果】

パンチで穴をあけ、歯牙に被せるラテックスゴム製シートで歯科治療中に口腔内で手術野を隔離するために用いる。

【使用方法等】

本品を取り出し市販のラバーダムパンチ及びラバーダムクランプ等を用いて処置歯を露出させた後、本品をダムフレームの保持突起部に固定させたくえで歯牙の治療にあたる。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 本材に対してかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみなどの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本材に対してかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみなどの過敏症状があらわれた患者には、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

**＜保管の条件＞

常温常湿

**＜有効期間＞

使用期限 外箱に使用期限を記載している。

使用期限を過ぎたものは、使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：タカラベルモント株式会社

T E L: 06-6212-3619

**製造業者：コルテン・ウェルデントインク（アメリカ合衆国）

Colte(`)ne/Whaledent Inc. (USA)

販売業者