

機械器具 1 手術台及び治療台
一般医療機器 汎用電動式手術台（JMDN コード：36867020）
特定保守管理医療機器 外科用手術台 DR-2000（DR-KM1800）

【警告】

機器の動作範囲内に人及び物、又は手や指が無い
必ず確認すること。[挟み込みによる怪我の防止]

【禁忌・禁止】

**〈使用方法〉


当社及びタカラ Belmont 製以外の装置や付属品については、取扱説明書や添付文書等で安全性・有効性を確認できない場合は、本製品に取り付けて使用しないこと。[安全性が保証できないため]

*【形状・構造及び原理等】

1) 作動原理

本機は、フットスイッチ操作により、油圧機構が働き、テーブルトップ上昇、縦転、背板の昇降を制御範囲内で行うことができる。
また、手動でレバーを引くことで枕板屈曲を行うことができる。

**2) 外観図

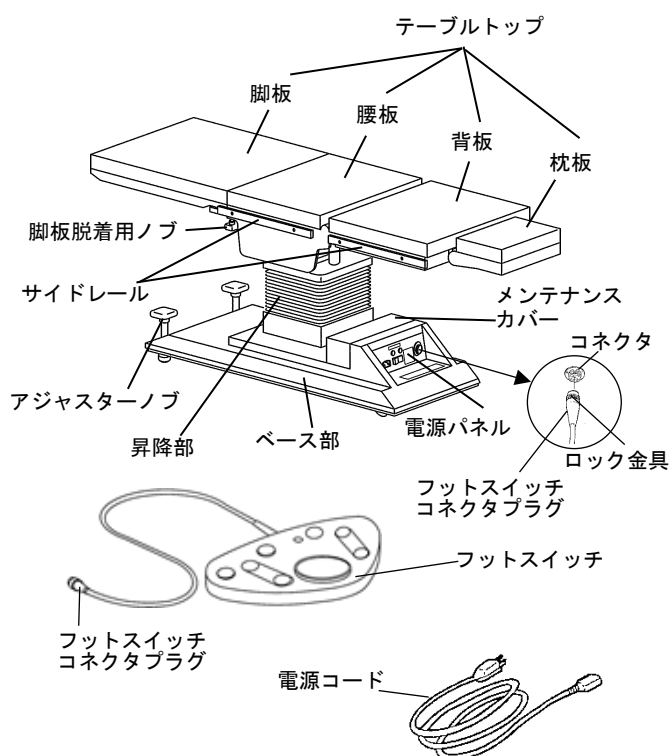

3) 機器の分類

JIS T0601-1 による分類は以下の通りである。

電撃に対する保護の形式による分類：クラス I 機器

電撃に対する保護の程度による装着部の分類：B 形装着部
(テーブルトップのクッション)

4) 電氣的定格

定格電源電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

電源入力：5A

電源電圧範囲：定格±10%

作動モード：非連続作動 最大3分 Duty Cycle 1:20

〈動作保証条件〉

下記の条件にて使用すること。(ただし、結露しないこと)

周囲温度：10～40℃

相対湿度：30～75%

気圧：700～1060hPa

【使用目的又は効果】

本機は、一般外科等における手術台として使用する。

**【使用方法等】

〈設置方法〉

機器の詳細な設置方法は付属の設置説明書に従うこと。

〈使用方法〉

機器の詳細な使用方法是付属の取扱説明書を使用前に必ず読むこと。

*【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

**①他の医用電気機器（電気メス等）と併用する場合、電磁的影響による不正確な動作が発生することがないか使用前に確認すること。

**②患者の体位を保持する場合は、常に患者の状態を監視すること。[長時間体位を固定すると患者に障害がおこるおそれがあります。]

③体重が 135kg 以上の人は乗せないこと。[荷重条件により本体が作動しない場合があります。]

④電源コードやフットスイッチのコードをベース部に置かないこと。テーブルトップを下降させるときに昇降カバーに挟んでしまい、断線、ショートによる感電や発火の原因になります。[絶縁不良による漏電・火災のおそれがあります。]

⑤操作前にノブは必ず確実に締め付けて、脚板が確実に取り付けいた状態であつ抜けを確認すること。[脱落防止]

⑥フットスイッチコネクタプラグをコネクタに差し込んだ後は、ロック金具を回して締め付けること。[ロック金具を締め付けていないとプラグが抜け、誤作動の原因になります]

⑦以下の操作は動作する部位を目視で確認しながら行うこと。
[先端が床やベース部に当たり破損するおそれがあります]

・背板を下降させた状態での縦転

・テーブルトップを縦転させた状態での背板の下降

⑧枕板を操作するときは、患者の頭の重さを考えて両手で慎重に操作すること。[枕板は、非常に軽く動きますので急激に下側へ折り曲がり思わぬ事故の原因になります。]

**⑨枕板部に 10kg を超える負荷を加えないこと。[重量により、操作者が支えられず急激に下部へ折り曲がり思わぬ事故の原因になります。]

⑩テーブルトップの端に腰掛けたり、過度の荷重をかけたりしないこと。また、枕板および脚板から乗り降りしないこと。[過負荷による故障や破損、転倒の原因になります]

**⑪お手入れは取扱説明書に従って実施すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈耐用期間〉

- ・本機の耐用期間は 10 年です。(自己認証(当社データ)による)

※正規の使用方法、保守点検、消耗品などの交換を行った場合に限る。

- ・クッション部品、及びスイッチ類は使用環境によって異なります。

**

*【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書の「保守点検の」項を使用前に必ずお読みください。

〈使用者による保守点検(日常点検)〉

頻度	内容
使用前	設置状態の確認
	外観状況の確認
	作動状況の確認
	枕板のツメが確実にギヤーに挿入され、状態を確実に保持出来ること
	作動中に異音、振動、異臭等していないことの確認

**〈業者による保守点検〉

1 年ごとの業者による保守点検を実施するときは、当社または当社の指定する業者、若しくは修理業者などの適切な有資格者に依頼すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

タカラメディカル株式会社

TEL : 06-6499-3461