

透視用上台 M


*【禁忌・禁止】

〈使用方法〉


当社及びタカラ Belmont 製の高さ 32mm×板厚 9mm のサイドレールを使用する製品以外には、取り付けて使用しないこと。[安全性が保証できないため]

【形状・構造及び原理等】

1) 外観図

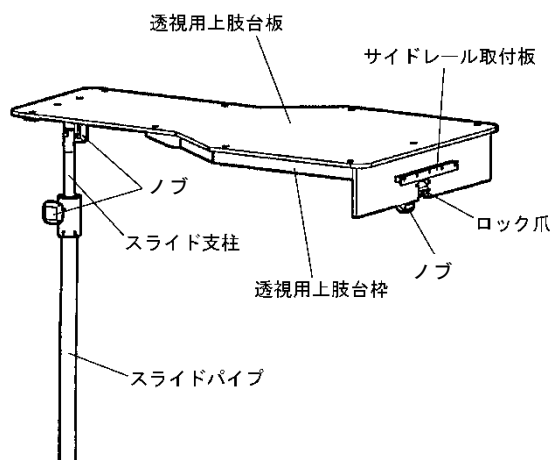

〈取付詳細図〉

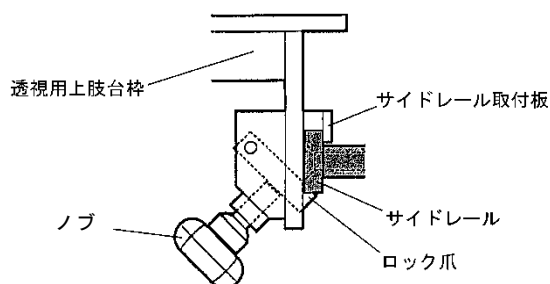

* 2) 機器の仕様

- ①透視用上台枠のノブ操作により、手術台のサイドレールに着脱させることができます。
- ②スライド支柱のノブ操作により、スライド支柱を 90° 屈曲させることができます。
- ③スライドパイプのノブ操作により、スライドパイプを 400mm の範囲で昇降させることができます。

〈動作保証条件〉

下記の条件にて使用すること。（ただし、結露しないこと）
周囲温度 10～40℃ 相対湿度 30～75% 気圧 700～1060hPa

【使用目的又は効果】

本機は、手術台に取り付け、患者の上腕を乗せ、手術及び透視撮影に使用する。

*【使用方法等】

〈使用方法〉

機器の詳細な使用方法是付属の取扱説明書を使用前に必ず読むこと。

*【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ①サイドレールに確実に固定されているか確認すること。確実に固定されずに使用されますと、手術中に不意に落下し思わぬ事故の原因になります。
- ②透視用上台板の上に腰掛けたり脚立代わりに使用しないこと。機器の破損や、落下事故及び転倒事故の原因になります。
- ③機器を固定したまま、手術台を操作しないこと。機器の破損の原因になります。
- ④透視用上台中央部に許容負荷荷重（300N）以上の負荷を加えないこと。機器の破損の原因になります。
- ⑤お手入れは取扱説明書に従って実施すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈耐用期間〉

- ・本機の耐用期間は 10 年です。（自己認証（当社データ）による）
- ※正規の使用法、保守点検、消耗品などの交換を行った場合に限る。
- ・クッション部品は使用環境によって異なります。

*【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書の「保守点検」の項を使用前に必ずお読みください。

〈使用者による保守点検（日常点検）〉

頻度	内容
使用前	設置状況の確認
	外観状況の確認
	作動状況の確認
	その他の確認

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。

*〈業者による保守点検〉

業者による保守点検を実施するときは、当社または当社の指定する業者、若しくは修理業者などの適切な有資格者に依頼すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

タカラメディカル株式会社

TEL：06－6499－3461